

# MEBER<sup>+</sup>

IN CASE OF EMERGENCY

**www.meber.it**

Organo di informazione aziendale realizzato  
da Me.Ber. srl. Per informazioni contattare  
[contact@meber.it](mailto:contact@meber.it) o accedere al sito [www.meber.it](http://www.meber.it)

**Medical Journal**

## EXTRA<sup>+</sup> ERGOLIFT

POWERED STAIR CHAIR

Me.Ber. presenta:  
**EXTRA ERGOLIFT**  
la rivoluzionaria  
sedia  
sali/scendiscale  
motorizzata



ORDINARIA.  
STRAORDINARIA.  
CONSCIAMO INSIEME  
EXTRA ERGOLIFT

**3**

PERCHE' SCEGLIERE  
EXTRA ERGOLIFT?

**4**

NEWS IN BREVE

**8**

18 rampe da 20 scalini  
con un carico di 130 kg



**TRAUMA**

Leghe di alluminio

Scopriamo insieme  
tutti i dettagli >>

**Salite ad un altro livello**




Inquadra il QR Code per visitare la pagina web dedicata a Extra Ergolift.

# SALITE AD UN ALTRO ...LIVELLO

Meber presenta Extra Ergolift, la sua prima rivoluzionaria, sedia motorizzata in grado di salire e scendere le scale. Deriva dalla serie di sedie di grande successo Extra, della quale mantiene le caratteristiche ergonomiche e strutturali che l'hanno contraddistinta sul mercato: design innovativo, largo uso di materiali tecnologicamente avanzati, facilità d'uso, leggerezza e affidabilità.



Extra Ergolift

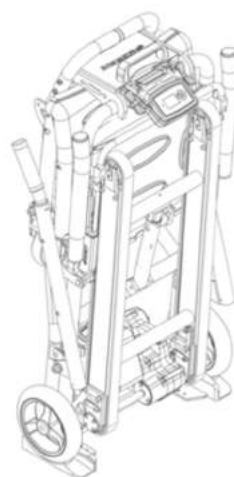

Alloggiamento Extra Ergolift su mezzo di soccorso con sistema di fissaggio - rendering

I principali utilizzi di una sedia motorizzata sono tipicamente i servizi ordinari o secondari, ad esempio i servizi di trasporto in cui il paziente viene prelevato o riaccompagnato a casa o presso una struttura di degen-

za, in cui potrebbe non essere presente l'ascensore. Lavorando al progetto di Extra Ergolift giorno dopo giorno, ci siamo resi conto che le sue caratteristiche uniche la rendono adatta anche all'utilizzo in situazio-

ni critiche o, più semplicemente, all'impiego come dispositivo di supporto alla movimentazione in grandi strutture non sanitarie (aeroporti, stazioni, alberghi, ecc.)





# ORDINARIA. STRAORDINARIA.

Siamo orgogliosi di poter affermare che la sedia **Extra Ergolift** è possibile definirla come: **ordinaria e straordinaria**. Equipaggi composti da sole donne o da personale che normalmente richiede aiuto fisico possono movimentare senza **alcun sforzo** anche pazienti molto pesanti.

Basti pensare che la sedia è in grado di trasportare in **sicurezza** pazienti **bariatrici** fino ad un peso di **200 kg** nel trasporto motorizzato e **230 kg** in configurazione manuale, sia in salita sia in discesa.



### Facilità d'uso

➡ Ulteriore dimostrazione dell'utilità e dell'efficacia di questo prodotto è la possibilità di recuperare velocemente e in **sicurezza** pazienti **non traumatici** dai piani interrati.

Con **Extra Ergolift** si può evacuare senza problemi il paziente utilizzando un equipaggio composto anche da **solo due persone**.

➡ **Extra Ergolift** è il fantastico risultato dell'intenso percorso di **ricerca, innovazione e miglioramento** continuo in cui MeBer è impegnata attivamente fin dalle origini. Extra Ergolift è il connubio dei più avanzati **accorgimenti strutturali ed ergonomici**. Il meglio dell'innovazione ha dato forma alla **sedia più avanzata e sicura** mai prodotta da MeBer.



# PERCHE' SCEGLIERE EXTRA ERGOLIFT?

## LA RISPOSTA IN 6 PUNTI:

Dispositivo unico e alla portata di tutti!

Dal più esile al più robusto, che siate giovani o anziani, chiunque può guidare la sedia motorizzata Ergolift con il minimo sforzo. Non importa quale sia la forma della scala: lineare, a chiocciola o esterna, Extra Ergolift ha caratteristiche uniche che permettono in ogni circostanza il trasporto di soggetti anche di grossa corporatura con una semplice mossa.

**CONSOLE WIRELESS**

**LEGA LEGGERA**

**MOTORE SEMPLICE  
E COMPATTO**

**ELEVATO COMFORT  
IN PIANO**


**BATTERIA AD  
ELEVATA CAPACITA'**

**STABILITA' SULLE  
SCALE**



# I PUNTI DI FORZA

## 1. CINGOLI LUNGHI AD ALTA ADERENZA

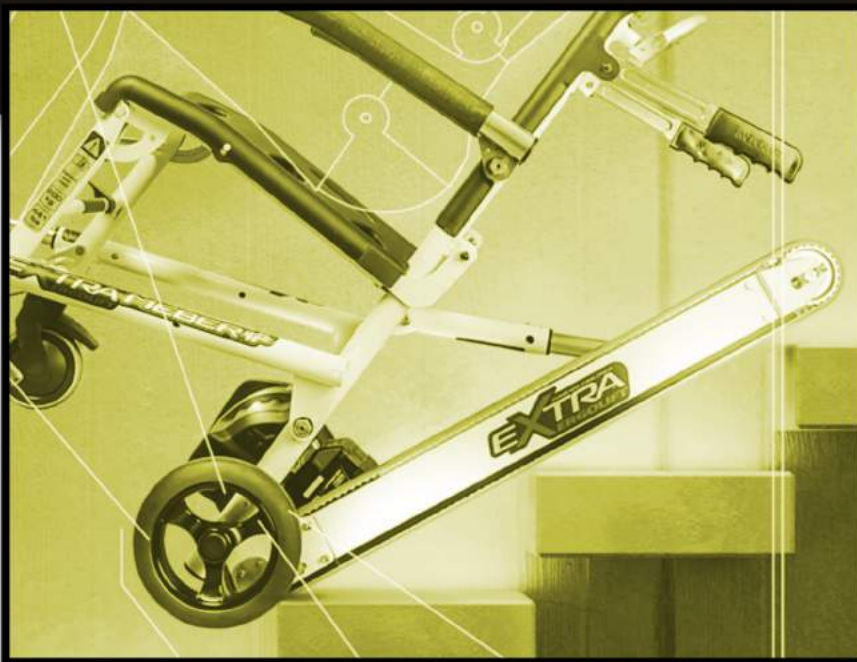


I pattini di Extra Ergolift hanno una lunghezza maggiorata che consente l'appoggio costante su tre gradini per una maggiore **stabilità** ed un **elevato comfort**.

## 2. STABILITA' E SICUREZZA SENZA EGUALI

Chi sceglie Extra Ergolift ha la certezza di garantire il massimo livello di sicurezza sia agli operatori sia ai pazienti, esattamente come esige la legge.

Extra Ergolift è pensata per evitare infortuni durante il servizio e garantisce la massima operatività anche a personale con poca forza fisica.

Le leve anteriori allungabili, il maniglione posteriore telescopico con presa rivestita, i pratici braccioli rivestiti e la pedana poggiapiedi anteriore consentono una straordinaria distribuzione dei pesi e una stabilità ineguagliabile. Infine, le ruote consentono di percorrere con maggiore facilità anche i terreni più impervi, evitando sobbalzi.

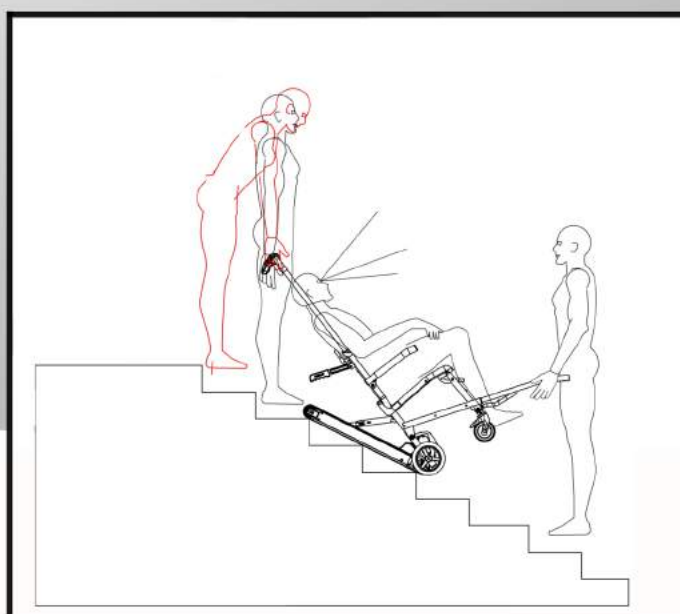



### 3. ELEVATA AUTONOMIA



Il motore risulta semplice e compatto e la batteria ha elevata capacità (Milwaukee M28 RED LITHIUM 5,0 Ampere).

### 4. GRADO DI PROTEZIONE IP

Il codice IP classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

Testata con indice di protezione IP65, la sedia motorizzata Extra Ergolift può essere impiegata anche in caso di pioggia e condizioni climatiche avverse.



Il prefisso IP, Index Protection, è seguito da due cifre:

- la prima individua la protezione contro il contatto di corpi solidi esterni
- la seconda individua la protezione contro la penetrazione di liquidi.

IP6X= Totalmente protetto contro la polvere, LA sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni

IPX5= Protetto da getti d'acqua

## I MUST CHE NON POSSONO MANCARE



**Per il trasporto della sedia in ambulanza usa il sistema di fissaggio adeguato: art. 975 sistema di fissaggio per Extra Ergolift**

**MeBer pensa sempre a VOI**

### Avete mai pensato a...?

Quante volte vi sarete trovati a dover gestire la complicata organizzazione di turni ed equipaggi per cercare la giusta combinazione degli operatori disponibili sulla base della loro prestazione fisica.

Altrettanto spesso avrete sicuramente dovuto gestire casi di infortuni di cui i soccorritori sono spesso vittime, a causa di movimenti e manovre errati durante gli interventi.

La gestione ottimale degli equipaggi è un tema di primaria importanza per garantire la massima sicurezza, non solo ai pazienti ma anche ai soccorritori.

Extra Ergolift è stata proprio pensata per evitare infortuni durante il servizio e per garantire la massima operatività anche a personale con poca forza fisica.

Con Extra Ergolift tutti sono in grado di movimentare pazienti, anche di grossa corporatura, in presenza di scale con il minimo sforzo e la massima semplicità di utilizzo.

### GLI ACCESSORI DI SERIE



Busta nera con tre cinture a 2 pz.



Caricabatterie + Batteria Milwaukee M28 RED Lithium 5.0

### ACCESSORI EXTRA



Cover traspirante antipolvere in nylon nero



# STAY TUNED! CI TROVATE ANCHE ONLINE



## News in breve

### Me.Ber.: trent'anni al servizio dell'emergenza

Me.Ber. compie 30 anni, un traguardo importante raggiunto con soddisfazione e impegno. Il nostro scopo è sempre stato quello di favorire il lavoro dei soccorritori, fornendo strumenti adeguati e di qualità.

Non a caso la copertina del nostro ultimo catalogo sfoggia il numero 30 con orgoglio. Questi anni li dedichiamo a coloro che hanno sempre creduto in noi e che ci spingono a lavorare con passione verso nuove sfide.

Buon compleanno Me.Ber.

### Iscriviti alla newsletter MeBer!

Fiere, congressi, eventi, promozioni, novità e tanto altro. Le nostre newsletter ti aggiornano su tutto quello che riguarda la nostra azienda e non solo. Iscriviti sul nostro sito web [www.meber.it](http://www.meber.it).

### 112: il nuovo numero europeo per le emergenze

L'11 febbraio 2017 si è celebrato il **112 Day**, una giornata dedicata al nuovo numero per le emergenze, che manderà in pensione il 113, 115 e 118. L'iniziativa è nata per far conoscere i servizi e le opportunità di questo numero europeo, ancora a molti sconosciuto.

In Italia la città di Varese è stata la prima a sperimentare questo servizio che, entro la fine dell'anno, dovrebbe essere esteso su tutto il territorio italiano.



### Catalogo promo usato MeBer 2017

Conosci già il nostro catalogo dei prodotti usati a prezzi convenienti? Sfoggia il catalogo e chiama il numero 0521.648770.

