

MEBER+

IN CASE OF EMERGENCY

www.meber.it

Medical Journal

Marzo 2017

34

Numero

AIR COM

NUOVO MATERASSO RIVOLUZIONARIO ADATTO A QUALSIASI TIPO DI BARELLA



In questo numero:

PAG. 2

Meber presenta:
AIR COM
Rivoluzionario
materasso
antidecubito

PAG. 3

Composizione e
caratteristiche del
materasso

PAG. 6


HI COM
Materasso ad alto
comfort in gel
fluido terapeutico

AIR COM

Rivoluzionario materasso antidecubito

- I vostri pazienti si sono lamentati della rigidità della barella?
- I dossi e le buche delle strade sono un problema?
- Avete a cuore il comfort dei vostri pazienti?

Noi cerchiamo soluzioni ai vostri problemi e vi presentiamo il materasso a segmenti alterni AIR-COM

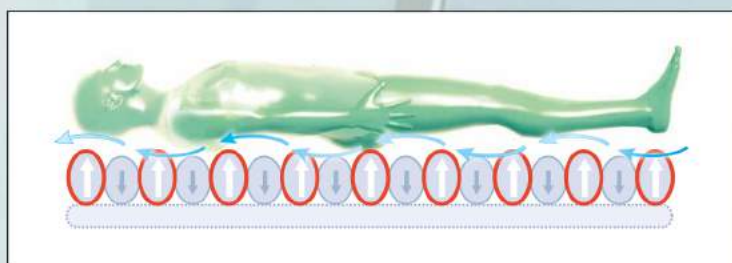

Schema di funzionamento dei segmenti alterni



ART. 12106 AIR COM+
ART. 12108 COMPRESSORE

SCOPRIAMO LA STRUTTURA DEL MATERASSO



Due tubicini collegano il materasso al compressore



18 Camere interne gonfiabili in PVC

Base in tessuto spalmato PVC antiscivolo completa di sei cinghie per ancorare il materasso alla barella

Cover in tessuto bielastico traspirante ignifugo

AIR COM è un materasso ad aria, realizzato da una base in tessuto spalmato in PVC antiscivolo e completo di 6 cinghie, che permettono di ancorare il materasso a qualsiasi tipo di barella. Le 18 camere interne gonfiabili sono in PVC atossico, mentre la cover che li contiene è in tessuto bielastico traspirante ignifugo. Tramite due tubicini, il materasso è collegato ad un compressore silenzioso e completo di regolatore di pressione.



Il sovramaterasso **AIR COM** può essere posizionato su qualsiasi tipo di barella autocaricante (vedi foto).

Lo scopo del materasso è **evitare o ridurre microtraumi** alla **cute**, che si possono verificare durante il trasporto del paziente (**AIR COM** è ideale per i **trasporti di lunghe tratte**), soprattutto nelle zone più a contatto con il materasso come spalla, bacino e talloni.

Spesso la cute del paziente allettato è già sottoposta a lesioni di questo tipo, dovute a giorni di immobilità.

AIR COM è la soluzione a questo genere di problemi: evita traumi e previene lesioni o aggravamenti alla cute del paziente.



"INDICATO PER IL POSIZIONAMENTO DI PAZIENTI CON PROBLEMI DI LESIONI DA DECUBITO"



Il **compressore**, completo di **regolatore di pressione**, viene agganciato alla testata della barella tramite due ganci a uncino.

Il dispositivo è silenzioso e si attiva collegandolo alla presa elettrica/inverter. Una manopolina regola il **flusso d'aria** secondo le esigenze.


AIR COM è anche dotato di due **stringitubi** che permettono (a materasso gonfio) una modalità **statica** e il mantenimento di un'autonomia di circa due ore, senza il collegamento al compressore.

NON TUTTI SANNO CHE...

AIR COM E' L'UNICO MATERASSO IDEALE PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI USTIONATI POST EMERGENZA

La movimentazione di pazienti ustionati o critici, durante la fase di post-emergenza, è sempre una questione molto complessa, persino con le maggiori precauzioni. AIR COM evita la formazione di lesioni alla cute, soprattutto durante le lunghe percorrenze.

Questo materasso è la soluzione ottimale perchè il flusso d'aria prodotto dai segmenti alterni conferisce un elevato comfort e una maggiore sicurezza al paziente durante il trasporto.

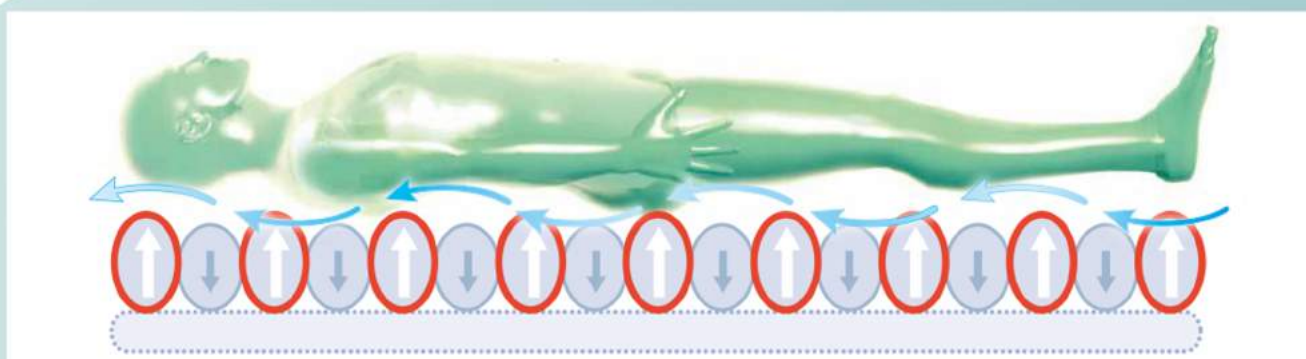

Nell'illustrazione qui in alto è stato riprodotto il flusso d'aria prodotto dal movimento ondulato dei cuscinetti. La cute del paziente è meno esposta al rischio di contrarre lesioni da decubito.

Le frecce in verticale indicano il movimento dei cuscinetti che si gonfiano e sgonfiano, mentre le frecce ondulate si riferiscono al flusso dell'aria.

**IL SOVRAMATERASSO CHE
DÀ COMFORT E SOLLIEVO
AL PAZIENTE**




Scopri tu stesso i vantaggi economici di questo nuovo prodotto!

MeBer è all'avanguardia nello studio di nuovi dispositivi medici che possano agevolare il compito dei soccorritori e, nello stesso tempo, dare benefici ai pazienti.


AIR COM è una soluzione estremamente economica che vi farà risparmiare tempo e denaro. Con un investimento conveniente ed estremamente vantaggioso, avrete a disposizione un ottimo dispositivo medico preventivo.

HI-COM

MATERASSO ALTO COMFORT

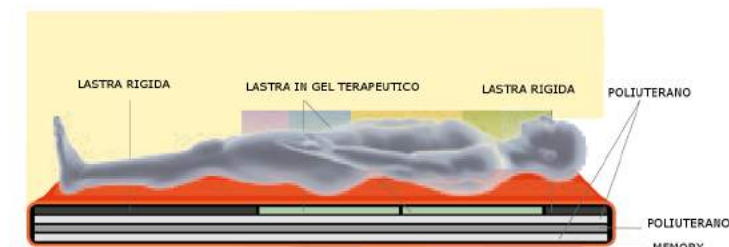

SCOPRIAMO INSIEME
UN ALTRO MATERASSO
DELLA LINEA MEBER

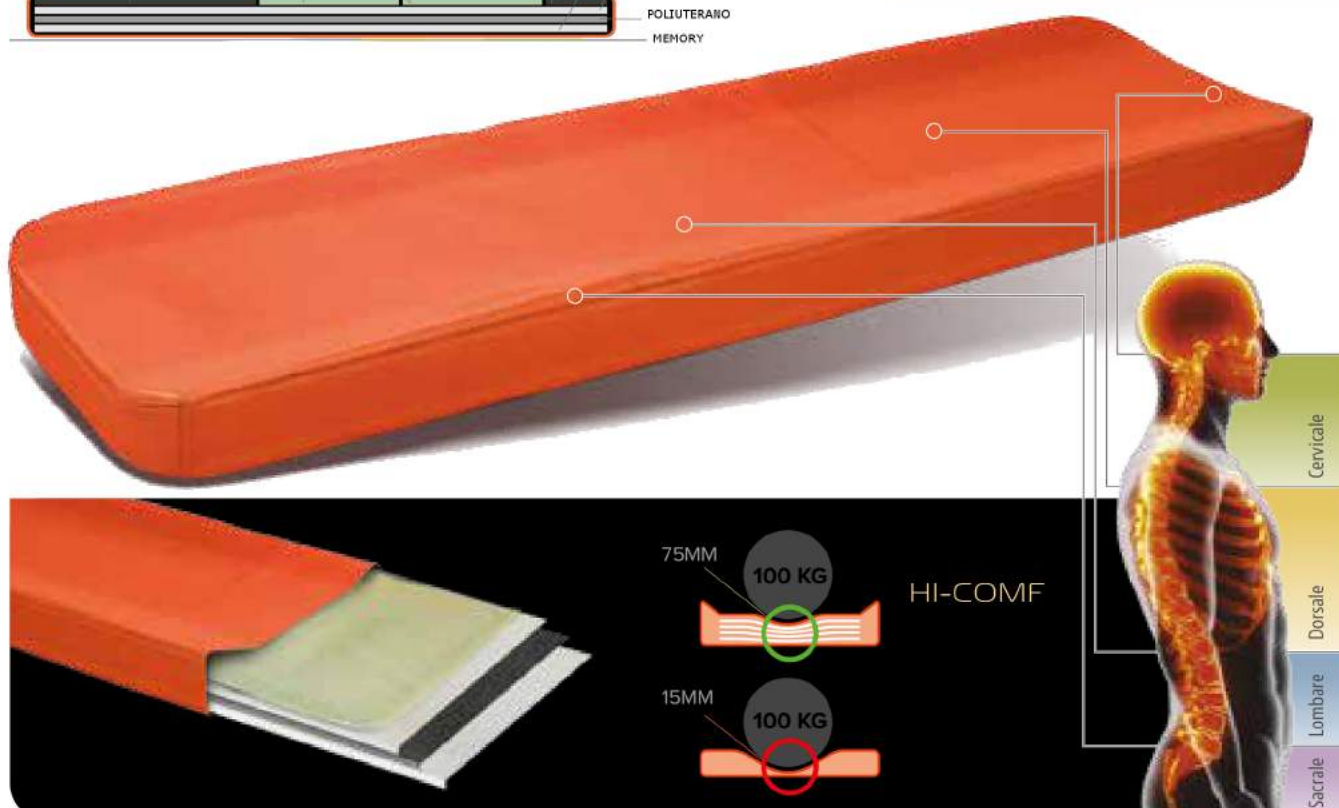

MATERASSO ARANCIO CON POLIUTERANO ESPANSO A LENTA MEMORIA E GEL FLUIDO TERAPEUTICO

Materasso in gel fluido terapeutico con tre sezioni differenti di poliuterano espanso (di cui una a lenta memoria). Dotato di alette contenitive e due zone rigide testa/piedi. La zona sacrale/dorsale è formata da due lastre in gel fluido terapeutico per creare un equilibrato comfort al paziente. Le tre zone in poliuterano espanso assorbono le vibrazioni dovute alle sollecitazioni passive di movimento del veicolo sanitario, mentre le due zone in gel assorbono il peso del paziente. Realizzato a mano in sky ignifugo, impermeabile e antistrappo. Adatto a qualsiasi tipo di barella autocaricante.



CUSCINO IN SKAY ARANCIO PER MATERASSO

Realizzato in poliuterano espanso a lenta memoria e copertura in sky ignifugo, impermeabile e antistrappo. Dotato di due elastici che ne permettono il fissaggio nella posizione più adatta per il paziente, previene l'insorgere di dolori cervicali e permette il miglioramento della circolazione nell'area interessata.

COM-FOUR

MATERASSINO DI POSIZIONAMENTO IN GEL FLUIDO TERAPEUTICO



Materassino blu in gel fluido terapeutico con 4 maniglie

Adatto a qualsiasi tipo di barella autocaricante, è realizzato con un'unica lastra in gel fluido terapeutico, da una sezione di poliuretano espanso a lenta memoria e da una spugna rigida ignifuga. Si posiziona sopra al normale materasso per garantire più comfort al paziente in fase di trasferimenti. Una sottile lastra di materiale termoplastico permette ad una o più persone di spostare il paziente dalla barella ad un'altra superficie. Dotato di fondo antiscivolo con cover impermeabile, con due cerniere rivestite da un lembo che copre la parte non impermeabilizzata, impedendo così l'infiltrazione dei liquidi all'interno del materassino. Provvisto di 4 maniglie, è l'ideale per il trasferimento e il sollevamento in sicurezza dei pazienti.

Cuscino con espanso memory per il materassino di posizionamento

Si adatta alla testa del paziente mantenendo le vertebre cervicali in asse e garantendo comfort.



Un prodotto per ogni esigenza

5 IMPORTANTI ICONE ME.BER.

- TRAUMA** ADATTO PER IL TRATTAMENTO DI EMERGENZE TRAUMATICHE
- ALPINE** UTILIZZABILE ANCHE PER IL SOCCORSO ALPINO
- CARDIO** CONSIGLIATO PER IL TRATTAMENTO DI EMERGENZE CARDIOLOGICHE
- BARIATRIC** PRODOTTO SPECIFICO PER PAZIENTI BARIATRICI
- PEDIATRIC** PRODOTTO PEDIATRICO E/O NEONATALE

Leggi con attenzione i simboli presenti sul nostro catalogo e scopri la categoria a cui appartengono



Video didattici disponibili sul nostro canale **Youtube**

Vai su:
www.youtube.com/Mebersrl nella casella di ricerca. Troverai vari filmati sui nostri prodotti e la nostra rubrica MeBer Academy con tutorial sull'uso di alcuni dei nostri dispositivi medici.



Seguici anche su **Facebook**



Siamo già in migliaia sulla nostra pagina Facebook. Se non l'hai già fatto, clicca sul pulsante "Mi piace" per far parte della nostra grande community. Troverai novità su fiere, eventi e curiosità sui nostri prodotti.

