



CATALOGO **PRODOTTI** 2027

Prodotti, tecnologie e servizi per
il primo soccorso e l'emergenza medica



Edizione italiana 21



www.meber.it

SOMMARIO

Categoria	Pagina
Barelle	12
Barelle e carrelli autocaricanti	32
Sedie Portantine	65
Accessori	80
Immobilizzazione	98
Diagnostica	122
Rianimazione	138
Ausili primo soccorso	147
Sistemi di fissaggio	166
Sistemi di trattenuta	172
Supporti barella	176
Gradini automatici	183
Veterinaria	188



Scopri i prodotti MeBer on-line
Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.

Oppure digitate:
<https://www.meber.it/it/prodotti.aspx>





ME.BER.



PRODOTTI, TECNOLOGIE
E SERVIZI PER
**IL PRIMO SOCCORSO E
L'EMERGENZA MEDICA**

AL VOSTRO FIANCO NELLA CATENA DELLA VITA

Nata nel 1987 a Parma come azienda produttrice di dispositivi per la rianimazione, MeBer è oggi una tra le aziende leader a livello internazionale nel campo della progettazione e costruzione di attrezzature per l'emergenza medica, il recupero e il primo soccorso. Fin dalle origini, MeBer si è contraddistinta per una radicata cultura aziendale all'insegna di passione, professionalità, innovazione e qualità: caratteristiche essenziali per diventare un partner indispensabile per tutti gli operatori del settore.

MEBER+
IN CASE OF EMERGENCY



LA CULTURA E LA MISSION AZIENDALE

In MeBer l'attività di studio e progettazione è vissuta da tutto lo staff come una vera e propria missione finalizzata ad affiancare e coadiuvare i professionisti del soccorso durante le operazioni di salvataggio, per aiutarli a raggiungere performance di eccellenza, nella massima sicurezza.



MEBER UN PARTNER DI RIFERIMENTO SU SCALA MONDIALE

MeBer vanta un'ampia rete di vendita a livello nazionale e una rete capillare di distributori e rivenditori in oltre 60 paesi al Mondo. MeBer è sempre presente nelle più importanti fiere specialistiche nazionali e internazionali, quali REAS (Montichiari – Italia), Medica (Dusseldorf – Germania), Arab Health (Dubai – Emirati Arabi), Rettmobil (Fulda – Germania), FIME (Miami – USA), oltre a partecipare a numerosi eventi locali e congressi.

➔ IL MIGLIOR PARTNER PER CHI OPERA NEL SETTORE DELL'EMERGENZA MEDICA



INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTENZIONE AL CLIENTE

MeBer è un'azienda giovane e dinamica, fortemente orientata alle esigenze del mercato e al miglioramento continuo della qualità della propria offerta. Grazie alla professionalità di un team qualificato e attraverso il confronto costante con gli operatori del soccorso, MeBer impegna grandi energie nell'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di dispositivi tecnologicamente avanzati e certificati secondo le più recenti normative europee (UNI EN 1865 – UNI EN 1789). Lo studio innovativo dei materiali e delle forme e l'applicazione dei più avanzati accorgimenti meccanici hanno caratterizzato negli anni la gamma di dispositivi MeBer.



LA QUALITÀ OLTRE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

MeBer ha un'intera area aziendale dedicata all'implementazione del Sistema di Gestione della Qualità dei prodotti lungo tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla progettazione al servizio post vendita, che le ha permesso di ottenere le certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. Tutte le fasi del processo produttivo, a partire dalla progettazione fino allo sviluppo e alla fabbricazione, sono svolte all'interno dell'azienda con l'ausilio degli strumenti e dei macchinari più avanzati ed ogni fase viene sottoposta a rigorosi controlli qualitativi. Il rigido percorso di qualità prosegue nella fase post vendita con i servizi di customer service e di assistenza tecnica ordinaria e straordinaria che l'azienda ha attivato per ottimizzare le performance e l'affidabilità dei propri prodotti.

IL MIGLIOR PARTNER...

PER CHI OPERA
NEL SETTORE
DELL'EMERGENZA
MEDICA



MEBER ON-SITE (Italia) Direttamente presso la vostra sede

Un nostro tecnico raggiunge la vostra sede ed effettua tutte le attività necessarie che possono comprendere:

manutenzione ordinaria

manutenzione straordinaria

riparazioni

aggiornamenti (se applicabili)



MEBER SERVICE NETWORK (Italia e resto del mondo) Tramite centri assistenza autorizzati

Il prodotto o i prodotti vengono inviati direttamente a Me.Ber. o al centro assistenza autorizzato che preferite. Vengono effettuate tutte le attività necessarie e i relativi collaudi. I dispositivi vengono poi riconsegnati nel minor tempo possibile.



➔ TECNOLOGIE
D'AVANGUARDIA PER
IL PRIMO SOCCORSO E
L'EMERGENZA MEDICA




MEBER, L'UNICO PARTNER CHE TI AIUTA A MANTENERE L'EFFICIENZA DEI TUOI DISPOSITIVI

L'assistenza effettuata in modo professionale e possibilmente operata dal produttore è una garanzia importantissima per ogni struttura, tanto che in diverse regioni italiane è addirittura obbligatoria per i vari accreditamenti. Oltre a ciò, la legge stabilisce che è fatto obbligo ad ogni struttura di garantire la perfetta efficienza dei propri dispositivi. La corretta manutenzione è un passo fondamentale per dimostrare di operare nel massimo rispetto della sicurezza di operatori e pazienti ed è una garanzia in caso di incidenti a tutela della responsabilità civile e penale di amministratori e coordinatori.

MEBER ASSISTENZA CLIENTI

Il servizio di assistenza MeBer è l'insieme dei servizi di post-vendita esclusivo di MeBer; è disponibile sia con modalità on-site, ovvero presso la sede del cliente, che presso gli stabilimenti MeBer o uno dei centri assistenza autorizzati, in base alla tipologia di intervento e all'area geografica.

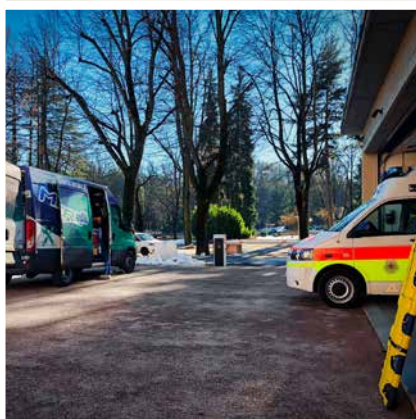

QUALITÀ

PRODOTTI CERTIFICATI 10G



MEBER: L'EMERGENZA... A PROVA DI SHOCK!

Per MeBer il tema della sicurezza e dell'affidabilità dei propri dispositivi è stato di primaria importanza fin dall'inizio della propria attività, anticipando la nascita delle normative europee di riferimento e le esigenze del mercato odierno. La filosofia di fondo che ha guidato l'azienda in questo percorso è la profonda convinzione che un dispositivo medico sicuro e in linea con gli standard di settore tutela la sicurezza del paziente e degli operatori del soccorso, minimizzando il rischio di eventi accidentali e, di conseguenza, tutelando gli operatori stessi da eventuali responsabilità morali o giuridiche.

MeBer ha iniziato ad eseguire i test 10G su alcuni prodotti a partire dal 2001 e, ad oggi, la maggior parte dei prodotti della gamma MeBer sono certificati 10G!

LE NORMATIVE EUROPEE PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA

Le Normative Europee che regolamentano il trasporto su ambulanza di barelle e dispositivi di soccorso e movimentazione pazienti sono le norme EN 1865 e EN 1789, la quale integra e completa la prima.

La Normativa Europea EN 1865, recepita in Italia come UNI EN 1865, è in vigore dal 1999 e prescrive rigidi standard tecnici, configurazioni, altezza e larghezza massima, peso massimo, portata minima ecc..., per garantire la sicurezza dei dispositivi medici durante il trasporto all'interno dei mezzi di soccorso. A completamento di queste disposizioni è stata emanata la normativa EN 1789, che prevede di sottoporre i dispositivi medici e i relativi sistemi di fissaggio a rigorosi test 10G, per attestare che i dispositivi a bordo del mezzo di soccorso siano in grado di resistere, in caso di incidente, ad un'accelerazione pari a 10 volte il peso del dispositivo più, nel caso di dispositivi di movimentazione paziente, il peso di una persona di media corporatura (circa 75 kg). Nello specifico, la normativa prevede che tale accelerazione debba essere applicata in tutte le direzioni, evitando danni al paziente e al personale a bordo dell'ambulanza.

BARELLE

La barella è spesso il primo dispositivo di recupero e trasferimento del paziente. Dalle tradizionali e collaudatissime barelle a cucchiaio della serie 630 alla rivoluzionaria ERGON, le barelle Me.Ber. sono simbolo di affidabilità a livello internazionale. Il costante interscambio di informazioni con i professionisti del soccorso è la chiave del successo

di questi prodotti che per l'ergonomia, la scelta di materiali e la semplicità d'uso sono lo standard di riferimento nel settore. Me.Ber. offre oggi una gamma ricchissima di barelle per innumerevoli contesti operativi e copre i prodotti per adulti, per bambini o per pazienti obesi.






Scopri la gamma Barelle sul sito Me.Ber. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/barelle.aspx>

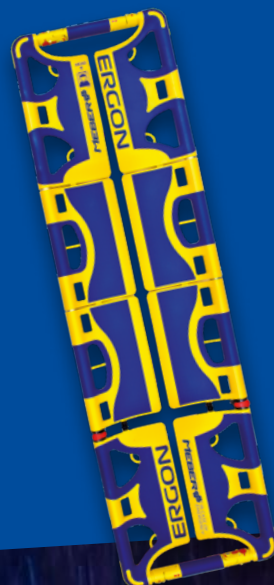

BARELLE

Codice articolo	Modello
16150/V	ERGON barella comfort a geometria variabile
16150/G	ERGON barella comfort a geometria variabile
16160/V	ERGON Junior barella comfort a geometria variabile
16160/G	ERGON Junior barella comfort a geometria variabile
630	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia
631	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio con tronco/testa ad 1 pz
631/G	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio con tronco/testa ad 1 pz gialla
631/B	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio con tronco/testa ad 1 pz blu
631/A	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio con tronco/testa ad 1 pz arancio
631/N	MAXIMA barella atraumatica a cucchiaio con tronco/testa ad 1 pz nera
633	AXIM barella a cucchiaio in alluminio con testa/tronco a un pezzo
6200	Barella atraumatica a cucchiaio pediatrica
638	Barella soccorso pieghevole con schienale regolabile
640	Barella soccorso pieghevole
643	Barella soccorso pieghevole in 4
646	Barella soccorso pieghevole
644	Barella rigida fissa per stivaggio
644/S	Barella rigida fissa per stivaggio con schienale
660	Barella pieghevole in 4 con impugnature telescopiche
1550	Barella militare pieghevole con telo verde
1510 PROOF	Barella fissa con telo
1515 PROOF	Barella fissa con pianale rigido
13010	ICARUS barella multilivello con spondine
13012	ICARUS barella multilivello con vasca in acciaio
13018	CRONOS barella multilivello con schienale e Trendelenburg
16100	Barella TOBOGA con cinture e poggiatesta
16102	Barella TOBOGA divisibile con cinture e poggiatesta

Materiali: ◆ Acciaio Inox ◆ Alluminio anodizzato ◆ Alluminio verniciato ◆ PE

TABELLA COMPARATIVA

Colore	Certificazione 10G	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza min	Lunghezza max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
	✓	HC ³	7,5 cm	43 cm	165 cm	201 cm	120 cm	9 cm	10,5 kg	170 kg
	✓	HC ³	7,5 cm	43 cm	165 cm	201 cm	120 cm	9 cm	10,5 kg	170 kg
		HC ³	7,5 cm	43 cm	129 cm	153 cm	85 cm	9 cm	8,4 kg	170 kg
		HC ³	7,5 cm	43 cm	129 cm	153 cm	85 cm	9 cm	8,4 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	10 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
	✓	◆	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
	✓	◆	6 cm	42 cm	168 cm	211 cm	120 cm	9 cm	8,3 kg	170 kg
		◆	7 cm	42 cm	130 cm	-	-	-	7,8 kg	170 kg
		◆	14 cm	49 cm	187 cm	-	98 cm	17 cm	9,2 kg	170kg
		◆	14 cm	48 cm	186 cm	-	92 cm	17 cm	6,5 kg	170 kg
		◆	12 cm	49/12 cm	195 cm	-	97 cm	17 cm	5 kg	170 kg
		◆	14 cm	50 cm	201 cm	-	101 cm	17 cm	6,2 kg	170 kg
		◆	17 cm	48 cm	186 cm	-	-	-	4,9 kg	170 kg
		◆	17 cm	48 cm	186 cm	-	-	-	5,9 kg	170 kg
		◆	18 cm	57/11 cm	192 cm	216 cm	94 cm	21 cm	9,3 kg	170 kg
		◆	17 cm	58/11 cm	198 cm	231 cm	198 cm	-	9 kg	170 kg
	✓	◆	16 cm	57 cm	196 cm	233 cm	-	-	15 kg	170 kg
	✓	◆	16 cm	57 cm	196 cm	233 cm	-	-	20,8 kg	170 kg
		◇	42/88 cm	62 cm	191 cm	-	-	-	29,5 kg	170 kg
		◇	51/96 cm	62 cm	198 cm	-	-	-	39 kg	170 kg
		◇	48/86 cm	59 cm	198 cm	-	-	-	37 kg	170 kg
		◆ ◆	18 cm	62 cm	218 cm	-	-	-	17 kg	272 kg
		◆ ◆	18 cm	64 cm	218 cm	-	123 cm	-	18 kg	270 kg

ERGON

BARELLA COMFORT A
GEOMETRIA VARIABILE



Alpine



Trauma



Art. 16150/V (verde)

Art. 16150/G (gialla)


ERGON

Barella comfort a geometria variabile

ERGON è stata studiata da soccorritori e da tecnici esperti nei dispositivi d'emergenza medica per offrire prestazioni finora impensabili. Garantisce il massimo comfort, in particolare nei punti di maggior decubito del paziente, grazie all'impiego di uno speciale materiale (l'esclusivo MeBer HC3 – High Comfort Composite Cell) composto da un materiale morbido costampato su un polimero plastico ad alta resistenza.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza min	Lunghezza max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
16150/V		HC ³	7,5 cm	43 cm	165 cm	201 cm	120 cm	9 cm	10,5 kg	170 kg
16150/G		HC ³	7,5 cm	43 cm	165 cm	201 cm	120 cm	9 cm	10,5 kg	170 kg

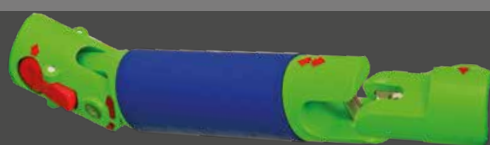


Rivoluzione tecnologica: sistema di chiusura snodato Flexilock che permette sia di separare la barella in due metà che di eseguire recuperi in posizioni e in situazioni estreme. Quindi, oltre alle tecniche standard, ERGON permette di effettuare con facilità recuperi in ambienti difficili anche con il paziente in condizioni critiche.



Sono state ricavate delle protezioni in plastica dura sugli angoli in modo da evitare il danneggiamento del materiale morbido ad alto comfort durante le operazioni di recupero e nello stoccaggio sull'ambulanza. Forniscono, inoltre, minore resistenza allo scivolamento negli alloggiamenti dei mezzi di soccorso. Tutte le indicazioni per i movimenti del gancio Flexilock sono state realizzate con un colore di contrasto, in modo da renderle evidenti anche in condizioni di scarsa visibilità e illuminazione.



Dispositivo idoneo al supporto del paziente durante l'esecuzione di esami radiologici (RX) in ambito di primo soccorso.

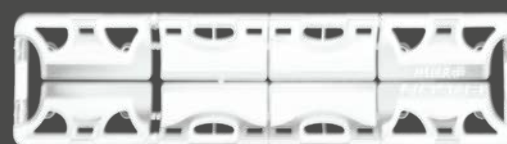

Oltre al comfort per il paziente, ERGON è progettata per favorire i soccorritori grazie ad accorgimenti unici. Le impugnature sono rivestite in HC³ e sono inclinate di 20° in modo da favorire la migliore presa. Speciali supporti e occhielli sono stati posizionati per fissare con facilità le cinghie con i moschettoni. La distanza tra le due semibarelle è di appena 25 mm; ciò consente un eccellente supporto alla colonna vertebrale rispetto alle normali barelle a cucchiaio che sono separate da

circa 80mm. La forma della lama è quindi più larga ed è stata progettata per inserirsi con facilità e gradualità tra il paziente e il suolo. L'impiego del materiale HC³, oltre a garantire una totale stabilità strutturale, permette un elevato isolamento termico. Ciò contribuisce a prevenire l'ipotermia e, grazie al design della barella stessa, consente di prolungare la permanenza del paziente sul dispositivo. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789**

→ ACCESSORI

Art. 9150

X-LOCK fermacapo ergonomico

Fermacapo costituito da un unico elemento, con cinghia di fissaggio integrata, permette in pochi secondi il fissaggio del capo direttamente alla barella. Realizzato con poliesteri accoppiati e poliuretani espansi a bi-densità.



Art. 9150-001

Custodia blu per fermacapo ergonomico X-LOCK



Art. 16150-001

Borsa verricellabile per il trasporto
cm 124x32x16



Art. Art. 16150-002

Borsa per stoccaggio
cm 122x47x8



Art. 572

Cintura blu 2 pz con gancio in metallo
(l. 155 cm)



Art. 574

Busta blu con 3 cinture art. 572

Art. 959

Sistema di fissaggio a parete



Art. 9156

X-FIX Sistema di trattenuta con cinture a moschettoni Cinghie di trattenimento standard integrate con moschettoni: sistema pensato per velocizzare e facilitare il lavoro del soccorritore, mantenendo elevato il comfort e la garanzia di stabilità della colonna.



→ DI SERIE

Art. 584

Busta nera con 3 cinture arancio a 2 pz e fibbia in plastica a sgancio rapido



ERGON JUNIOR

BARELLA COMFORT A GEOMETRIA VARIABILE
PER USO PEDIATRICO




Pediatric



Dispositivo idoneo
al supporto del
paziente durante
l'esecuzione di
esami radiologici
(RX) in ambito di
primo soccorso.

Art. 16160/G (gialla)

Art. 16160/V (verde)

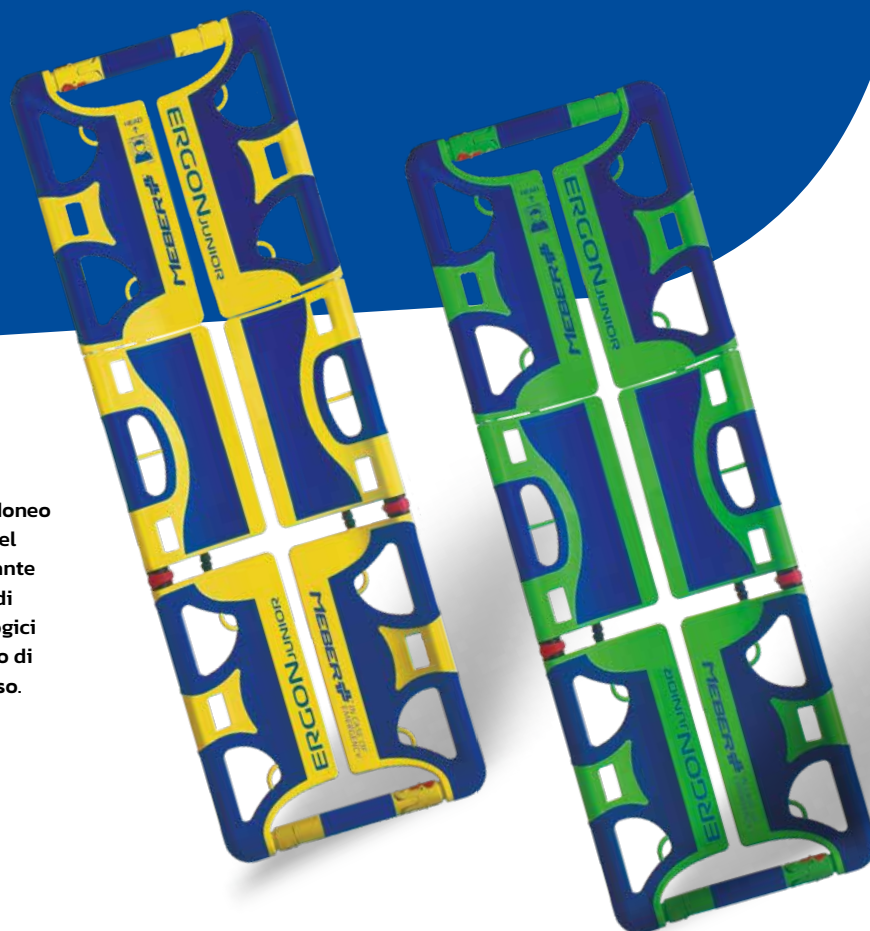

ERGON JUNIOR

Barella comfort a geometria variabile per uso pediatrico

Il prodotto più grande ERGON mette la propria tecnologia avanzata al servizio dei più piccoli. Nella versione Junior, infatti, sono stati mantenuti tutti i grandi benefici della barella per adulti. Il gancio Flexilock è decentrato per poter operare senza invadere lo spazio occupato dalla testa e la lama più larga dello standard conferisce il massimo comfort anche ai pazienti più piccoli.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza min	Lunghezza max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
16160/V		HC ³	7,5 cm	43 cm	129 cm	153 cm	85 cm	9 cm	8,4 kg	170 kg
16160/G		HC ³	7,5 cm	43 cm	129 cm	153 cm	85 cm	9 cm	8,4 kg	170 kg

MAXIMA

BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO



Alpine



Trauma



**Sezioni
tronco/testa
separate**

Art. 630



**Sezione
tronco/testa
unita**

Art. 6200

Art. 631



Art. 630

MAXIMA

Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia

Grazie alle sue caratteristiche, può essere posizionata con pochissimi movimenti sotto il paziente senza che quest'ultimo venga sollevato. Composta di materiali appositamente studiati, risponde a tutti i requisiti di solidità, affidabilità e durata. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 6200

MAXIMA

Barella a cucchiaio pediatrica

Adatta per il soccorso dei pazienti pediatrici per le sue dimensioni ridotte (zona testa e tronco a un solo pezzo).



Pediatric

Art. 631

MAXIMA

Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia con tronco/testa ad 1 pz

Barella a cucchiaio che differisce dall'art. 630 nella zona del tronco e della testa formate da un solo pezzo. Le misure restano invariate. Disponibile anche in varie colorazioni in alluminio verniciato. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 631/N



Art. 631/A



Art. 631/B



Art. 631/G



- Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- Borsa con n. 3 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (art. 603/MEB)
- Costruita interamente in alluminio robusto e leggero
- A richiesta è disponibile la custodia per barella (art. 630/CS).



Art. 633

AXIM

Barella a cucchiaio in alluminio con testa/tronco a un pezzo

La barella a cucchiaio, grazie alle proprie caratteristiche, svolge un'importante funzione di soccorso potendo essere posizionata direttamente sotto al paziente senza la necessità di sollevare quest'ultimo. La forma della barella consente, inoltre, la perfetta immobilizzazione del paziente durante il trasporto. Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella. Completa di busta con 3 cinture (Art. 603/N). Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

ACCESSORI


Art. 630/CS

Custodia per barella a cucchiaio



Art. 624

DOUBLE
Fermacapo per barella a cucchiaio

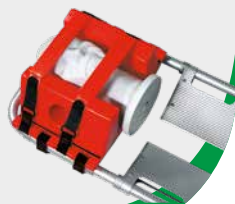

SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 614

Sistema di fissaggio orizzontale certificato per barelle a cucchiaio



Art. 616 - Art. 616/A

Sistema di fissaggio verticale certificato per barelle a cucchiaio



Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza Min	Lunghezza Max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
630		Alluminio anodizzato	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	10 kg	170 kg
631		Alluminio anodizzato	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
631/G 631/B 631/A 631/N		Alluminio verniciato	7 cm	42 cm	167 cm	202 cm	120 cm	9 cm	9,5 kg	170 kg
633		Alluminio anodizzato	6 cm	42 cm	168cm	211 cm	120 cm	9 cm	8,3 kg	170 kg
6200		Alluminio anodizzato	7 cm	42 cm	130 cm	-	-	-	7,8 kg	170 kg

BARELLE SOCCORSO



Art. 638

BARELLA SOCCORSO PIEGHEVOLE CON SCHIENALE REGOLABILE

Ottimale è il suo utilizzo come barella secondaria all'interno dell'ambulanza. Viene fornita completa di busta con due cinture (art. 604/MEB).

Art. 640

BARELLA SOCCORSO PIEGHEVOLE

Particolarmente adatta per essere utilizzata come barella secondaria all'interno dell'ambulanza, è caratterizzata dall'assenza di schienale regolabile. Viene fornita completa di busta con due cinture (art. 604/MEB).

DI SERIE

Art. 604/MEB

Busta arancio con
2 cinture 605/MEB.



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 964

Sistema di fissaggio
anteriore per
barella soccorso

Art. 950/4

Sistema di
fissaggio
posteriore



Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
638		Alluminio anodizzato	14 cm	49 cm	187 cm	98 cm	17 cm	9,2 kg	170 kg
640		Alluminio anodizzato	14 cm	48 cm	186 cm	92 cm	17 cm	6,5 kg	170 kg

BARELLE SOCCORSO



Art. 646

BARELLA SOCCORSO PIEGHEVOLE PIEGHEVOLE IN 2

Creata per essere utilizzata anche per i trasporti pesanti, è pieghevole in due parti, dotata di telo colore arancio in nylon spalmato PVC ignifugo, impermeabile, antistrappo, impugnature fisse. Non sono comprese le cinture (vedi "Sistemi di trattenuta" art. 604/MEB).

Art. 643

BARELLA SOCCORSO PIEGHEVOLE PIEGHEVOLE IN 4

Realizzata in tubolare tondo di alluminio anodizzato, dotata di telo colore arancio in nylon spalmato PVC ignifugo, impermeabile, antistrappo ed impugnature fisse, è ideale per essere stivata all'interno di ogni mezzo di soccorso. Non sono comprese le cinture (vedi "sistemi di trattenuta" art. 604/MEB).

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza max	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
643		Alluminio anodizzato	12 cm	49/12 cm	195 cm	97 cm	17 cm	5 kg	170 kg
646		Alluminio anodizzato	14 cm	50 cm	201 cm	101 cm	17 cm	6,2 kg	170 kg

BARELLE SOCCORSO



Art. 644

BARELLA RIGIDA FISSA PER STIVAGGIO

Barella rigida fissa per stivaggio, può essere facilmente sovrapposta ad altre dello stesso tipo per immagazzinare un elevato numero di barelle in uno spazio ridotto. Completa di busta con n. 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (art. 604/MEB).

Art. 644/S

BARELLA RIGIDA FISSA PER STIVAGGIO, CON SCHIENALE

Barella rigida fissa per stivaggio con schienale regolabile in 3 posizioni. Completa di busta con n. 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (art. 604/MEB).

- Leggera e maneggevole
- Telo colore arancio in nylon spalmato PVC ignifugo, impermeabile, antistrappo facile da pulire
- Telaio in robusto alluminio
- Non pieghevole

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
644		Alluminio anodizzato	17 cm	48 cm	186 cm	4,9 kg	170 kg
644/S		Alluminio anodizzato	17 cm	48 cm	186 cm	5,9 kg	170 kg



**Barella piegata
in 4 parti**

Art. 660

BARELLA PIEGHEVOLE PIEGHEVOLE IN 4 CON IMPUGNATURE TELESCOPICHE

La barella pieghevole in quattro ha caratteristiche tali da poterla definire una delle più complete e versatili della gamma. La struttura, in tubolare tondo di alluminio, rende questa barella robusta e leggera. È dotata di quattro impugnature estraibili. Telo grigio in nylon spalmato PVC ignifugo, impermeabile, antistrappo, facile da pulire. Completa di 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente (art. 605/Nmeb).



ACCESSORI

Art. 660/CS

Custodia per barella pieghevole in 4 con impugnature telescopiche



DI SERIE

Art. 605/Nmeb

2 cinture nere a 1 pz con gancio in plastica e nastro MeBer



Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza minima	Lunghezza massima	Lunghezza ripiegata	Spessore ripiegata	Peso	Portata
660		Alluminio anodizzato	18 cm	57/11 cm	192 cm	216 cm	94 cm	21 cm	9,3 kg	170 kg

BARELLE SOCCORSO



**Barella
chiusa**

Art. 1550

BARELLA MILITARE PIEGHEVOLE CON TELO VERDE

Barella pieghevole in larghezza realizzata in tubolare tondo di alluminio e telo verde militare ignifugo. È dotata di impugnature estraibili e cinture a fascia per l'immobilizzazione del paziente. È ideale per impieghi militari.

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza minima	Lunghezza massima	Lunghezza ripiegata	Peso	Portata
1550		Alluminio anodizzato	17 cm	58/11 cm	198 cm	231 cm	198 cm	9 kg	170 kg
1510 PROOF		Alluminio anodizzato	16 cm	57 cm	196 cm	233 cm	-	15 kg	170 kg
1515 PROOF		Alluminio anodizzato	16 cm	57 cm	196 cm	233 cm	-	20,8 kg	170 kg

BARELLE FISSE

BARELLE FISSE PER CARRELLI AUTOCARICANTI



Art. 7060/4RG + 1510 PROOF

Completa delle seguenti cinture quando abbinata a carrello:
n° 2 pz. art. 608-A/MEB o 608-N/MEB, n° 1 pz. art. 612/AN-2/MEB o 612/N-2/MEB



Art. 7060/4RG + 1515 PROOF



Art. 1510 PROOF

BARELLA FISSA CON TELO

Barella fissa costruita in alluminio anodizzato con telo in nylon ignifugo resistente e facile da pulire. Può essere utilizzata sui ns. carrelli autocaricanti (TITANUS) oppure come barella a mano. Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

- 4 maniglie estraibili e regolabili
- 4 ruote diam. 100 mm
- Schienale regolabile
- Completa di cinture (art. 604/MEB), quando venduta singolarmente
- Spondine ribaltabili

Art. 1515 PROOF

BARELLA FISSA CON PIANALE RIGIDO

Barella fissa costruita in alluminio anodizzato con pianale e schienale rigido in alluminio verniciato, resistente e facile da pulire. Possibilità di assumere le posizioni Trendelenburg e Fowler. Può essere utilizzata sui ns. carrelli autocaricanti (TITANUS) oppure come barella a mano. Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

- 4 maniglie estraibili e regolabili
- 4 ruote diam. 100 mm
- Schienale regolabile
- Completa di: n° 1 pz. art. 7014, n° 2 pz. art. 608-A/MEB o 608-N/MEB, n° 3 pz. art. 605C, n° 1 pz. art. 612/AN-2/MEB o 612/N-2/MEB
- Spondine ribaltabili

ICARUS

BARELLA MULTILIVELLO
CON SPONDINE



Icarus +
materasso
(1880-001) e
cuscino (1880-
002) in skay



Icarus
inclinata

Art. 13012

ICARUS
Barella multilivello
con vasca in acciaio



ACCESSORI

Art. 607/A-MEB



Cinture arancio a
2 pz con gancio in
plastica

Art. 607/B



Cinture blu a 2
pz con gancio in
plastica

Art. 1880-001



Materasso in
skay per Icarus

Art. 1880-002



Cuscino in skay
per Icarus

Art. F1813



Coperchio
per Icarus

Art. 13010

ICARUS

Barella multilivello con spondine

Costruita in acciaio inox, la barella multilivello ICARUS è dotata di quattro ruote diam. 125 mm (2 con freno), spondine laterali e poggiapiedi. Le quattro molle a gas permettono un perfetto adattamento a qualsiasi altezza necessaria per un lavoro pratico e professionale. Disponibile nelle versioni con pianale in ABS per una totale pulizia e disinfezione (art. 13010) e vasca in acciaio (art. 13012). Materasso e cuscino in materiale ignifugo ed impermeabile facilmente lavabile.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
13010		Acciaio Inox	42/88 cm	62 cm	191 cm	29,5 kg	170 kg
13012		Acciaio Inox	51/96 cm	62 cm	198 cm	39 kg	170 kg

CRONOS

BARELLA MULTILIVELLO CON SCHIENALE E TRENDELENBURG



**Cronos
abbassata**



Cronos fianco



ACCESSORI

Art. 602/MEB

Busta arancio a 3 cinture
con gancio in plastica



Art. 7013/N

Materasso 3 pz in Sky
ignifugo elettrosaldato



Art. 13018

CRONOS

Barella multilivello con schienale e Trendelenburg

La barella da corsia CRONOS è realizzata in acciaio inox elettrolucidato, con pianali e spondine reclinabili. Lo schienale e la posizione Trendelenburg sono regolabili con molle a gas che ne consentono infinite posizioni. Le quattro molle a gas poste al di sotto del piano letto ne permettono un perfetto adattamento a qualsiasi altezza. Infine quattro ruote diam. 200 mm, due fisse e due girevoli con freno, rendono questa barella agevole e versatile.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
13018		Acciaio Inox	48/86 cm	59 cm	198 cm	37 kg	170 kg

TOBOGA

BARELLE TOBOGA CON
CINTURE E POGGIAPIEDI



Alpine



Trauma



ACCESSORI

Art. 16100-005

Imbragatura di
sollevamento certificata
per barelle Toboga



Art. 16100-002

Coppia di galleggianti
per barella Toboga



Art. 16100

TOBOGA

Barella con cinture e poggiapiedi

Composta da un guscio esterno di ABS polimerico modificato, supportato da una robusta struttura in alluminio. 12 maniglie la rendono estremamente maneggevole. Materiale resistente a prodotti chimici, UV, ruggine e corrosione. Robusti passanti di acciaio inox posizionati nei bordi della barella ne permettono il sollevamento con l'accessorio art. 16100-005. Uno strato di schiuma EVA è presente all'interno della barella per un maggior comfort del paziente. Supporto ferma piedi regolabile e quattro cinture di fissaggio completano la fornitura standard.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza piegata	Peso	Portata
16100	■	Alluminio e PE	18 cm	62 cm	218 cm	-	17 kg	272 kg

BARELLE TOBOGA DIVISIBILE CON CINTURE E POGGIAPIEDI



Alpine



Trauma



ACCESSORI

Art. 16100-005

Imbragatura di sollevamento certificata per barelle Toboga



Art. 16102-001

Custodia per barella Toboga divisibile.



Art. 16102

TOBOGA

Barella divisibile con cinture e poggiapiedi

Stesse caratteristiche della Toboga art. 16100. Questo modello è composto da due parti separabili che conferiscono la possibilità di essere stivato e trasportato con notevole facilità. Le due metà sono tenute insieme per mezzo di robusti tondini in acciaio.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza piegata	Peso	Portata
16102	■	Alluminio e PE	18 cm	64 cm	218 cm	123 cm	18 kg	270 kg

BARELLE & CARRELLI AUTOCARICANTI

Barelle e carrelli autocaricanti sono il simbolo stesso del soccorso e del recupero dei pazienti. Sono i dispositivi che a bordo delle ambulanze svolgono il ruolo più delicato, che è quello di assicurare il trasporto del paziente nel modo più sicuro al fine di evitare, per quanto possibile, l'aggravarsi dello stato di criticità. Questi dispositivi fanno anche ben altro: sono chiamati a garantire anche la sicurezza dei

soccorritori. Sono adottati numerosi accorgimenti che vanno dallo studio ergonomico, alla riduzione del peso che hanno lo scopo di ridurre il rischio di infortuni alla schiena o di altro tipo. Tutti i modelli "10G PROOF" inoltre, sono certificati per resistere ad impatti da 10G di decelerazione, al fine di evitare il distacco o la deformazione del dispositivo in caso di incidente.



Scopri la gamma Barelle e carrelli autocaricanti sul sito Me.Ber. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/barelle-e-carrelli-autocaricanti.aspx>



BARELLE & CARRELLI AUTOCARICANTI

	Codice articolo	Nome	Modello	Colore	Certificazione 10G	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Fowler	Altezza intermedia
Carrelli autocaricanti	7060/4RG PROOF	TITANUS 4	4 ruote girevoli bassa	■	✓	◆	✓			61 cm
	7062/4RG PROOF		4 ruote girevoli alta	■	✓	◆	✓			61 cm
	7240/INC PROOF	FROG INC	Certificata Plus per incubatrici	■	✓	◆				
	7260/INC PROOF		Certificata Lite per incubatrici	□	✓	◆				
	910/GIN	WINNER GIN	per incubatrici	■		◆				
	910/GIN PROOF		Certificata per incubatrici	■	✓	◆				
Barelle autocaricanti	7034		Carrello fisso porta-incubatrice	■		◆				
	7112 PROOF	EVOX	Barella sedia autocaricante	■	✓	◆				
	7080/4RG PROOF	MERCURY LITE 4	4 ruote girevoli bassa	□	✓	◆	✓	✓		72 cm
	7082/4RG PROOF		4 ruote girevoli alta	□	✓	◆	✓	✓		75 cm
	7070/4RG PROOF	MERCURY 4	4 ruote girevoli bassa	■	✓	◆	✓	✓		72 cm
	7072/4RG PROOF		4 ruote girevoli alta	■	✓	◆	✓	✓		75 cm
	7075/4RG PROOF	MERCURY 5	4 ruote girevoli bassa	■	✓	◆	✓	✓		95 - 87 - 79 - 68 - 37 cm
	7077/4RG PROOF		4 ruote girevoli alta	■	✓	◆	✓	✓		101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm
	7095/4RG PROOF	MERCURY 5 LITE	4 ruote girevoli bassa	□	✓	◆	✓	✓		95 - 87 - 79 - 68 - 37 cm
	7097/4RG PROOF		4 ruote girevoli alta	□	✓	◆	✓	✓		101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm
	7092 PROOF	MERCURY EL	Versione bassa	■	✓	◆		✓		
	7094 PROOF		Versione alta	■	✓	◆		✓		
	7300	MEBER-X		□		◆	✓	✓	✓	
	7210	FROG	Con Trendelenburg	■		◆		✓		
	7210 PROOF		Certificata con Trendelenburg	■	✓	◆		✓		
	7240 PROOF	FROG PLUS	Certificata Plus con Trendelenburg	■	✓	◆		✓		
	7260 PROOF	FROG LITE	Certificata con Trendelenburg	□	✓	◆		✓		
	910	WINNER	Barella autocaricante	■		◆				
	910 PROOF		Barella autocaricante certificata	■	✓	◆				
	914		Con Trendelenburg e Fowler	■		◆		✓	✓	
	914 PROOF		Certificata con Trendelenburg e Fowler	■	✓	◆		✓	✓	
	7122/AZ	GECKO	Barella entry-level azzurra	■		◆				
	7270 PROOF	MBS-01	Barella autocaricante per trasporto bariatrico "MBS-01 MeBer Bariatric Stretcher"	■	✓	◆				

Materiali: ◆ Acciaio Inox ◇ Acciaio verniciato ◆ Alluminio anodizzato ◆ Alluminio verniciato

TABELLA COMPARATIVA

Altezza max	Altezza max di carico	Altezza minima di carico	Altezza piegata	Larghezza	Larghezza asse posteriore	Lunghezza	Lunghezza minima	Lunghezza piegata	Lung. min posizione sedia	Peso	Portata
84 cm	64 cm	60 cm	25 cm	44 cm	56 cm	197 cm				35,9 kg	220 kg
89 cm	72 cm	68 cm	25 cm	44 cm	56 cm	197 cm		200 cm		36 kg	220 kg
82 cm	66 cm	60 cm	27 cm	56 cm		195 cm	166 cm			38,4 kg	250 kg
83 cm	66 cm	60 cm	26 cm	56 cm		196 cm	166 cm			28,5 kg	250 kg
80 cm	65 cm	45 cm	22 cm	56 cm		194 cm	162 cm			28 kg	170 kg
80 cm	65 cm	62 cm	22 cm	56 cm		194 cm	155 cm			31 kg	170 kg
74 cm				57 cm		90 cm				30,5 kg	
80 cm	67 cm		27 cm	58 cm		193 cm		198 cm	123 cm	44,5 kg	220 kg
95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			40 kg	250 kg
99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			40,5 kg	250 kg
95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			50,6 kg	250 kg
99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			50,7 kg	250 kg
95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			50 kg	250 kg
101 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm		197 cm	167 cm			49,8 kg	250 kg
95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm		197 cm	165 cm			41 kg	250 kg
101 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm		197 cm	167 cm			40 kg	250 kg
95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm		197 cm				46,5 kg	250 kg
99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm		197 cm				46,6 kg	250 kg
123 cm	85,5 cm	0 cm		60 cm		197 cm	166 cm			45,9 kg	320 kg
92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm		195 cm	169 cm			45,2 kg	250 kg
92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm		195 cm	166 cm			47,5 kg	250 kg
92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm		195 cm	166 cm			47,5 kg	250 kg
91,5 cm	66 cm	60 cm	31 cm	56 cm		196 cm	167 cm			36,9 kg	250 kg
87,5 cm	65 cm	45 cm	26 cm	56 cm		194 cm	162 cm			34 kg	170 kg
87,5 cm	65 cm	62 cm	26 cm	56 cm		194 cm	155 cm			37 kg	170 kg
87,5 cm	65 cm	45 cm	26 cm	56 cm		194 cm	162 cm			37 kg	170 kg
87,5 cm	65 cm	62 cm	26 cm	56 cm		194 cm	155 cm			40 kg	170 kg
90,5 cm	62 cm		30 cm	56 cm		197 cm				40,2 kg	170 kg
92 cm	64,5 cm		25 cm	56 cm		197 cm				49,5 kg	350 kg

MERCURY LITE 4



Bariatric



Pediatric



Trauma

BARELLA AUTOCARICANTE IN ALLUMINIO AD
ALTEZZA VARIABILE CON 4 RUOTE GIREVOLI



Art. 7080/4RG PROOF

MERCURY LITE 4

**Barella autocaricante in alluminio
con 4 ruote girevoli**

"Mercury Lite" è dotata di 4 ruote girevoli che conferiscono alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 art. 955 PROOF (vedi "Sistemi di fissaggio"). Viene fornita completa di materasso, cinture e tasca porta oggetti. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 7082/4RG PROOF

MERCURY LITE 4

**Barella autocaricante in
alluminio con 4 ruote girevoli
versione alta**

Garantendo tutte le caratteristiche del modello 7080/4RG PROOF, permette il caricamento su ambulanze con altezza di carico maggiorata. Dotazioni di serie come 7080/4RG. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Leva di sblocco ruote girevoli anteriori

Ruote girevoli anteriori



Posizione intermedia



**Accessori barella autocaricante
MERCURY LITE4**

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Altezza intermedia	Altezza max	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza minima	Peso	Portata
7080/4RG PROOF	☐	Alluminio verniciato	✓	✓	72 cm	95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	40 kg	250 kg
7082/4RG PROOF	☐	Alluminio verniciato	✓	✓	75 cm	99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	40,5 kg	250 kg

MERCURY 4

BARELLA AUTOCARICANTE INOX AD ALTEZZA VARIABILE CERTIFICATA CON 4 RUOTE GIREVOLI



Bariatric



Pediatric



Trauma



Art. 7070/4RG PROOF

MERCURY 4

Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli

La barella Mercury è dotata di 4 ruote girevoli che le conferiscono una manovrabilità imbattibile. Questo dispositivo è l'ideale per l'utilizzo della barella in ambienti stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale con le ruote fisse nel senso di marcia. Completa di materasso, cinture e di tasca portaoggetti multiuso.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

Art. 7072/4RG PROOF

MERCURY 4

Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta

Stesse caratteristiche della versione 7070/4RG PROOF con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata. Completa di materasso, cinture e di tasca portaoggetti multiuso.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.



**Posizione
intermedia**

Leva di
sblocco
ruote
girevoli
anteriori

Ruote
girevoli
anteriori



**Posizione
caricata**



**Accessori barella autocaricante
MERCURY 4**

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Altezza intermedia	Altezza max	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza minima	Peso	Portata
7070/4RG PROOF	■	Acciaio inox	✓	✓	72 cm	95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	50,6 kg	250 kg
7072/4RG PROOF	■	Acciaio inox	✓	✓	75 cm	99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	50,7 kg	250 kg

MERCURY CINQUE



Bariatric



Pediatric



Trauma

BARELLA AUTOCARICANTE INOX A 5 ALTEZZE
CERTIFICATA CON 4 RUOTE GIREVOLI



Art. 7075/4RG PROOF

MERCURY CINQUE

Barella autocaricante inox a 5 altezze certificata con 4 ruote girevoli

Mercury Cinque è derivata da uno dei progetti di maggiore successo nell'ambito del soccorso, sicuramente il prodotto Me.Ber. più apprezzato, la Mercury 4RG. Mercury Cinque ha lo scopo di estendere ulteriormente le capacità operative del modello originale grazie all'introduzione della logica a 5 livelli, cinque altezze, come vengono comunemente chiamati. Mercury Cinque però è molto più di un'evoluzione! È l'unica barella a cinque altezze con carrello anteriore abbattibile e anche l'unica che vi garantisce la portata massima di 250 kg su tutti e cinque i livelli. Completa di materasso, cinture e di tasca portaoggetti multiuso. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 7077/4RG PROOF

MERCURY CINQUE

Barella autocaricante inox a 5 altezze certificata con 4 ruote girevoli versione alta

Stesse caratteristiche della versione 7075/4RG PROOF con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata. Completa di materasso, cinture e di tasca portaoggetti multiuso.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

1

Livello di carico



2

Posizione alta



3

Posizione intermedia



4

Posizione bassa



5

Posizione base



Leva sblocco
carrello anteriore

Leva
regolazioni
altezze

Leva di sblocco
ruote girevoli
anteriori

Ruote
girevoli
anteriori



Accessori barella autocaricante MERCURY CINQUE

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
7075/4RG PROOF		Acciaio inox	✓	✓	95 - 87 - 79 - 68 - 37 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	50 kg	250 kg
7077/4RG PROOF		Acciaio inox	✓	✓	101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm	197 cm	167 cm	49,8 kg	250 kg

MERCURY CINQUELITE



Bariatric



Pediatric



Trauma

BARELLA AUTOCARICANTE IN ALLUMINIO A 5
ALTEZZE CERTIFICATA CON 4 RUOTE GIREVOLI



Art. 7095/4RG PROOF

MERCURY CINQUE LITE

**Barella autocaricante in alluminio a 5 altezze
certificata con 4 ruote girevoli**

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dai modelli Mercury Cinque art. 7075/4rg PROOF e art. 7077/4rg PROOF, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. È dotata di sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ogni asse. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 PROOF. Completa di materasso, cinture e di tasca porta oggetti multiuso. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 7097/4RG PROOF

MERCURY CINQUE LITE

**Barella autocaricante in
alluminio a 5 altezze certificata
con 4 ruote girevoli versione alta**

Stesse caratteristiche della versione 7095/4RG PROOF con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata. Completa di materasso, cinture e di tasca porta oggetti multiuso. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

1

Livello di carico



2

Posizione alta



3

Posizione intermedia



4

Posizione bassa



5

Posizione base



Ruote
girevoli
anteriori



Leva
regolazioni
altezze

Leva di sblocco
ruote girevoli
anteriori



Accessori barella autocaricante MERCURY CINQUE LITE

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
7095/4RG PROOF	☐	Alluminio verniciato	✓	✓	95 - 87 - 79 - 68 - 37 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm	197 cm	165 cm	41 kg	250 kg
7097/4RG PROOF	☐	Alluminio verniciato	✓	✓	101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm	197 cm	167 cm	40 kg	250 kg

MERCURY EL

BARELLA AUTOCARICANTE
CERTIFICATA



Bariatric



Pediatric



Trauma



Art. 7092 PROOF

MERCURY EL

Barella autocaricante certificata

Mercury EL è l'ultima nata nella gamma di barelle autocaricanti MeBer. Come tutti i modelli Mercury è caratterizzata da un'elevatissima affidabilità e versatilità. Mercury EL è pensata come modello di ingresso della gamma Mercury. Mercury EL è tuttavia una scelta eccellente per chi vuole avere le stesse caratteristiche qualitative, ma in un prodotto più semplice e accessibile. Completa di materasso e cinture. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 7094 PROOF

MERCURY EL

**Barella autocaricante
certificata versione alta**

Stesse caratteristiche della versione 7092 PROOF con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata. Completa di materasso e cinture. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



**Schienale con pistone
pneumatico regolabile
in infinite posizioni**



**Accessori barella autocaricante
MERCURY EL**

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Trendelenburg	Altezza max	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
7092 PROOF	■	Acciaio verniciato	✓	95 cm	66 cm	64 cm	31 cm	57 cm	197 cm	46,5 kg	250 kg
7094 PROOF	■	Acciaio verniciato	✓	99 cm	71 cm	69 cm	31 cm	57 cm	197 cm	46,6 kg	250 kg

MEBER-X



Bariatric



Pediatric



Trauma

BARELLA MULTILIVELLO COMPLETA
DI MATERASSO E CINTUREArt. 7300
completa di
accessori

Art. 7300

MEBER-X

Barella multilivello completa di materasso e cinture

La barella multilivello MEBER-X, con telaio a "X", è stata studiata per rendere semplici ed ergonomiche le operazioni di caricamento, scaricamento, sollevamento e abbassamento del paziente. Caratteristica principale è, infatti, la regolazione a 9 altezze che facilita il trasbordo e la manovrabilità in qualsiasi condizione. Costruita in lega di alluminio, la barella ha una capacità di carico fino a 320 kg, che garantisce massima sicurezza anche per il trasporto di pazienti bariatrici. Completano le caratteristiche del prodotto: 4 ruote girevoli con diametro di 200 mm di cui 2 con freno; piano letto in alluminio lavabile e sanificabile; regolazione schienale da 0° a 80°, bloccabile in qualsiasi posizione; configurazione Trendelenburg e Fowler; carrello di carico retrattile. **Fornita di serie con: materasso art.7002, cinture art.608-A/MEB o art.608-N/MEB (2 pz) e cintura art.612/AN-2/MEB o art.612/N-2/MEB (1 pz).**

MTX-2-X
Supporto doppiovano
traslabile per barella Meber X
(vedi sezione Supporti
Barella pag.176)



DI SERIE

Art. 7002

Materasso
4 pz.
elettrosaldato
diviso di
colore nero



Art. 612/N-2/MEB

Cintura toracica
regolabile nera con
aggancio a 4 punti



Art. 608-N/MEB

2 cinture nere 2 pezzi con
gancio in metallo



ACCESSORI

Art. 980

Kit gancio composto
da fissaggio anteriore,
fissaggio laterale e gancio
di sicurezza posteriore.



Art. 12019N

"P-120X" asta portaflebo
telescopica pieghevole in
alluminio per barella X-Frame
completa di piastrina.



Art. 12120

Porta oggetti di colore
nero per carrello inferiore
barella MEBER-X.
Dimensioni: 92x43 cm



Art. 12122

Porta oggetti di colore
nero per carrello di carico
barella MEBER-X.
Dimensioni: 39x52 cm



Art. 12100/N

Cuscino poggiatesta
di colore nero.



Art. 12128

Sistema allungabile
per poggiatesta
barella MEBER-X.



Art. 935

Piano portastrumenti per
barelle X-Frame e MeBer Max



Accessori barella autocaricante MEBER-X

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Trendelenburg	Fowler	Multilivello	Altezza minima	Altezza max	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza minima	Peso	Portata
7300		Alluminio verniciato	✓	✓	✓	✓	40,5 cm	123 cm	85,5 cm	0 cm	60 cm	197 cm	166 cm	45,9 kg	320 kg
Art.			Altezza intermedia 1	Altezza intermedia 2	Altezza intermedia 3	Altezza intermedia 4	Altezza intermedia 5	Altezza intermedia 6	Altezza intermedia 7	Altezza intermedia 8	Altezza intermedia 9				
	Schienale		123 cm	114,5 cm	106 cm	96,5 cm	87 cm	77,5 cm	67 cm	55,5 cm	40,5 cm				
7300	Zona piedi		91 cm	90,5 cm	88 cm	85 cm	81 cm	76 cm	69 cm	59 cm	43 cm				
	Carico		84 cm	76 cm	67 cm	58 cm	48 cm	38,5 cm	29 cm	17 cm	0 cm				

FROGLITE PROOF

BARELLA AUTOCARICANTE IN
ALLUMINIO CON TRENDELENBURG



Bariatric



Pediatric



Trauma



Art. 7260 PROOF

FROG LITE PROOF

Barella autocaricante in alluminio con Trendelenburg certificata

Realizzata completamente in una struttura rigida in alluminio verniciato, leggerissima, è dotata di Trendelenburg. 4 ruote Ø 200 mm in poliuretano (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti) offrono un elevato comfort su pavimentazioni sconnesse e superfici irregolari. Il materiale di fabbricazione la rende facilmente sanificabile. Unità all'apposito sistema di fissaggio certificato 955 PROOF, assorbe le sollecitazioni inerziali provocate da improvvise accelerazioni o decelerazioni del mezzo di soccorso. Viene fornita completa di materasso e cinture (art. 7013, n. 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o art. 612/N-2/MEB). **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Regolazione
carrello di
carico

Caratteristiche uniche

- ✓ Pianale rigido in lega di alluminio verniciato
- ✓ Schienale reclinabile 0°-80° bloccabile in qualsiasi posizione
- ✓ Spondine laterali ribaltabili
- ✓ Gambe verticali protette da paracolpi
- ✓ Ruote girevoli dotate di sistema autocentrante
- ✓ Carrello anteriore abbassabile



Posizione caricata



Posizione Trendelenburg



DI SERIE

Art. 7013/N

Materasso
3 pz in Skay
ignifugo
elettrosaldato



Art. 612/N-2/MEB



Cintura toracica regolabile arancione e nera
o nera con nastro Me.Ber. con aggancio a 4
punti per barelle autocaricanti e sedie.

Art. 612/AN-2/MEB



Art. 608-A/MEB - 608-N/MEB



Cintura arancio o nera 2 pezzi
con gancio in metallo e nastro
con logo Me.Ber. (L. 155 cm)



Accessori barella autocaricante FROG LITE PROOF

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza minima	Peso	Portata
7260 PROOF	□	Alluminio verniciato	91,5 cm	66 cm	60 cm	31 cm	56 cm	196 cm	167 cm	36,9 kg	250 kg

FROG TRENDLENBURG

BARELLA AUTOCARICANTE GIALLA
CON TRENDLENBURG



Bariatric



Pediatric



Trauma



Art. 7210

FROG

**Barella autocaricante gialla
con Trendelenburg**

Realizzata in acciaio saldato verniciato a polvere, è un dispositivo notevolmente resistente ed affidabile. La morbidezza delle 4 ruote Ø 200 mm (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti) conferisce un alto grado di comfort al paziente. Questo modello di barella è dotato della posizione Trendelenburg regolabile da 0° a 15°.



Accessori barella
autocaricante
FROG

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Trendelenburg	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
7210		Acciaio verniciato	✓	92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm	195 cm	169 cm	45,2 kg	250 kg
7210 PROOF		Acciaio verniciato	✓	92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm	195 cm	166 cm	47,5 kg	250 kg

Caratteristiche uniche

- ✓ Piano letto in materiale termoplastico rinforzato.
- ✓ Schienale reclinabile 0°-80° azionato da un pistone a gas bloccabile in qualsiasi posizione.
- ✓ Spondine laterali ribaltabili.
- ✓ Gambe verticali protette da paracolpi in plastica.
- ✓ Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente.
- ✓ Carrello anteriore abbassabile per ridurre l'ingombro della barella.
- ✓ Trendelenburg.



Art. 7210 PROOF

FROG PROOF

Barella autocaricante gialla con Trendelenburg certificata

Dotata di tutte le caratteristiche dell'art. 7210, viene fornita completa di materasso e cinture (art. 7013, n. 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o art. 612/N-2/MEB). In abbinamento all'apposito fissaggio 955 PROOF, resiste a sollecitazioni fino a 10G. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Accessori barella autocaricante FROG

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80



DI SERIE

Art. 7013/N

Materasso
3 pz in Skay
ignifugo
elettrosaldato



Art. 612/N-2/MEB

Art. 612/AN-2/MEB



Cintura toracica regolabile arancione e nera o nera con nastro Me.Ber. con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie.



Art. 608-A/MEB - 608-N/MEB



Cintura arancio o nera 2 pezzi con gancio in metallo e nastro con logo Me.Ber. (L. 155 cm)

FROG PLUS TRENDELENBURG

BARELLA AUTOCARICANTE IN
ACCIAIO INOX CON TRENDELENBURG



Bariatric



Pediatric



Trauma



Art. 7240 PROOF

FROG PLUS PROOF

Barella autocaricante con Trendelenburg certificata

Realizzata in acciaio INOX elettrolucidato è dotata di 4 ruote Ø 200 mm (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti). L'inclinazione delle gambe è stata studiata per dare alla barella una migliore stabilità durante l'utilizzo. La posizione di Trendelenburg è azionata da un pistone a gas bloccabile in qualsiasi posizione da 0° a 15°. La rigidità della struttura garantisce la resistenza alle sollecitazioni inerziali del mezzo di soccorso su cui viene trasportata. Completa con materasso e cinture (art. 7013, n. 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o art. 612/N-2/MEB). **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



**Posizione
caricata**



Caratteristiche uniche

- ✓ Piano letto in materiale termoplastico rinforzato.
- ✓ Schienale reclinabile 0°-80° azionato da un pistone a gas bloccabile in qualsiasi posizione.
- ✓ Spondine laterali ribaltabili.
- ✓ Gambe verticali protette da paracolpi in plastica.
- ✓ Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente.
- ✓ Carrello anteriore abbassabile per ridurre l'ingombro della barella.



DI SERIE

Art. 7013/N

Materasso
3 pz in Skay
ignifugo
elettrosaldato



Art. 612/N-2/MEB



Cintura toracica regolabile arancione e nera o nera con nastro Me.Ber. con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie.

Art. 612/AN-2/MEB



Art. 608-A/MEB - 608-N/MEB



Cintura arancio o nera 2 pezzi con gancio in metallo e nastro con logo Me.Ber. (L. 155 cm)



Accessori barella autocaricante FROG PLUS PROOF

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Trendelenburg	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
7240 PROOF		Acciaio inox	✓	92 cm	66 cm	60 cm	32,5 cm	56 cm	195 cm	166 cm	47,5 kg	250 kg



CARRELLI AUTOCARICANTI PER INCUBATRICE



Art. 7240/INC PROOF

FROG PLUS INC PROOF

Carrello autocaricante per incubatrice "FROG PLUS" con predisposizione per gancio certificato

Costruito con la predisposizione per il nostro sistema di fissaggio certificato art. 955 PROOF, è l'ideale per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso. Prodotto senza schienale, spondine e piano rigido lettino, fa parte della gamma delle barelle autocaricanti "FROG PLUS".

ACCESSORI



Pediatric


Art. 12050

Interfaccia allungata per carrelli autocaricanti per incubatrice



Art. 12048

Interfaccia certificata 10G per carrelli autocaricanti per incubatrice

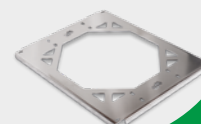

Art.
7240/INC PROOF
+ 12048



Art.
7240/INC PROOF
+ 12050



Art.
7260/INC PROOF
+ 12048



Art.
7260/INC PROOF
+ 12050



Art. 7260/INC PROOF

FROG LITE INC PROOF

Carrello autocaricante per incubatrici con predisposizione per sistema di fissaggio certificato

Appartiene alla gamma delle barelle autocaricanti "FROG LITE" di cui mantiene tutte le caratteristiche di affidabilità, sicurezza e durata. Realizzato in lega di alluminio verniciato, prodotto senza schienale, senza spondine e senza piano rigido lettino, è l'ideale per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
7240/INC PROOF	■	Acciaio inox	82 cm	66 cm	60 cm	27 cm	56 cm	195 cm	166 cm	38,4 kg	250 kg
7260/INC PROOF	□	Alluminio verniciato	83 cm	66 cm	60 cm	26 cm	56 cm	196 cm	166 cm	28,5 kg	250 kg

CARRELLI PORTA-INCUBATRICE



Pediatric



Art. 910/GIN

WINNER GIN

"WINNER" carrello autocaricante per incubatrici

Studiato per il caricamento e il trasporto di incubatrice su mezzi di soccorso, questo carrello fa parte della gamma "Winner", di cui mantiene tutte le caratteristiche. È realizzato in alluminio anodizzato.

Art. 910/GIN PROOF

WINNER GIN PROOF

"WINNER" carrello autocaricante per incubatrici con predisposizione per sistema di fissaggio certificato

Realizzato in alluminio anodizzato con le stesse caratteristiche dell'art. 910/GIN, è costruito con la predisposizione al nostro sistema di fissaggio certificato art. 955 PROOF.

Art. 7034

CARRELLO FISSO PORTA-INCUBATRICE

Carrello ad altezza fissa con struttura in acciaio inox con 4 ruote di Ø 200 mm (di cui 2 con freno) per trasporto intraospedaliero di termoculle. Dimensioni compatte per una facile manovrabilità. Comprende interfaccia universale per fissaggio termoculla.




ACCESSORI

Art. 12048

Interfaccia certificata 10G per carrelli autocaricanti per incubatrice



Pediatric

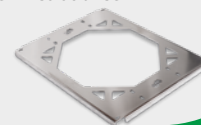

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza con carrello abbassato	Peso	Portata
910/GIN		Alluminio anodizzato	80 cm	65 cm	45 cm	22 cm	56 cm	194 cm	162 cm	28 kg	170 kg
910/GIN PROOF		Alluminio anodizzato	80 cm	65 cm	62 cm	22 cm	56 cm	194 cm	155 cm	31 kg	170 kg
7034		Acciaio inox	74 cm	-	-	-	57 cm	90 cm	-	30,5 kg	-

GECKO

BARELLA AUTOCARICANTE ENTRY-LEVEL



Art. 7122/AZ

GECKO

Barella autocaricante entry-level azzurra

Realizzata per ottimizzare il rapporto qualità/prezzo, è costruita in acciaio verniciato ad alta resistenza. Il dispositivo garantisce tutte le caratteristiche delle altre barelle autocaricanti: schienale regolabile, 4 ruote Ø 200 mm (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti), spondine laterali ribaltabili. Viene fornita di serie con cinture.

➔ Accessori barella autocaricante GECKO

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

➔ ACCESSORI

Art. 950/3
(H. 148 mm)



Sistema di fissaggio
posteriore per barella
autocaricante

Art. 965



Sistema di fissaggio
anteriore per barella
autocaricante

Art. 7016/A



Materasso intero
elettrosaldato
arancio in PVC

➔ DI SERIE

Art. 603/MEB



Fornita di
serie con cinture

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
7122/AZ		Acciaio verniciato	90,5 cm	62 cm	30 cm	56 cm	197 cm	40,2 kg	170 kg

TITANUS⁴

CARRELLO AUTOCARICANTE INOX
AD ALTEZZA VARIABILE CERTIFICATO
CON 4 RUOTE GIREVOLI



Art. 7060/4RG PROOF

TITANUS⁴

"TITANUS" carrello autocaricante inox ad altezza variabile con 4 ruote girevoli certificato

Titanus si propone come la soluzione ideale tra le barelle e i carrelli autocaricanti ad altezza variabile per ambulanze. Il sistema di ancoraggio della barella al carrello Titanus è testato e certificato UNI EN 1789. L'altezza variabile, così come l'abbattimento delle gambe per il carico e scarico, è gestito da un sistema a 2 pistoni a scorrimento meccanico su ciascun asse. Ruote grandi da 200 mm e la configurazione particolare delle gambe, conferiscono al carrello Titanus stabilità, maneggevolezza ed ergonomia di utilizzo. Le 4 ruote girevoli permettono una migliore movimentazione. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Art. 7062/4RG PROOF

TITANUS⁴

Carrello autocaricante inox ad altezza variabile certificato con 4 ruote girevoli versione alta

Stesse caratteristiche della versione 7060/4RG PROOF con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Posizione caricata



Ruote
girevoli
anteriori



Leva di
sblocco
ruote girevoli
anteriori



**Art. 7060/4RG +
1510 PROOF**



ACCESSORI

Art. 1515 PROOF



Art. 1510 PROOF



Art. 956 PROOF



Sistema di fissaggio per
carrelli autocaricanti "Titanus"
certificato UNI EN 1789

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza variabile	Altezza intermedia	Altezza max	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Larghezza	Larghezza asse posteriore	Lunghezza	Lunghezza piegata	Peso	Portata
7060/4RG PROOF	■	Acciaio inox	✓	61 cm	84 cm	64 cm	60 cm	25 cm	44 cm	56 cm	197 cm	-	35,9 kg	220 kg
7062/4RG PROOF	■	Acciaio inox	✓	61 cm	89 cm	72 cm	68 cm	25 cm	44 cm	56 cm	197 cm	200 cm	36 kg	220 kg

EVOX PROOF

BARELLA SEDIA
AUTOCARICANTE CERTIFICATA



Art. 7112 PROOF

EVOX PROOF

"EVOX" barella sedia autocaricante certificata completa di materasso

La barella sedia autocaricante EVOX permette di accomodare il paziente nella posizione più idonea per il soccorso e il trasporto. La possibilità di trasformarsi in sedia consente l'accesso in tutti quei luoghi angusti, come corridoi con angoli stretti e ascensori, dove una normale barella non riesce a passare. Un sistema di pistoni a gas permette di regolare la EVOX in infinite posizioni fino a raggiungere la posizione seduta, sollevando l'operatore da qualsiasi sforzo per posizionare il paziente. Telaio interamente in acciaio inox elettrolucidato, ruote in poliuretano Ø 200mm, comando di sicurezza per evitare chiusure accidentali, materasso diviso in quattro sezioni separate (uno per ogni sezione del piano della barella) e design accattivante sono le caratteristiche di punta di questo dispositivo sempre più richiesto dai mercati. Un sistema di carico innovativo, costituito da 4 ruote di carico "basculanti", permette il caricamento su molteplici pianali con diverse altezze. Grazie all'apposito attacco a fungo e in abbinamento al sistema di fissaggio art. 962, la barella sedia EVOX art. 7112 PROOF è in grado di resistere a sollecitazioni fino a 10G in tutte le direzioni, come previsto dalla norma UNI EN 1789. La EVOX, grazie alla possibilità di accomodare il paziente nella posizione più congeniale a seconda della gravità del caso, si presenta anche come la soluzione ideale per i punti di accoglienza dei 118, dove i pazienti possono essere soggetti a lunghi tempi di attesa. Fornita di serie con n° 1 materasso art. 7009/N e n° 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB.



→ DI SERIE

Art. 7009/N

Materasso elettrosaldato diviso per barella sedia EVOX



Art. 608-A/MEB - 608-N/MEB

Cintura arancio o nera 2 pezzi con gancio in metallo e nastro con logo Me.Ber. (L. 155 cm)



(*) Fornita di serie con n°1 materasso e n°2 cinture a scelta tra i colori a disposizione

→ ACCESSORI

Art. 12016-E

Asta portaflebo telescopica pieghevole per barella sedia autocaricante EVOX PROOF



Art. 12100/N

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



Art. 962

Sistema di fissaggio corto EN 1789 per barella sedia autocaricante EVOX PROOF



Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Lunghezza piegata	Lunghezza min posizione sedia	Peso	Portata
7112 PROOF		Acciaio inox	80 cm	67 cm	27 cm	58 cm	193 cm	198 cm	123 cm	44,5 kg	220 kg

MBS-01



Bariatric

BARELLA AUTOCARICANTE PER TRASPORTO BARIATRICO



Art. 7270 PROOF

MBS-01

Barella autocaricante per trasporto bariatrico

Barella autocaricante appositamente studiata per il **trasporto di pazienti bariatrici**, è costruita in una speciale lega di **acciaio inox ad alta resistenza**. Il telaio è stato **rinforzato** per garantire una **portata di 350 kg**, **maggiorata** rispetto alle altre barelle autocaricanti della gamma MeBer, ed è stato dotato di **2 ruote anteriori Ø 125x25 mm e 2 ruote posteriori Ø 100x25 mm** per la massima sicurezza nelle fasi di carico e scarico dal mezzo di soccorso. Le 4 ruote Ø 200 mm, 2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti, conferiscono un alto grado di comfort al paziente. Il pianale rigido costruito in alluminio rende questo dispositivo facilmente lavabile e sanificabile. È inoltre dotata di schienale reclinabile da 0° a 80° azionato da una molla a gas bloccabile in qualsiasi posizione e di spondine laterali ribaltabili. Le gambe verticali sono protette da paracolpi in plastica. Viene fornita completa di materasso e cinture (art. 7013, n. 2 cinture art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o 612/N-2 MEB). La portata maggiorata rende ideale l'**utilizzo** di questa barella **in abbinamento al pianale bariatrico MBP** (art. 12080) e **al set ali bariatriche** (art. 12084).

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.



Art. 7270 PROOF +
Set ali art. 12084 +
Materassi art. 12170 e art. 12172 +
Materasso art. 7013/N



Art. 7270 PROOF +
Pianale art. 12080 +
Materasso art. 7015 +
Arrotolatori cinture art. 560

➔ Accessori barella autocaricante MBS-01

vedi sezione

ACCESSORI • pag.80

➔ ACCESSORI

Art. 12080

MBP pianale bariatrico
largo per barelle
autocaricanti

i Specificare il modello barella



Art. 7015

Materasso pieghevole
in skay nero per pianale
bariatrico MBP



Art.	Colore	Materiale	Altezza	Altezza max di carico	Altezza piegata	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
7270		Acciaio inox	92 cm	64,5 cm	25 cm	56 cm	197 cm	49,5 kg	350 kg

WINNER

BARELLA AUTOCARICANTE



Art. 910

Art. 910 PROOF



Art. 914

Art. 914 PROOF

Art. 910

Art. 910 PROOF

Art. 914

Art. 914 PROOF

WINNER

910 - Barella autocaricante

914 - Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler

Tutte realizzate in alluminio anodizzato, sono dotate di 4 ruote di 150 mm (posteriori autocentranti), schienale reclinabile da 0° a 80°, spondine laterali ribaltabili, gambe verticali protette da paracolpi. Robuste e maneggevoli. Complete di materasso (art. 7013/N o 7014/N) e cinture (n. 2 608-A/MEB o 608-N/MEB + n. 1 cintura art. 612/AN-2/MEB o 612/AN-2/MEB) nella versione PROOF.

Disponibili anche in versione "PROOF" certificata UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

Art.	Colore	Materiale	Fowler	Altezza	Altezza max di carico	Altezza min di carico	Altezza piegata	Lunghezza con carrello abbassato	Larghezza	Lunghezza	Peso	Portata
910	■	Alluminio anodizzato		87,5 cm	65 cm	45 cm	26 cm	162 cm	56 cm	194 cm	34 kg	170 kg
910PROOF	■	Alluminio anodizzato		87,5 cm	65 cm	62 cm	26 cm	155 cm	56 cm	194 cm	37 kg	170 kg
914	■	Alluminio anodizzato	✓	87,5 cm	65 cm	45 cm	26 cm	162 cm	56 cm	194 cm	37 kg	170 kg
914PROOF	■	Alluminio anodizzato	✓	87,5 cm	65 cm	62 cm	26 cm	155 cm	56 cm	194 cm	40 kg	170 kg

SEDIE PORTANTINE

MeBer presenta la propria gamma completa di sedie portantine. Questi dispositivi sono essenziali a bordo di ogni categoria di ambulanza perché consentono di accedere in tutti quei luoghi in cui le barelle non possono arrivare (edifici alti, ascensori, locali angusti, scale strette ecc.). Sviluppate grazie al supporto e all'esperienza dei soccorritori di tutto il mondo, le sedie MeBer sono apprezzate per la qualità dei materiali costruttivi, la precisione dei movimenti e soprattutto per la certificazione 10G (UNI EN 1865 - UNI EN 1789) che le rendono sicure anche quando stivate nei mezzi di soccorso. La sedia scendiscala cingolata Extra ridefinisce gli standard qualitativi in questo segmento grazie ad innovazioni uniche e all'impiego di materiali ultraleggeri.



Scopri la gamma delle Sedie portantine sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/sedie-portantine.aspx>



SEDIE PORTANTINE



Codice articolo	Nome	Modello
670/BR	EXTRA	Sedia portantina scendiscale assistita
676	EXTRA LITE	STANDARD Sedia portantina pieghevole
678		BASIC Sedia portantina pieghevole
679		ZENA Sedia portantina pieghevole stretta
668	KUMA	Sedia motorizzata sali e scendi scale di colore nero
659/Y	QUICK	Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedane e braccioli
650	MAYA	Sedia portantina
653		Sedia portantina con 4 ruote pedane e braccioli
683	PROXIMA PRO	Sedia portantina fissa imbottita con pedana e braccioli


TABELLA COMPARATIVA



Colore	Certificazione 10G	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Altezza chiusa	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max	Spessore chiusa	Peso	Portata
	✓		50 cm	101 cm	-	55 cm	81 cm	139 cm	29 cm	20,3 kg	230 kg
	✓		50 cm	101 cm	-	55 cm	78 cm	139 cm	29 cm	13,9 kg	230 kg
	✓		50 cm	101 cm	-	55 cm	78 cm	139 cm	29 cm	13,3 kg	230 kg
	✓		56 cm	102 cm	-	47/50 cm	65 cm	122 cm	29 cm	14,2 kg	230 kg
	✓		50 cm	108 cm	-	52 cm	79 cm	127 cm	24 cm	35 kg	181 kg
	✓		50 cm	90 cm	99 cm	51 cm	71 cm	126 cm	23 cm	14 kg	170 kg
	✓		51 cm	91 cm	-	52 cm	74 cm	128 cm	24 cm	11,2 kg	170 kg
	✓		52 cm	90 cm	98 cm	52 cm	75 cm	131 cm	24 cm	14 kg	170 kg
	✓		50 cm	118 cm	-	57 cm	90 cm	163 cm	-	24,6 kg	170 kg

EXTRA

SEDIA SCENDISCALE ASSISTITA

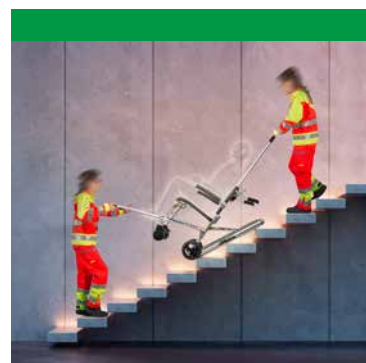

Art. 670/BR

EXTRA

Sedia portantina scendiscale assistita

EXTRA è la sedia portantina MeBer con dispositivo cingolato scendiscale interamente realizzata con leghe di alluminio. L'inclinazione dello schienale, delle maniglie di presa posteriori e la particolare configurazione delle leve anteriori, garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi, alleviando gli sforzi degli operatori. Cingoli lunghi ad alta aderenza permettono l'appoggio della sedia su tre gradini, conferendo ad EXTRA una straordinaria sicurezza e maneggevolezza durante la discesa con il paziente seduto. Durante il trasporto in piano, le ruote posteriori da 200 mm

e le frontali da 125 mm garantiscono altresì elevati comfort e manovrabilità. La dotazione con due pratici braccioli e un maniglione posteriore telescopico rivestiti con guaina imbottita, massimizza il comfort e la maneggevolezza. Pedana poggia piedi ribaltabile con bloccaggio magnetico e innovative soluzioni biomeccaniche, rispetto alle sedie convenzionali, completano le caratteristiche di questo articolo per il soccorso. È disponibile anche la versione con freno sulle ruote posteriori, acquistabile come optional. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



**Sedia
chiusa**



DI SERIE

Art. 566

Busta nera con
3 cinture a 2 pz.
fondo nero e
"MeBer" arancio
per Extra



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 975



ERGOLIFT FIXING
SYSTEM.
Sistema di fissaggio
per sedia Extra
Ergolift, sedie Extra
pieghevoli e Zena.



Art. 960



EXTRA FIXING SYSTEM.
Sistema di fissaggio
per sedia Extra
certificato UNI EN 1789.



ACCESSORI

Art. 670-001

Fermacapo
per sedia
scendiscale
Extra



Art. 670-002

Cover
traspirante
antipolvere
in nylon nero
per sedie
Extra



Art. 12016-S

Asta portaflebo
telescopica
pieghevole con
supporto per
sedie Extra ed
Extra Ergolift



Art. 670-004

Staffa ruota
diam. 200 mm
con freno per
sedia Extra



Dati tecnici

Art.	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max	Spessore chiusa	Peso	Portata
670/BR	Alluminio verniciato	50 cm	101 cm	55 cm	81 cm	139 cm	29 cm	20,3 kg	230 kg

EXTRA LITE



SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE



Art. 678

EXTRA LITE BASIC

Sedia portantina pieghevole

EXTRA LITE basic è la sedia portantina MeBer interamente realizzata con leghe di alluminio. Le maniglie posteriori e la particolare configurazione delle leve anteriori garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi, alleviando gli sforzi degli operatori. L'assetto e l'ergonomia di seduta e schienale conferiscono elevato comfort per il paziente. Durante la movimentazione in piano le ruote posteriori da 200 mm e le anteriori da 125 mm garantiscono altresì ottima manovrabilità. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



Art. 676

EXTRA LITE STANDARD

Sedia portantina 4 ruote pieghevole con pedana e braccioli

EXTRA LITE standard ripropone le stesse caratteristiche tecniche dell'Art. 678. Pedana poggiapiedi ribaltabile con bloccaggio magnetico e braccioli completano le caratteristiche di questo articolo per il soccorso. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**



DI SERIE

Art. 566

Busta nera con 3 cinture a 2 pz. fondo nero e "MeBer" arancio per Extra



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 975



ERGOLIFT FIXING SYSTEM.
Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift, sedie Extra pieghevoli e Zena.



Art. 960



EXTRA FIXING SYSTEM.
Sistema di fissaggio per sedia Extra certificato UNI EN 1789.



ACCESSORI

Art. 670-002

Cover traspirante antipolvere in nylon nero per sedie Extra



Art. 670-004

Staffa ruota diam. 200 mm con freno per sedia Extra



Dati tecnici

Art.	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max	Spessore chiusa	Peso	Portata
676	Alluminio verniciato	50 cm	101 cm	55 cm	78 cm	139 cm	29 cm	13,9 kg	230 kg
678	Alluminio verniciato	50 cm	101 cm	55 cm	78 cm	139 cm	29 cm	13,3 kg	230 kg

EXTRA LITE ZENA

SEDIA PORTANTINA
STRETTA PIEGHEVOLE



Art. 679

EXTRA LITE ZENA

Sedia portantina stretta, 4 ruote pieghevole con pedana, braccioli e pianali in alluminio

Extra Lite Zena è stata ideata e progettata per essere utilizzata in spazi stretti e angusti quali: mezzi di trasporto pubblico (pullman, treni, aerei, ecc...), ascensori e scale di larghezza ridotta. Realizzata in lega di alluminio, la sedia è molto maneggevole. Seduta e schienale sono rivestiti in EVA espanso morbido per un confort ottimale e facilità di sanificazione. Pieghevole, dotata di leve anteriori estraibili e di leve

posteriori ripiegabili per ridurre l'ingombro quando necessario, si fissa in ambulanza con i **bloccaggi certificati EN 1789 art. 960 e art. 975**. Completano le caratteristiche di questa sedia da soccorso le 2 ruote anteriori da 125 mm con freno, 2 posteriori da 200 mm, braccioli rivestiti in gomma e pedana poggiatesta a scomparsa. Peso: 14,2 kg.

Dati tecnici

Art.	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Lunghezza min.	Lunghezza max.	Larghezza min.	Larghezza max.	Spessore ripiegata	Peso	Portata
679	Leghe di alluminio	56 cm	102 cm	65 cm	122 cm	47 cm	50 cm	29 cm	14,2 kg	230 kg


Edifici datati



Treni e pullman




Aerei

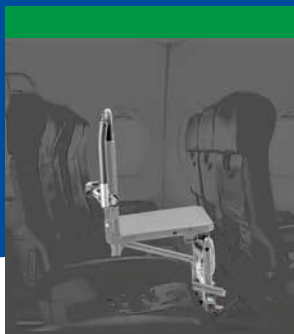

Montacarichi



←
**Sedia
chiusa**

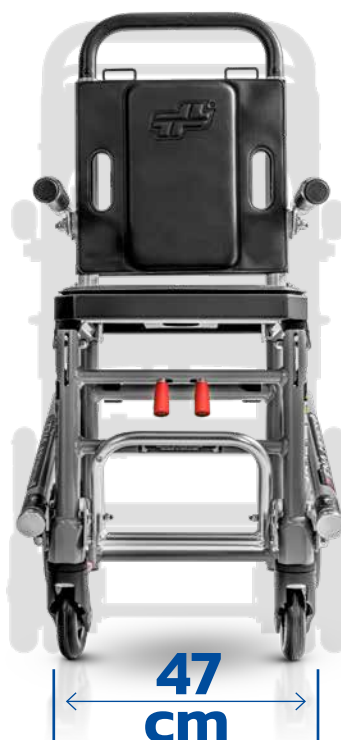

←
**Comparazione
degli ingombri con
una normale sedia
portantina**




ACCESSORI

Art. 507G (sinistra) - 506G (destra)



Leve estraibili con impugnatura ergonomica per sedie Extra

Art. 612/AN-2/MEB - 612/N-2/MEB

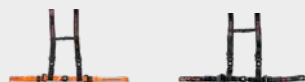

Cintura toracica regolabile arancione e nera con nastro MeBer con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie

Art. 842L



Kit bloccaggio leve posteriori Zena (il kit comprende i blocchi per entrambe le leve).



DI SERIE

Art. 566



Busta nera con 3 cinture a 2 pz. fondo nero e "MeBer" arancio per Extra



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 975



ERGOLIFT FIXING SYSTEM.
Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift, sedie Extra pieghevoli e Zena.



Art. 960



EXTRA FIXING SYSTEM.
Sistema di fissaggio per sedia Extra certificato UNI EN 1789.



KUMA

SEDIA MOTORIZZATA SALI E
SCENDI SCALE



Art. 668

KUMA

Sedia motorizzata sali e scendi scale di colore nero

Kuma è la sedia motorizzata MeBer caratterizzata da telaio in lega di alluminio, batteria alimentata agli ioni di litio, leve anteriori, pratici braccioli, pedana poggiapiedi, pratico maniglione allungabile (con annessa una piccola consolle per il comando dei cingoli) e 4 ruote (2 fisse posteriori da Ø200 mm con freno e 2 anteriori girevoli da Ø125 mm). Il motore elettrico aziona i cingoli consentendo la salita e la discesa delle scale

senza sforzi per l'operatore. Kuma garantisce una portata di 181 kg. Viene fornita di serie con batteria, caricabatteria, cuscino del sedile, poggiatesta, cintura toracica, cintura ventrale. Pratica e maneggevole, la sedia motorizzata Kuma è molto semplice da utilizzare. Colore: nero. **Dispositivo conforme allo standard armonizzato europeo UNI EN 1789.**

→ ACCESSORI

Art. 12180

Batteria



Art. 12182

Caricabatterie



→ SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 977

Sistema certificato di fissaggio per sedia scendiscale Kuma



Dati tecnici

Art.	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Lunghezza min.	Lunghezza max	Larghezza	Spessore ripiegata	Peso	Portata
668	Alluminio verniciato	50 cm	108 - 164 cm	79 cm	127 cm	52 cm	24 cm	35 kg	181 kg

PROXIMA PRO

SEDIA PORTANTINA
IMBOTTITA



Art. 683

PROXIMA PRO

Sedia portantina fissa imbottita in alluminio certificata UNI EN 1865

Costruita in lega di alluminio si caratterizza per la sua leggerezza. Schienale e sedile sono imbottiti in spugna ignifuga e rivestiti in skay per rendere il prodotto particolarmente comodo e facile da pulire. È dotata di 4 ruote girevoli Ø 150 mm (2 posteriori girevoli con freno di stazionamento e 2 anteriori fisse), di 2 maniglie posteriori, di 4 leve estraibili (2 anteriori e 2 posteriori, Ø 35 mm per un

efficace scorrevolezza) e di braccioli ripiegabili rivestiti da una guaina imbottita ad alto comfort. Viene fornita di serie con cintura toracico-addominale art. 610. Disponibile come accessorio è il sistema di fissaggio dedicato certificato UNI EN 1789 art. 988 (vedi categoria "Sistemi di fissaggio"). **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Altezza seduta	Altezza	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max.	Peso	Portata
683		Alluminio verniciato	50 cm	118 cm	57 cm	90 cm	163 cm	24,6 kg	170 kg

ACCESSORI

Art. 988



Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift FX e Proxima Pro



QUICK 659

SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE



Art. 659/Y

QUICK

Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli gialla/nera

È un dispositivo di importanza fondamentale per l'operatore del soccorso. Dotata di 4 ruote (2 fisse posteriori Ø 125 mm e 2 girevoli anteriori con freno Ø 100 mm), braccioli pieghevoli, pedana poggiapiedi ribaltabile, 4 maniglie posteriori e 2 anteriori estraibili, garantisce comfort e sicurezza al paziente.

Lo schienale e il sedile in materiale termoplastico sono facilmente sanificabili. Viene fornita completa di busta nera a 3 cinture (art. 590/N). **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.**

DI SERIE

Art. 590/N

Busta nera con 3 cinture nere per sedie portantine



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 618




Sistema di fissaggio per sedia portantina (vedi sezione Sistemi di fissaggio)



ACCESSORI

Art. 612/AN-2/MEB - 612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancione e nera con nastro MeBer con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie

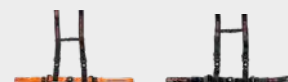

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Alt. seduta	Altezza	Alt. chiusa	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max.	Spessore chiusa	Peso	Portata
659/Y		Acciaio verniciato	50 cm	90 cm	99 cm	51 cm	71 cm	126 cm	23 cm	14 kg	170 kg

MAYA 653

SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE



Art. 653

MAYA

Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli

Progettata per agevolare gli operatori durante gli interventi di soccorso, è realizzata in alluminio anodizzato. Dotata di 4 ruote (2 girevoli e frenanti Ø 100 mm e 2 fisse Ø 125 mm), un sistema di apertura/chiusura sicuro e semplice, 4 leve posteriori e 2 anteriori estraibili, schienale e sedili in materiale

termoplastico facilmente sanificabile e pedana poggiapiedi. Viene fornita completa di busta nera a 3 cinture (art. 590/N).

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

Dati tecnici

Art.	Colore	Materiale	Alt. seduta	Altezza	Alt. chiusa	Larghezza	Lunghezza min.	Lunghezza max.	Spessore chiusa	Peso	Portata
653		Alluminio anodizzato	52 cm	90 cm	98 cm	52 cm	75 cm	131 cm	24 cm	14 kg	170 kg
650		Alluminio anodizzato	51 cm	91 cm	-	52 cm	74 cm	128 cm	24 cm	11,2 kg	170 kg

MAYA 650

SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE



Art. 650

MAYA

Sedia portantina pieghevole

Progettata per essere un dispositivo essenziale per il trasporto dei pazienti, è realizzata in alluminio anodizzato. Dispone di 4 leve (2 posteriori e 2 anteriori estraibili) e di 2 ruote fisse Ø 125 mm, è pratica e semplice da utilizzare. Sistema di chiusura/

apertura che evita le aperture accidentali. Viene fornita completa di busta nera a 3 cinture (art. 590/N).

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

DI SERIE

Art. 590/N

Busta nera con 3 cinture nere per sedie portantine



SISTEMI DI FISSAGGIO

Art. 618


Sistema di fissaggio per sedia portantina (vedi sezione Sistemi di fissaggio)



ACCESSORI

Art. 612/AN-2/MEB - 612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancione e nera con nastro MeBer con aggancio a 4 punti per barelle autocaricanti e sedie

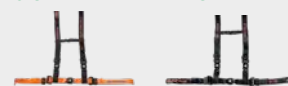

ACCESSORI

La massima qualità dei prodotti Me.Ber. è anche frutto degli accessori che li completano. I materassi ad esempio sono sempre al centro dell'attenzione dei nostri progettisti per fornire comfort e sicurezza, adattandosi al tempo stesso alle caratteristiche specifiche delle barelle per cui sono progettati. Oltre ai materassi, completano la gamma accessori una ricca selezione di borse, contenitori, custodie e portastrumenti studiati e selezionati con il supporto e l'esperienza degli operatori più esigenti.



			MATERASSI											CUSCINI	
	Codice articolo	Nome	7014/A	7013/N	7016	1880-001	7009/N	7002	7015	12106	12170	12172	1880-002	12100/N	
Barelle	16150/G 16150/V	ERGON													
	16160/G 16160/V	ERGON JR													
	630 631 6200	MAXIMA													
	660														
	13010	ICARUS				✓							✓		
	13018	CRONOS		✓											
	16102	TOBOGA													
	1515 PROOF		✓												
	1510 PROOF														
Barelle autocaricanti	7080/4RG PROOF 7082/4RG PROOF	MERCURY LITE 4	✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	
	7070/4RG PROOF 7072/4RG PROOF	MERCURY 4	✓	✓				✓		✓	✓	✓			
	7095/4RG PROOF 7097/4RG PROOF	MERCURY 5 LITE	✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	
	7075/4RG PROOF 7077/4RG PROOF	MERCURY 5	✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	
	7092 PROOF 7094 PROOF	MERCURY EL	✓	✓				✓		✓	✓	✓			
	7300	MEBER-X	✓					✓							
	7112 PROOF	EVOX					✓							✓	
	7260 PROOF	FROG LITE	✓	✓				✓		✓	✓	✓			
	7210 7210 PROOF	FROG	✓	✓				✓		✓	✓	✓			
	7240 PROOF	FROG PLUS	✓	✓				✓		✓	✓	✓			
	7122/AZ	GECKO			✓			✓							
	7270 PROOF	MBS-01	✓	✓					✓		✓	✓			
	910 910 PROOF	WINNER	✓	✓				✓							
	914 914 PROOF	WINNER	✓					✓							
	Carrelli autocaricanti	7240 INC PROOF	FROG INC												
7260 INC PROOF		FROG LITE INC													
910/GIN PROOF 910/GIN		WINNER GIN													
Sedie portantine	670/BR	EXTRA													
	678 676	EXTRA LITE (Basic Standard)													
Immobilitzzazione	9010 9012	GALAXY													
	9040 9042	GALAXY-P													
	9050	NILIX													
	9104	NAXOS													
	9114	CHESTERFIELD													
	894	SNAKE													
	895	SNAKE PLUS													
	9100	BUNNY													
	9102	BUNNY PLUS													
	9130	BABY FIX													
	9128	VACUUM BAY FIX													


TABELLA COMPARATIVA

[illegible]

Scopri la gamma di accessori sul sito Me.Ber. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:
<https://www.meber.it/it/prodotti/accessori.aspx>

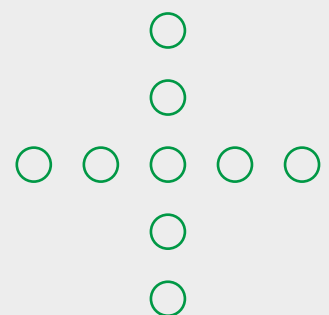

MATERASSI

MATERASSI PER BARELLE
AUTOCARICANTI



Art. 7014/A

MATERASSO IN SKAY

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato

Materasso per barella autocaricante realizzato in skay e spugna ignifuga. Completamente elettrosaldato e impermeabile è adatto a quasi tutte le barelle autocaricanti MeBer (non idoneo per barella Evox). N. 3 cinture art. 605/C in dotazione **Dimensioni: cm 186 x 47 x 9**




Art. 7013/N

MATERASSO IN SKAY

Materasso 3 pz. in skay ignifugo elettrosaldato

Stesse caratteristiche del 7014 ma adatto a tutte le barelle autocaricanti MeBer dotate di Trendelenburg compresa la barella Cronos (non idoneo per barella Evox e barelle artt. 1515 e 914). N. 3 cinture art. 605/C in dotazione **Dimensioni: cm 186 x 47 x 9**

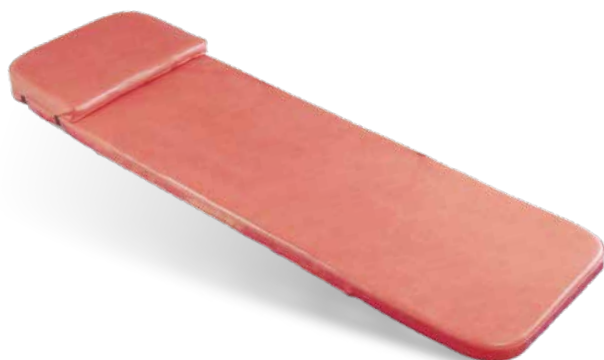

Art. 1880-002

CUSCINO PER ICARUS

Cuscino in skay per materasso Icarus

Cuscino per materasso da abbinare alla barella Icarus. Realizzato con spugna interna ignifuga e copertura in skay ignifugo, impermeabile e antistrappo. Doppia cucitura. **Dimensioni: cm 55 x 35 x 5**

Art. 1880-001

MATERASSO PER ICARUS

Materasso per barella Icarus

Materasso per barella Icarus realizzato con spugna interna ignifuga e copertura in skay ignifugo, impermeabile e antistrappo. Doppia cucitura. **Dimensioni: cm 180 x 55 x 5.**



Art. 7016/A

MATERASSO IN PVC

Materasso intero elettrosaldato arancio in PVC

Dimensioni: cm 186 x 47 x 5



Art. 7009/N

MATERASSO

Materasso elettrosaldato nero diviso per barella sedia EVOX

Materasso elettrosaldato per barella sedia autocaricante EVOX realizzato in skay e spugna ignifuga. Completo di cinturini per il fissaggio alla barella. Suddiviso in 2 parti per seguire perfettamente le varie configurazioni della barella, ha i lati esterni rialzati per un migliore contenimento del paziente. **Dimensioni:** cm 131 x 45 x 8 - 46 x 42 x 8

Art. 12100/N

CUSCINO

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato

Cuscino elettrosaldato in skay e spugna ignifuga dotato di asole per l'ancoraggio ai materassi 7009 - 7013 - 7014. La particolare sagomatura lo rende anatomico e ideale per il sostegno e il contenimento del capo. Accessorio abbinabile al sistema allungabile per poggiatesta barella art. 12128.

Dimensioni massime: cm 37 x 25 x 12 (L x P x H)



Art. 7009-001

SET

Set composto da 4 cinturini di colore nero con Velcro® per fissaggio ai materassi art. 7009 - 7013 - 7014 alla sedia/barella EVOX



Art. 7002

MATERASSO PER MEBER-X

Materasso elettrosaldato 4 pz. nero

Stesse caratteristiche del 7014 ma adatto a tutte le barelle autocaricanti MeBer dotate di Trendelenburg compreso la barella Cronos (non idoneo per la barella Evox e la barella art. 1515).

Dimensioni: cm 180 x 47 x 8



Art. 12128

Sistema allungabile per poggiatesta barella Meber-X

Disponibile cuscino art. 12100/N come accessorio (non incluso).

Dimensioni: cm 45 x 23



BARIATRICA



Bariatric

ACCESSORI PER AUTOCARICANTI PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI BARIATRICI



Art. 12080

MBP

Pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG, MERCURY, GECKO e MBS-01 completo di cinture con arrotolatore e kit montaggio

Il pianale "MBP" è un sistema compatibile con le barelle autocaricanti Frog, Mercury e Gecko che consente di trasportare in sicurezza i pazienti obesi. La struttura in acciaio inox e il pianale in alluminio lo rendono un dispositivo leggero e resistente allo stesso tempo. Un sistema di cinture con arrotolatore ai due lati e 4 ganci per il fissaggio alla struttura della barella completano il dispositivo.

Dimensioni: cm 137,5 x 93,5 x 13. **Peso:** kg 18

Art. 7070/4RG PROOF + 12080



Art. 12080-001

KIT MONTAGGIO

Kit montaggio piano bariatrico e ali bariatriche per barelle autocaricanti

Kit per installazione e fissaggio del piano bariatrico MBP (art. 12080) e delle ali bariatriche (set artt. 12084 e 12200) su tutte le barelle autocaricanti **Frog e Mercury**. Può essere utilizzato anche per installare e fissare il piano bariatrico MBP (art. 12080) sulle barelle autocaricanti **Gecko**. Il kit è composto da una serie di fissaggi e accessori, adattabili e di facile installazione.



Art. 7270 PROOF +
12080 + 7015



Art. 7080/4RG PROOF
+ 12154



Art. 7015

MATERASSO PER MBP

Materasso pieghevole in skay nero per pianale bariatrico MBP

Materasso per pianale bariatrico MBP realizzato in poliuretano espanso e rivestito in skay nero ignifugo, impermeabile e antistrappo. È pieghevole in 2 parti per un facile stivaggio ed è dotato di 6 fasce in Velcro® per l'ancoraggio alla struttura del pianale.

Dimensioni: cm 173 x 96 x 5,5



Art. 12154

BEAR PODS

Sistema di contenimento per obesi per barelle autocaricanti

Il sistema di contenimento Bear Pods è un accessorio in nylon ideale per il trasporto di pazienti bariatrici su barelle autocaricanti. Realizzato con materiali di alta qualità, resistenti ad agenti chimici e raggi UV, risulta estremamente facile da pulire. Lo scopo del dispositivo è rendere più sicuro e affidabile il trasporto di pazienti bariatrici su barelle autocaricanti. Bear Pods si adatta a qualsiasi tipo di barella grazie ad appositi cinturini che vengono applicati sui tubi laterali del telaio della barella. **Il prodotto assicura il trasporto di pazienti con un peso fino a 300 kg.**

Art. 712

TELO PORTAFERITI

Telo portافرuti per obesi con 12 maniglie - cm 274 x 150

In nylon ignifugo antistrappo e impermeabile, dotato di 12 maniglie rinforzate.

Dimensioni: cm 274 x 150
Portata: kg 350




Art. 714

TELO PORTAFERITI

Telo portافرuti per obesi con 12 maniglie - cm 200 x 150

Stesse caratteristiche dell'art. 712, ma con dimensioni diverse: 200 x 150 cm.

Dimensioni: cm 200 x 150
Portata: kg 350

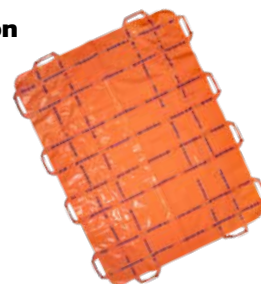

BARIATRICA



Bariatric

ACCESSORI PER AUTOCARICANTI PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI BARIATRICI



Art. 7095/4RG PROOF +
12084 + 12170 + 12172

Art. 12084 (MBS E Frog)

Art. 12200 (Mercury)

ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARICANTI

Le ali bariatriche sono un pratico accessorio che consente di convertire la barella autocaricante in un pratico strumento di recupero bariatrico. Grazie all'ingombro ridotto (e un peso di soli 14 kg) possono essere facilmente trasportate in ambulanza per essere usate all'occorrenza. Il loro utilizzo permette di fronteggiare in sicurezza, e nel modo più adeguato possibile, ogni scenario di recupero in presenza di pazienti bariatrici. Il kit è comprensivo di due ali che estendono il piano di appoggio della barella di oltre 30 cm; il montaggio e lo smontaggio sulla barella autocaricante sono estremamente semplici ed intuitivi e non richiedono l'uso di attrezzi. Se montate sulla nostra MBS-01 consentono una portata effettiva di 335 kg.

Art. 12084 e Art. 12200

Dimensioni: cm 136 x 19,5 x 4 (solo piano d'appoggio dell'ala)



Le ali bariatriche possono essere acquistate in kit completi di destra e sinistra o separatamente.

I cuscini sono compresi nei kit 12084 e 12200 (ali bariatriche DX e SX complete di cinture con arrotolatore e materassi).

Art. 7095/4RG PROOF
+ 12084 + 12170 + 12172
+ 7013/N



SET DISPONIBILI

Adatto per:

MBS-01 FROG
SELF LOADING STRETCHER




Art. 12084

Set ali bariatriche DX e SX per barelle autocaricanti MBS-01 e Frog, completo di cinture con arrotolatore e materassi.

* kit di fissaggio 12080-001 non incluso!

Adatto per:

MERCURY
SELF LOADING STRETCHER

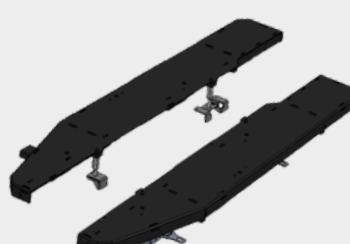

Art. 12200

Set ali bariatriche DX e SX per barelle autocaricanti Mercury completo di cinture con arrotolatore, kit fissaggio alla barella e materassi.

Art. 12086



Ala bariatrica DX per barelle autocaricanti MBS-01 e Frog completa di cinture con arrotolatore.

Art. 12202




Ala bariatrica DX per barelle autocaricanti Mercury completa di cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella.

Art. 12088



Ala bariatrica SX per barelle autocaricanti MBS-01 e Frog completa di cinture con arrotolatore.

Art. 12204

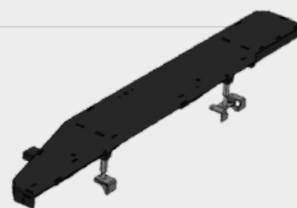

Ala bariatrica SX per barelle autocaricanti Mercury completa di cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella.

Art. 12170



Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti

Comodo materasso di colore nero per ala bariatrica destra. Si adatta perfettamente alla forma del supporto e conferisce confort al paziente bariatrico.

Art. 12172



Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti

Comodo materasso di colore nero per ala bariatrica sinistra. Si adatta perfettamente alla forma del supporto e conferisce confort al paziente bariatrico.

AIR-COM

MATERASSO ANTIDECUBITO PER LUNGHE PERCORRENZE



Art. 12106 +
Art. 12108 +
Art. 7013/N +
Art. 7070/4RG PROOF



Art. 12106

AIR-COM

Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni

Sovramaterasso in PVC composto internamente da 18 camere ad aria, indipendenti e intercambiabili.

È particolarmente indicato per il posizionamento di pazienti con rischio di contrarre piaghe da decubito. AIR-COM può essere posizionato anche su qualsiasi tipo di materasso per barella autocaricante. La parte sottostante, in tessuto antiscivolo, è fornita di 3 passanti per il fissaggio alla barella stessa. Disponibile il compressore ad aria con regolatore di pressione di gonfiaggio (art. 12108).


Dimensioni: cm 180 x 46 x 10. Portata: kg 150

Art. 12108

Compressore per materasso AIR-COM



Schema di funzionamento dei segmenti alternati

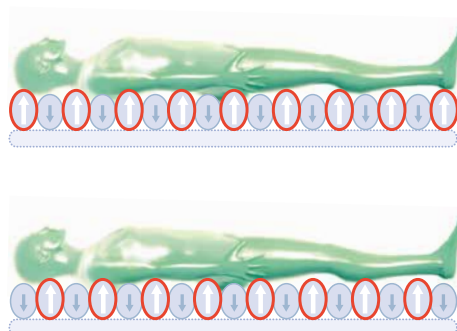

SISTEMI DI TRASFERIMENTO PAZIENTI



Art. 15244

SCANGLISS PIEGHEVOLE

Asse di trasferimento pieghevole

Asse di trasferimento pieghevole posizionabile sotto il paziente per consentire il passaggio da barella a letto in totale sicurezza. È un prodotto radiotrasparente, amagnetico ed è diviso in due sezioni solidali fra di loro. Consiste in un'anima di polietilene rigida, imbottita con materiale amorfo dello spessore di 1,5 cm il tutto avvolto da un telo in Nylon ad alta scorrevolezza.

Portata: 180 kg.

Dimensioni: cm 180 x 50.



Art. 15244-001

FODERA

Fodera di ricambio per Scangliss



Art. 707


SLASH

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie

Slash è l'innovativo telo di trasferimento salvamaterasso di MeBer. Ottimo alleato per la movimentazione del paziente da letto a barella e viceversa. Dotato di 6 maniglie, il telo è realizzato in nylon ignifugo, antistrappo e impermeabile. Collocato su barelle autocaricanti, si presta facilmente a un'immediata sanificazione tra un paziente e l'altro. Le misure ridotte sono appositamente studiate per agevolare le operazioni durante le fasi di movimentazione. Compatibile con tutti i modelli di barella. Slash non è un telo portaferiti.

Portata: 160 kg. Peso: 1 kg

Dimensioni: cm 188 x 50

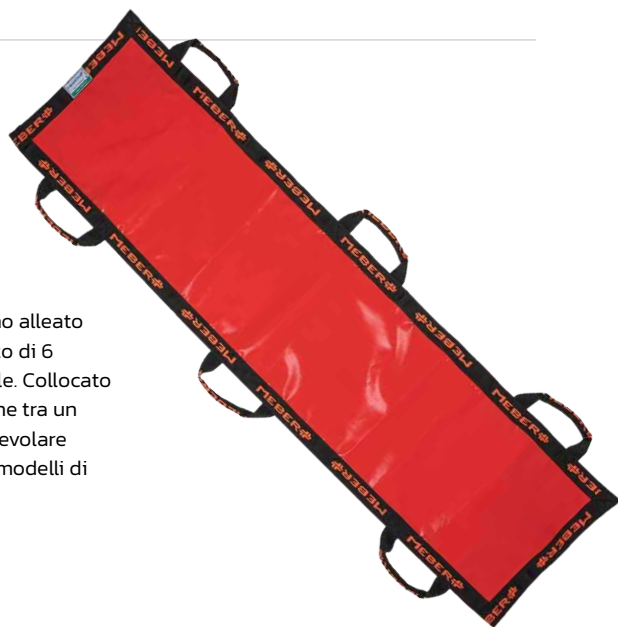

ASTE PORTAFLEBO E ACCESSORI



Art. 12018N

P-120

Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti

Asta portaflebo telescopica pieghevole in alluminio per barelle autocaricanti, tranne Evox e Winner.

Dim.: H min cm 45 - H max cm 128
Altezza 1° stadio: cm 70
Altezza 2° stadio: cm 98



Art. 12016-E

ASTA PORTAFLEBO EVOX

Asta portaflebo telescopica pieghevole per barella sedia autocaricante EVOX PROOF

Dimensioni:
H min. 43 cm - H max. 72,5 cm



Art. 12016-S

ASTA PORTAFLEBO EXTRA

Asta portaflebo telescopica pieghevole con supporto per sedie Extra ed Extra Ergolift

Dimensioni:
H min. 43 cm - H max. 72,5 cm

Art. 12019N

P-120 CON PIASTRA

"P-120X" asta portaflebo telescopica pieghevole in alluminio per barella X-Frame completa di piastrina.

Dimensioni:
H min cm 45 - H max cm 128
Altezza 1° stadio: cm 70
Altezza 2° stadio: cm 98

NEW ★



Art. 936



Art. 936/A



Art. 12010

Art. 936 - 936/A - 12010

ASTA PORTAFLEBO

Art. 936 Per barelle autocaricanti Winner e Frog
Art. 936/A Per barelle art. 1510 PROOF e 1515 PROOF
Art. 12010 Per barelle autocaricante Mercury e Gecko

Asta portaflebo telescopica per barella. Possibilità di montare l'asta in qualsiasi posizione della barella grazie ad un attacco rapido con volantino.

Dimensioni:
H min. 47,5 cm - H max. 130,5 cm


Art. 939

PORTASTRUMENTI

Piano portastrumenti per barelle

Piano portastrumenti da applicare al telaio di tutte le barelle autocaricanti MeBer, per il trasporto di attrezzature mediche come defibrillatori e monitor. È dotato di cinture per il fissaggio delle apparecchiature ed è pieghevole per lo stivaggio in ambulanza.

Dimensioni: aperto cm 34 x 56 x 42h, chiuso spess. cm 11

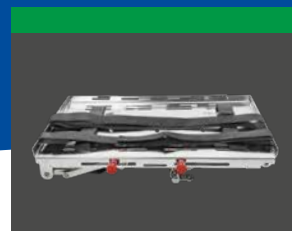

Art. 935


NEW ★

PORTASTRUMENTI PER X-FRAME E MEBER MAX

Piano portastrumenti per barelle X-Frame e MeBer Max

Piano portastrumenti da applicare al telaio delle barelle X-Frame e della barella motorizzata MeBer Max. Utile per il trasporto di attrezzature mediche come defibrillatori e monitor, è dotato di cinture per il fissaggio delle apparecchiature ed è pieghevole per lo stivaggio in ambulanza.

Dimensioni: aperto cm 34 x 63 x 40h, chiuso spess. cm 14

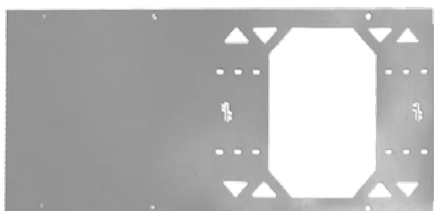

Art. 12050

INTERFACCIA INCUBATRICE

Interfaccia allungata per carrelli autocaricanti per incubatrice



Pediatric



Art. 12048

INTERFACCIA INCUBATRICE

Interfaccia certificata 10G per carrelli autocaricanti per incubatrice



Pediatric



Art. 12140

EVOLUTION

Martelletto automatico di sicurezza rompi vetro.



Art. 12142

CLASSIC GLOW

Martelletto di sicurezza rompi vetro.

CUSTODIE E BORSE



Art. 16102-001

CUSTODIA TOBOGA

Custodia per barella Toboga divisibile



Art. 12144/N

CUSTODIA

Custodia per tavola spinale

Custodia per tavola spinale con sacca per ragno e fermacapo removibile, colore nero. **Dimensioni: cm 184 x 43**



Art. 16150-001

BORSA VERRICELLABILE

Borsa verricellabile per il trasporto

Pensata per consentire il trasporto della barella sul teatro operativo, la borsa del corredo Ergon permette un utilizzo in piena sicurezza anche nelle situazioni più ostili. È dotata di 2 spallacci per una comoda presa. Al suo interno la barella è smontata e possono essere alloggiati tutti i suoi accessori, il tutto in dimensioni estremamente compatte. Al centro un anello di fettuccia compatibile EN566 permette tutte le operazioni col verricello. **Dimensioni: cm 124 x 32 x 16**



Art. 16150-002

BORSA STOCCAGGIO

Borsa per stoccaggio

In soli 8 cm di spessore la borsa per lo stoccaggio alloggia Ergon e i suoi accessori. È pensata sia per essere utilizzata nei depositi, sia per essere impiegata a bordo dei veicoli di soccorso. Aperta, la borsa diventa un isolante dal terreno e diventa un utile piano di lavoro lavabile per la preparazione di medicinali o per operare in sicurezza con dispositivi elettromedicali. **Dimensioni: cm 122 x 47 x 8**



Art. 630/CS

CUSTODIA

Custodia per barella a cucchiaio

Sacca in nylon di colore arancio con maniglia per il trasporto della barella a cucchiaio ripiegata in due.
Dimensioni: cm 130 x 47



Art. 9104-001

CUSTODIA

Custodia blu per materasso a depressione NAXOS

Lunghezza: cm 85
Diametro: cm 36



Art. 660/CS

CUSTODIA PER BARELLE

Custodia per barelle Art.660

Sacca in nylon di colore grigio per barella art. 660. Dotata di maniglia e tracolla per il trasporto.
Dimensioni: cm 100 x 16 x 20



Art. 12084-001

CUSTODIA

Custodia per ali bariatriche

Custodia per ali bariatriche (art. 12086, art. 12088, art. 12202 e art. 12204), colore nero.
Dimensioni: cm 136 x 18 x 21



CUSTODIE E COVER



Art. 890-001 (rossa)

Art. 890-001/B (blu)

NEW ★


CUSTODIA

Custodia per materasso a depressione

Sacca in nylon di colore rosso o blu idonea per i materassi a depressione art.894, art.895, art.9114, art.894/SNOW e art. 891.

Dimensioni Art. 890-001: cm 93 x 63 x 16

Dimensioni Art. 890-001/B: cm 89 x 50 x 24

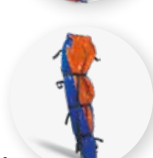

Art. 9100-001

CUSTODIA


Custodia per materasso a depressione pediatrico

Sacca in nylon di colore rosso idonea per i materassi a depressione pediatrici art.9100 e art.9102.

Dimensioni: cm 72 x 52 x 16



Pediatric

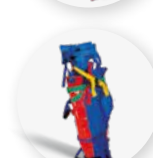

Art. 671-001

Art. 670-002

COVER

Cover traspirante antipolvere in nylon nero per sedie Extra

Dimensioni: cm 55 x 100 x 27 (L x A x P)



CUSTODIE PORTAOGGETTI



di serie
se si acquista
Art.9130



Art. 12024

CUSTODIA

Custodia vuota per fermacapo e cintura ragno

Pratica custodia in cordura con maniglia per l'alloggiamento di un fermacapo completo e una cintura ragno. Consente di ottimizzare lo spazio all'interno dell'ambulanza evitando il deterioramento del Velcro® dei blocchi del fermacapo e di avere sempre un kit immobilizzazione pronto all'uso. Utilizzabile anche per lo stivaggio degli Art. 9128 e 9130. FERMACAPO E CINTURA RAGNO NON INCLUSI.

Dimensioni: cm 42 x 30 x 14

Art. 12034

CUSTODIA

Custodia rossa per BABY FIX e VACUUM BABY FIX

Pratica custodia in nylon rosso con maniglia e robusta cerniera a doppia zip per l'alloggiamento dei dispositivi di trasporto pediatrico "Baby Fix" e "Vacuum Baby Fix", consentendo di ottimizzare lo spazio all'interno dell'ambulanza. BABY FIX E VACUUM BABY FIX NON INCLUSI.

Dimensioni: cm 41 x 26 x 13



Pediatric

TASCA PORTAOGGETTI

TASCA PORTAOGGETTI MULTIUSO
PER BARELLE AUTOCARICANTI



Art. 12025

TASCA PORTAOGGETTI

Tasca portaoggetti multiuso per barelle autocaricanti

Tasca portaoggetti in nylon antistrappo da applicare sotto lo schienale di tutte le barelle autocaricanti MeBer. È composto da una tasca chiusa con una cerniera per i piccoli oggetti, e da una tasca più grande aperta per i documenti, si fissa con pratici cinturini in Velcro® al tubo del carrello della barella.

Dimensioni: cm 50 x 37



COVER OX

PORTABOMBOLE PROFESSIONALI

Realizzati con materiale ad alta resistenza, lavabile e antistrappo, questi dispositivi sono dotati di due maniglie rigide in gomma e di due basi con spessori in materiale plastico zigrinato che ne permettono l'utilizzo sia in posizione verticale che in orizzontale. Sono provvisti anche di una comoda tracolla imbottita per agevolare il trasporto e di 2 moschettoni ausiliari. I sei occhielli disposti su tre lati rappresentano un comodo passaggio per il tubo dell'ossigeno. Una grande tasca centrale permette il posizionamento delle diverse misure di mascherine per ossigenoterapia e del tubo prolunga per ossigeno. Due passanti con ganci in plastica consentono il fissaggio della custodia a qualsiasi barella autocaricante. Dotate di robuste cerniere, sono presidi sicuri, facili da pulire e creati per durare nel tempo.

Art. 12072/BR (rosso)

Art. 12072/BG (giallo)

COVER OX 5

Portabombola professionale per bombole da lt 5

Portabombola professionale per bombole da litri 5, di colore blu con profili gialli e logo giallo oppure blu con profili rossi e logo arancio.

Dimensioni: cm (LxHxP) 67 x 22 x 24

Peso: kg 1,2



Art. 12070/BR (rosso)

Art. 12070/BG (giallo)

COVER OX 2-3

Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3

Portabombola professionale per bombole da litri 2 e 3, di colore blu con profili gialli e logo giallo oppure blu con profili rossi e logo arancio.

Dimensioni: cm (LxHxP) 60 x 22 x 21

Peso: kg 1,1



IMMOBILIZZAZIONE



Tavole spinali



Fermacapo



**Materassi
a depressione**



Steccobende



Collari cervicali



**Immobilitizzatori
spinali**

La gestione del paziente traumatico è sempre critica e in particolare la fase di immobilizzazione. Grazie a prodotti di qualità è possibile effettuare una rapida ed efficace stabilizzazione delle condizioni, arrivando a garantire che il quadro evolutivo non subisca alterazioni durante la fase di trasporto. A fianco delle tradizionali tavole spinali Galaxy, sempre apprezzate per la loro semplicità e qualità costruttiva, numerosi prodotti innovativi completano la gamma immobilizzazione di MeBer, in particolare per coprire le esigenze del trauma pediatrico.

ZIONE



Scopri la gamma
Immobilizzazione sul sito
Me.Ber. Inquadra con il tuo
tablet o smartphone per
andare alla pagina dedicata
sul sito. Potrebbe richiedere
un'applicazione gratuita non
installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/immobilizzazione.aspx>



GALAXY




Trauma

TAVOLE SPINALI PER ADULTI



Art. 9010 (gialla)

Art. 9012 (arancio)

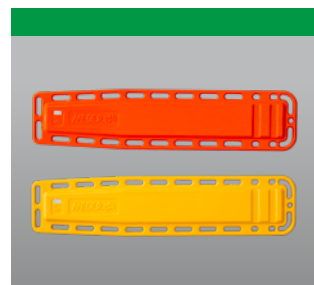

GALAXY

Tavola spinale gialla e arancio

Tavola spinale realizzata con materiale plastico ad alta resistenza. È stata progettata prestando particolare attenzione alle difficoltà che si incontrano durante gli interventi quotidiani; sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella parte d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono

ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. È dotata di 20 maniglie per il trasporto ed è completa di 3 cinture a sgancio rapido (art. 605/MEB). È traslucante ai raggi X. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865.**



ACCESSORI

Art. 12144/N

**Custodia per
tavola spinale**



Art. 690

SPIDER

Cinture di immobilizzazione per spinale

Questo sistema di cinture permette di immobilizzare completamente il paziente. Grazie alle cinture trasversali scorrevoli e ai bloccaggi in Velcro® può essere usato facilmente su qualsiasi tavola spinale e per tutti i pazienti.



Art. 629

JELLY

Fermacapo standard rosso per tavola spinale

Adattabile a tutti i modelli di tavole spinali, realizzato con cellule di materiale espanso e ricoperto con sistema vinilico.



Art. 629/SLIM

JELLY SLIM

Fermacapo rosso con base slim nera per tavola spinale



Art. 629-007

Tavola nera Slim per fermacapo art. 629

Tavola nera Slim ribassata in PVC per fermacapo art. 629, fornita completa di cinturini



Vedi pagina 104
FERMACAPO

Ai raggi X le tavole Galaxy lasciano un'ombra solo longitudinalmente, lasciando la possibilità di effettuare gli esami radiografici senza spostare il paziente. La posizione dei rinforzi interni delle tavole è stata studiata per non intralciare la lettura di lesioni agli organi principali e allo scheletro.

Elevata radiotrasparenza



Art.	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Portata
9010	■	183 cm	41 cm	5 cm	5,5 kg	150 kg
9012	■					



Pediatric



Trauma

TAVOLE SPINALI PEDIATRICHE



Art. 9022 (gialla)

Art. 9024 (arancio)

DUCK

Tavola spinale pediatrica gialla e arancio

Progettata per l'immobilizzazione e il trasporto di bambini con **altezza sino a 120 cm**, è stata realizzata con materiale plastico ad alta resistenza e studiata prestando attenzione alle problematiche che si incontrano durante gli interventi quotidiani: sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo, che permettono ai cinturini a

strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. È dotata di 10 maniglie per il trasporto. Permette la diagnostica preliminare con raggi X e può essere fornita in 2 diverse colorazioni, gialla e arancio. Non viene fornita di serie con cinture.

Art.	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Portata
9022		125 cm	41 cm	5 cm	3,7 kg	100 kg
9024						

→ ACCESSORI



Art. 692

SPIDER BABY Cinture di immobilizzazione per spinale pediatrica


Sistema di cinture che permette di immobilizzare completamente il paziente pediatrico sulla tavola "DUCK". Grazie alle cinture trasversali scorrevoli e ai bloccaggi a strappo può essere adattato facilmente a tutti i pazienti.



Pediatric Trauma



Vedi pagina 95
della categoria
Accessori

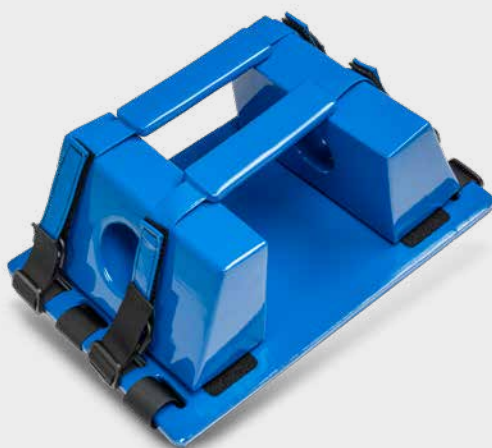

Art. 627

KIDS Fermacapo pediatrico imbottito

Fermacapo imbottito per tavola spinale pediatrica, realizzato con materiale espanso a cellule chiuse e ricoperto con sistema vinilico esclusivo.



Pediatric Trauma

Art. 629

JELLY

Fermacapo standard rosso per tavola spinale

Adattabile a tutti i modelli di tavole spinali, realizzato con cellule di materiale espanso e ricoperto con sistema vinilico.



Art. 629 /SLIM

NEW ★

JELLY SLIM

Fermacapo rosso con base slim nera per tavola spinale



Art. 627

KIDS

Fermacapo pediatrico imbottito

Fermacapo imbottito per tavola spinale pediatrica, realizzato con materiale espanso a cellule chiuse e ricoperto con sistema vinilico esclusivo.



Art. 9150

X-LOCK

Fermacapo ergonomico per barella Ergon



Fermacapo dal design innovativo, costituito da un unico elemento, con cinghia di fissaggio integrata, permette in pochi secondi il fissaggio del capo direttamente alla barella. Realizzato con poliesteri accoppiati e poliuretani espansi a BI- densità.



Art. 670-001

Fermacapo in nastro arancio/nero per sedia scendiscala Extra



NEW ★

Art. 629-007

Tavola nera Slim per fermacapo art. 629



La base nera SLIM è una tavola ribassata in PVC progettata per agevolare lo stivaggio della tavola spinale nel supporto dell'ambulanza anche con il fermacapo installato.

Grazie al suo profilo sottile, risolve in modo efficace le problematiche di ingombro riscontrate con le basi tradizionali. È fornita completa di cinturini per un fissaggio sicuro e stabile del fermacapo alla tavola spinale.



Art. 624

DOUBLE

Fermacapo per barelle a cucchiaio

Fornito con i tradizionali blocchi rigidi laterali. Dotato di cinturini di fissaggio a strappo imbottiti, è realizzato con materiale espanso a cellule chiuse e verniciato con un prodotto non assorbente e inattaccabile da batteri.



TAVOLE SPINALI

CON PINS



Trauma

ACCESSORI

Art. 574



Cintura blu 2 pz. con moschettoni

Art. 12144/N



Custodia per tavola spinale

Art. 9040 (gialla)

Art. 9042 (arancio)

GALAXY-P

Tavola spinale gialla e arancio con pins

Tavole spinali con le stesse caratteristiche delle "Galaxy" Art. 9010 e 9012, dotate di 10 PINS in plastica utili per fissaggio rapido di sistemi di trattenuta con moschettoni. Fornita con 3 cinture (art. 605/MEB).

Art.	Colore	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Portata
9040		183 cm	41 cm	5 cm	5,8 kg	150 kg
9042						



Art. 9050

NILIX

Tavola spinale gialla basic con pins

Tavola spinale basica in materiale plastico ad alta densità, dotata di 8 PINS. La tavola spinale è fornita di 3 cinture di serie.

Art.	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Portata
9050	183 cm	40 cm	5 cm	6,5 kg	150 kg



MATERASSI A DEPRESSIONE



Vista parte
esterna



Art. 9104

NAXOS

Materasso a depressione senza camere

Materasso a depressione senza camere blu e arancio.

Dimensioni: cm 200 x 80

Peso: kg 6



ACCESSORI

Art. 9104-001

Custodia blu per materasso a depressione senza camere "Naxos"






Trauma



Art. 894-001

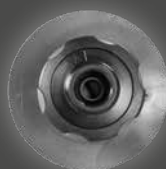

Valvola di aspirazione per materassi a depressione e steccobende a depressione

Art. 890-001 (rossa)
Art. 890-001/B (blu)



Custodia per materasso a depressione
Dimensioni rossa:
cm 93 x 63 x 16
Dimensioni blu:
cm 89 x 50 x 24


NEW ★



Vista parte esterna



Vista parte interna

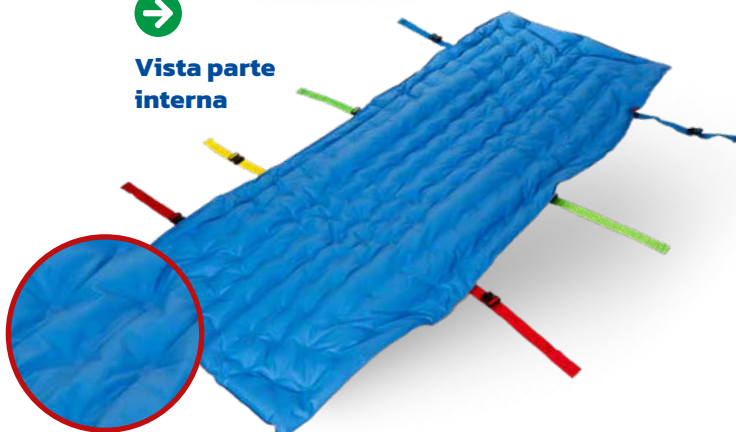

Art. 9114

CHESTERFIELD

Materasso a depressione a camere indipendenti con saldature centrali

Chesterfield materasso a depressione a camere indipendenti con saldature centrali.

Compatibile con diagnostica a raggi X, TC, RM.

Dimensioni: cm 210 x 100


Peso: kg 7,8

MATERASSI A DEPRESSIONE



Art. 894-001

Valvola di aspirazione per materassi a depressione e steccobende a depressione

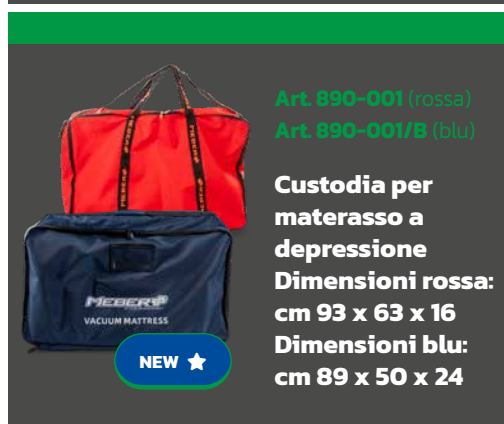

Art. 890-001 (rossa)
Art. 890-001/B (blu)

Custodia per materasso a depressione
Dimensioni rossa:
cm 93 x 63 x 16
Dimensioni blu:
cm 89 x 50 x 24

NEW ★

Art. 894

SNAKE

Materasso a depressione a camere indipendenti

Materasso a depressione con 14 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Snake" dotazioni uniche. Utilizzabile da - 30°C a + 70°C. La tenuta della depressione per lungo tempo senza alcuna flessione e la conformità alla normativa europea UNI EN 1865, secondo gli standard armonizzati europei, completano le caratteristiche di questo dispositivo. Compatibilità per esami RX, CT e MRI.

Dimensioni: cm 210 x 100

Peso: kg 8





Trauma



Art. 895

SNAKE PLUS

Materasso a depressione a camere indipendenti con fermacapo integrato

Materasso con fermacapo integrato per una veloce immobilizzazione del capo, realizzato in poliuretano con trattamento ritardante alla fiamma, conforme alla normativa europea UNI EN 1865, con 14 camere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. Utilizzabile da - 30°C a + 70°C. Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, rinforzate e imbottite, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso prestazioni uniche. Compatibilità per esami RX, CT e MRI.

Dimensioni: cm 210 x 100

Peso: kg 8,3



ACCESSORI

Art. 888

Pompa di aspirazione in alluminio

Pompa di aspirazione per materassi realizzata in alluminio con supporto per il piede per facilitare l'aspirazione.



Art. 896/DF

Pompa di aspirazione in abs

Pompa di aspirazione in ABS per materassi, usata per aspirare o gonfiare. Completa di raccordi.



MATERASSI A DEPRESSIONE

PEDIATRICI



Art. 9100

BUNNY

Materasso pediatrico a depressione a camere indipendenti

Materasso in poliuretano con trattamento ritardante alla fiamma, con 14 camere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. Utilizzabile da - 30°C a + 70°C. Estrema leggerezza e robustezza, 4 maniglie ergonomiche, rinforzate ed imbottite, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Bunny" prestazioni uniche. Compatibilità per esami RX, CT e MRI.

Dimensioni: cm 120 x 70

Peso: kg 3



Pediatric



Trauma



Art. 9102

BUNNY PLUS

Materasso pediatrico a depressione a camere indipendenti con fermacapo integrato

Materasso con fermacapo integrato per una veloce immobilizzazione del capo, realizzato in poliuretano con trattamento ritardante alla fiamma, con 14 camere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. Utilizzabile da - 30°C a + 70°C. Estrema leggerezza e robustezza, 4 maniglie ergonomiche, rinforzate e imbottite, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Bunny Plus" prestazioni uniche. Compatibilità per esami RX, CT e MRI.

Dimensioni: cm 120 x 70

Peso: kg 3,5



ACCESSORI

Art. 888

Pompa di aspirazione in alluminio

Pompa di aspirazione per materassi realizzata in alluminio con supporto per il piede per facilitare l'aspirazione.



Art. 896/DF

Pompa di aspirazione in abs

Pompa di aspirazione in ABS per materassi, usata per aspirare o gonfiare. Completa di raccordi.



MATERASSI A DEPRESSIONE



Art. 894/SNOW

SNAKE SNOW

Materasso a depressione a camere indipendenti con dispositivi antiscivolo per neve

Materasso a depressione con 14 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. Completo di dispositivo antiscivolo per soccorso su neve e ghiaccio. Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso "Snake" dotazioni uniche. Utilizzabile da -30°C a +70°C. La tenuta della depressione per lungo tempo senza alcuna flessione, la conformità alla normativa europea UNI EN 1865, secondo gli standard armonizzati europei, completano le caratteristiche di questo dispositivo.

Dimensioni: cm 210 x 100

Peso: kg 8,9

ACCESSORI

Art. 888

Pompa di aspirazione in alluminio

Pompa di aspirazione per materassi realizzata in alluminio con supporto per il piede per facilitare l'aspirazione.



Art. 896/DF

Pompa di aspirazione in abs

Pompa di aspirazione in ABS per materassi, usata per aspirare o gonfiare. Completa di raccordi.



Art. 890-001 (rossa)

Art. 890-001/B (blu)

Custodia per materasso a depressione

Dimensioni rossa: cm 93 x 63 x 16

Dimensioni blu: cm 89 x 50 x 24





Trauma



Art. 891

FLAKE

Materasso a depressione a camere indipendenti

Materasso a depressione con 3 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. Estrema leggerezza e robustezza, 8 maniglie, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al materasso dotazioni uniche. Tenuta della depressione per lungo tempo senza alcuna flessione.

Dimensioni: cm 200 x 90

Peso: kg 6,7



ACCESSORI

Art. 888

Pompa di aspirazione in alluminio

Pompa di aspirazione per materassi realizzata in alluminio con supporto per il piede per facilitare l'aspirazione.



Art. 896/DF

Pompa di aspirazione in abs

Pompa di aspirazione in ABS per materassi, usata per aspirare o gonfiare. Completa di raccordi.



Art. 890-001 (rossa)

Art. 890-001/B (blu)

Custodia per materasso a depressione


Dimensioni rossa: cm 93 x 63 x 16

Dimensioni blu: cm 89 x 50 x 24



Art. 894-001

Valvola di aspirazione per materassi a depressione e steccobende a depressione

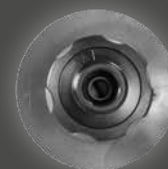

BABY FIX



Pediatric



Trauma

SISTEMA DI FISSAGGIO PEDIATRICO
CON MATERASSO A DEPRESSIONE

Art. 9130

MEBER BABY FIX

**Sistema di fissaggio con cinture per trasporto bambini
in ambulanza completo di custodia rossa**

MeBer Baby Fix è un dispositivo di trasporto pediatrico universale, adattabile a qualsiasi modello di barella, tramite 6 cinghie di ancoraggio. Idoneo per neonati e bambini fino a 130 cm e 35 kg, consente un trasporto sicuro

grazie al sistema di trattenuta a 5 punti. Fornito completo di custodia art.12034. Conforme ai requisiti UNI EN 1789.

Lunghezza: cm 74

Larghezza testa: cm 39

Larghezza piedi: cm 20



Art. 9128

MEBER VACUUM BABY FIX

**Materassino a depressione per sistema di fissaggio
con cinture per trasporto bambini in ambulanza**

MeBer Vacuum Baby Fix è un materassino a depressione utilizzabile abbinato all'Art 9130. Estrema leggerezza e robustezza, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità

del paziente conferiscono al materasso 9128 dotazioni uniche. Certificato UNI EN 1789, radiotrasparente, amagnetico.

Dimensioni: cm 79 x 45

**Esclusiva
MeBer**



ACCESSORI

Art. 12034

**Custodia rossa per VACUUM BABY FIX e
accessorio di serie dell'art. 9130 BABY FIX**



STECCOBENDE



Trauma



Art. 431

Set steccobende rigide con custodia



Pediatric

Art. 429

Steccobenda rigida per arti pediatrici

NEW ★



Art. 425

Steccobenda rigida per arti inferiori adulto



Pediatric

Art. 427

Steccobenda rigida per arti superiori adulto/arti inferiori pediatrica

Art. 425 - 427 - 429 - 431

ARCOS

Steccobende rigide

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Dotate di 4 chiusure a Velcro® a lunghezza differenziata, permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza; appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba, sono complete di supporto piede integrato.

Disponibili in 3 misure

Gamba adulto: lunghezza 74 cm, base d'appoggio 13 cm

Braccio adulto / Gamba pediatrico: lunghezza 52 cm, base d'appoggio 9 cm

Arto pediatrico: lunghezza 30 cm, base d'appoggio 9 cm



Art. 425 Steccobenda per gamba adulto

Art. 427 Steccobenda per braccio adulto/ gamba pediatrica

Art. 429 Steccobenda per arti pediatrici

Art. 431 Set 3 steccobende con custodia

STECCOBENDE



Art. 886



Art. 880



Art. 884



Art. 882

Art. 880 - 882 - 884 - 886

HALLEY

Steccobende

Realizzate con materiali di assoluta affidabilità che permettono di immobilizzare perfettamente gli arti inferiori e superiori aspirando l'aria interna, sono dotate di valvola di aspirazione posta all'esterno per non causare disturbo al paziente. È possibile ordinare le steccobende sfuse, oppure il set composto da steccobenda a depressione per braccio, gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in nylon. Tutte le steccobende sono radiotrasparenti.

ACCESSORI



Art. 889

Pompa in alluminio piccola

Art. 894-001

Valvola di aspirazione per materassi a depressione e steccobende a depressione

Art. 880 Steccobenda per gamba

Art. 882 Steccobenda per braccio

Art. 884 Steccobenda per avambraccio

Art. 886 Set 3 steccobende con custodia e pompa



Trauma



Art. 9160

STECCOBENDA A DEPRESSIONE

Steccobenda a depressione per gamba con 16 camere indipendenti

Per una perfetta e veloce immobilizzazione.
Dotata di valvola interna completa di raccordi.



Art. 9162

STECCOBENDA A DEPRESSIONE

Steccobenda a depressione per braccio con 14 camere indipendenti

Per una perfetta e veloce immobilizzazione.
Dotata di valvola interna completa di raccordi.



Art. 9164

NEW ★

STECCOBENDA A DEPRESSIONE

Steccobenda a depressione multicamera 35x50 cm

Per una perfetta e veloce immobilizzazione.
Dotata di valvola interna completa di raccordi.



Art. 9168

NEW ★

SET STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Set 3 steccobende a depressione (artt. 9160-9162-9164) e pompa con custodia

STECCOBENDE



Art. 405 - 407 - 410 - 412 - 415 - 417

NEOFIX

Steccobende in neoprene

Steccobende rigide flessibili realizzate in neoprene e complete di un'anima di alluminio che può essere modellata secondo le necessità che si presentano durante le operazioni di soccorso. L'anima di alluminio può essere rimossa per garantire una pratica sanificazione. Lo speciale prodotto usato per la realizzazione permette di mantenere la temperatura corporea costante, di adattare le steccobende ad ogni tipo di arto e di pulirle e disinfettarle con molta facilità. Sono disponibili 5 diverse misure: gamba, braccio, avambraccio, polso e caviglia/gomito.

Art. 405 Steccobenda per gamba

Art. 407 Steccobenda per braccio

Art. 410 Steccobenda per avambraccio

Art. 412 Steccobenda per polso

Art. 415 Steccobenda per caviglia/gomito

Art. 417 Set 5 steccobende con custodia



Art. 722

AIR SPLINT

Set 6 steccobende pneumatiche con custodia e pompa

Set di steccobende pneumatiche realizzate in materiale plastico comprendente: custodia, pompa, steccobende per mano/polso, braccio, avambraccio, piede e gamba corta, gamba lunga.



COLLARI CERVICALI



Pediatric

Art. 9200
INFANT



Pediatric

Art. 9202
PEDIATRIC

Art. 9204
NECKLESS

Art. 9206
SHORT

Art. 9208
REGULAR

Art. 9210
TALL

GEMINI

Collare cervicale rigido 2 pz

Il collare cervicale GEMINI è uno strumento altamente professionale e indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz, si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di un foro centrale per l'effettuazione di una eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo. È realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure con rivestimento in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.

Art.	Taglia	Composizione	pz. per confezione	
9213	Set 3 misure	9204 + 9206 + 9208	3	con custodia
9214	Set 4 misure	9204 + 9206 + 9208 + 9210	4	con custodia
9216	Set 6 misure	9200 + 9202 + 9204 + 9206 + 9208 + 9210	6	con custodia



Pediatric

Art. 9220
INFANT



Pediatric

Art. 9222
PEDIATRIC



Art. 9224
NECKLESS



Art. 9226
SHORT



Art. 9228
REGULAR



Art. 9230
TALL

ARTIS

Collare cervicale rigido 1 pz

Collare cervicale rigido a 1 pz realizzato in polietilene stampato colorato per contraddistinguere le varie misure e rivestimento interno in schiuma lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

Art.	Taglia	Composizione	pz. per confezione	
9233	Set 3 misure	9224 + 9226 + 9228	3	con custodia
9234	Set 4 misure	9220 + 9224 + 9226 + 9228	4	con custodia
9236	Set 6 misure	9220 + 9222 + 9224 + 9226 + 9228 + 9230	6	con custodia

COLLARI CERVICALI ED ESTRICAZIONE



ANTARES

Collare cervicale rigido 2 pz


Il collare cervicale ANTARES è uno strumento altamente professionale e indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz, si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di foro centrale per tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo realizzate in diversi colori per contraddistinguere le varie misure. È realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.

Art.	Taglia	Composizione	pz. per confezione	
853	Set 3 misure	844 + 846 + 848	3	con custodia
854	Set 4 misure	842 + 844 + 846 + 848	4	con custodia
856	Set 6 misure	840 + 842 + 844 + 846 + 848 + 850	6	con custodia

SIRIUS

Collare cervicale rigido 1 pz

Collare cervicale rigido a 1 pz realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotato di chiusure regolabili a strappo colorate per contraddistinguere le varie misure, è provvisto di foro centrale per la tracheotomia. Disponibile in 6 diverse misure.

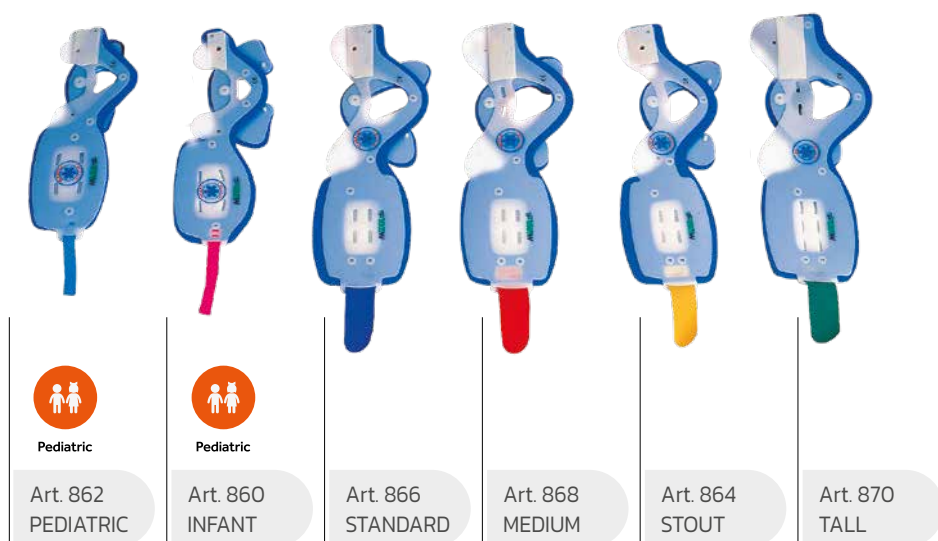

Art.	Taglia	Composizione	pz. per confezione	
873	Set 3 misure	864 + 866 + 868	3	con custodia
874	Set 4 misure	862 + 864 + 866 + 868	4	con custodia
876	Set 6 misure	860 + 862 + 864 + 866 + 868 + 870	6	con custodia



Trauma

Art. 836

PATRIOT

Collare cervicale regolabile

Collare cervicale regolabile in 4 differenti altezze. Strumento ideale per chi vuole avere, con un unico articolo, diverse possibilità di immobilizzazione, è stato sviluppato per un utilizzo nell'emergenza medica. È dotato di supporto per il mento preformato, clips di bloccaggio, pannello posteriore di ventilazione e apertura tracheale allargata. Il collare cervicale PATRIOT è realizzato con polietilene ad alta densità e imbottitura in materiale schiumato, il design piatto in un pezzo permette un efficiente posizionamento in spazi limitati. È radiotrasparente ai raggi X ed è facilmente lavabile e disinfettabile.



Art. 837



Pediatric

PATRIOT BABY

Collare cervicale regolabile pediatrico

Stesse caratteristiche tecniche del collare per adulti, il PATRIOT BABY è il collare cervicale pediatrico regolabile in 3 differenti altezze.

Art. 9124/B

IMMOBILIZZATORE SPINALE

Immobilizzatore spinale standard colore blu

Presidio essenziale per immobilizzare ed estrarre un paziente in tutta sicurezza. È prodotto in nylon e vinile. Completo di cuscino imbottito, 2 cinturini e borsa da trasporto.

Peso: kg 2,9



Art. 9120



Pediatric

MED PED

Immobilizzatore spinale pediatrico in PVC

L'immobilizzatore spinale "MED PED" è ideale per l'immobilizzazione e l'estrazione di un paziente bloccato in situazioni di difficile emergenza quali ad esempio gli incidenti stradali. Grazie alla sua forma e alla sua struttura avvolgente, permette di bloccare in senso verticale e orizzontale la testa e la colonna vertebrale per limitare al minimo tutti i traumi che possono derivare da un spostamento non corretto del paziente. È prodotto in PVC e dotato di fibbie e cinture colorate per un facile uso, di un cuscinetto imbottito e due cinturini a strappo per la fronte e il mento. È completo di custodia per il trasporto.

Peso: kg 2. Peso senza custodia: kg 1,7



DIAGNOSTICA



**Misuratori
di pressione**



Stetofonendoscopi




Defibrillatori



Pulsossimetri

La gamma diagnostica comprende sia i dispositivi più tradizionali come fonendoscopi e sfigmomanometri che monitor multiparametrici e pulsossimetri, oltre ai defibrillatori semiautomatici TecnoHeart. Oltre l'evidente importanza per la valutazione dei parametri del paziente o, nel caso dei defibrillatori, del ruolo salvavita che possono avere, i prodotti della linea diagnostica sono un'importante interfaccia con i pazienti attraverso la quale il paziente percepisce la professionalità degli operatori.

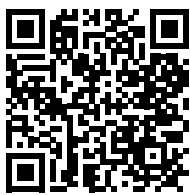


Scopri la gamma diagnostica sul sito Me.Ber. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/diagnostica.aspx>

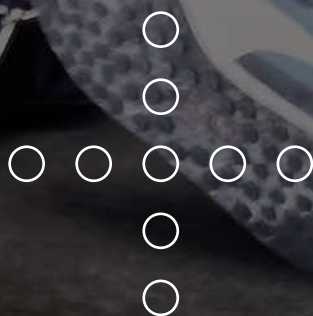

SFIGMO- MANOMETRI

Art. 8006

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide

Scala 0-300 mmHg. Zero flottante. Manometro in acciaio. Tolleranza ± 3 mmHg. Completo di bracciale adulto in nylon con chiusura Velcro® e anello in metallo. Fornito in custodia con cerniera.



Art. 8008

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide palmare

Manometro Ø 60 mm con corpo in ABS antiurto, scala 0-300 mmHg. Zero flottante. tolleranza ± 3 mmHg. Completo di bracciale adulto in nylon con chiusura Velcro® e anello in metallo, monopalla in TPV corrugato per una migliore presa e valvola di sfato cromata. Fornito in custodia con cerniera.



Art. 8012

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide palmare plus rosso

Manometro Ø 48 mm. Sfigmomanometro di precisione con anello protettivo e valvola di deflazione estremamente sensibile. Alluminio anodizzato.



Art. 8014

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide compatto

Il manometro costruito artigianalmente presenta ottime finiture, i componenti che lo costituiscono sono stati ottenuti da soluzioni avanzate. Il movimento tedesco è ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. Il vetro in policarbonato resiste all'alcool e alle sollecitazioni meccaniche. La valvola di scarico facilmente azionabile è molto sensibile. Il polmone è in gomma. Il bracciale in cotone è robusto e anallergico. Il manometro posizionato sul bracciale risulta essere più protetto da eventuali cadute e colpi accidentali. L'apparecchio risponde alle norme EN 1060-1 ed EN 1060-2.



Art. 8004

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide colorato con custodia

Scala 0-300 mmHg. Zero flottante. Manometro in lega leggera. Tolleranza ± 3 mmHg. Completo di bracciale adulto in nylon con chiusura Velcro® e anello in metallo, monopalla in gomma e valvola di sfogo cromata. Fornito in custodia con cerniera.




Pediatric

Art. 8009

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide palmare antiurto bambini

Scala 0-300 mmHg. Zero flottante. Manometro in acciaio. Tolleranza ± 3 mmHg. Completo di bracciale pediatrico in nylon con chiusura Velcro® e anello in metallo. Fornito in custodia con cerniera.

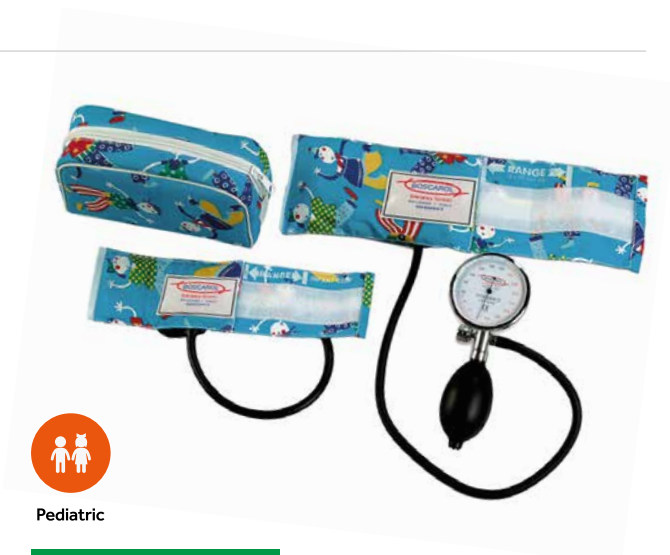

Pediatric

Art. 8011

SFIGMOMANOMETRO

Set sfigmomanometro pediatrico e neonatale

Set sfigmomanometro completo di n. 1 bracciale neonatale e n. 1 bracciale pediatrico con borsina colorata.

SFIGMO- MANOMETRO DA PARETE



Art. 1740

SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro aneroide da parete rotondo girevole

Sfigmomanometro a quadrante rotondo, di facile lettura ideale per ambulanze o ambulatori medici. Girevole fino a 65° in entrambe le direzioni, cesto per bracciale spazioso per custodire gli accessori, tubo spiralato estensibile fino a 3 m, monopalla e valvola di sfogo cromata, grande quadrante diam. 147 mm, membrana in rame-berillio indurita speciale, bracciale calibrato Velcro® nylon e camera d'aria a 2 tubi.

ACCESSORI



Pediatric



Art. 1740-001

Bracciale pediatrico per sfigmomanometro aneroide da parete Art. 1740.

Bracciali adulto



Art. 8140

1 tubo



Art. 8141

2 tubi

Bracciali bambini



Art. 8142

1 tubo



Pediatric



Art. 8143

2 tubi



Pediatric

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO



Art. 8534

BPi1 CLASSIC

Misuratore di pressione automatico con bracciale adulti

Dispositivo medico semplice da usare, accurato e affidabile per la misurazione della pressione arteriosa al braccio.

Il dispositivo ha come accessori una serie di bracciali di differenti misure, in base alla circonferenza del braccio ed è, inoltre, possibile utilizzare i bracciali preformati «Easy», facili da indossare e confortevoli.

Dispositivo è conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC.

Dimensioni	124 x 92 x 61 mm
Peso	251 g
Condizioni di stoccaggio	-20 - +55 °C / -4 - +131 °F 15-95% umidità relativa max.
Condizioni di esercizio	10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15-95% umidità relativa max.
Range di misurazione	20 - 280 mmHg - pressione arteriosa / 40 - 200 battiti al minuto - pulsazioni
Memorie	ultime 30 misurazioni
Alimentazione	4 x batterie da 1,5 Volt; tipo AA



ACCESSORI

Art. 8534-001

Bracciale pediatrico
TAGLIA S 17-22 cm.



Pediatric



Art. 8534-002

Bracciale standard
TAGLIA M-L 22-42 cm



Art. 8534-003

Bracciale obesi
TAGLIA L-XL 32-52 cm



Bariatric



Art. 8536

Cavo alimentazione 220V per misuratore di pressione "AUTOMATIC BASIC"

FONENDOSCOPI, STETOFONENDO- SCOPI E TERMOMETRI IR



Art. 8030/B

RAPPAPORT

Stetofonendoscopio blu

Stetofonendoscopio professionale, grazie agli accessori in dotazione si possono identificare diversi tipi di auscultazione. È completo di tubo gemellare, testa in metallo, padiglioni ruotanti per le 2 funzioni, 3 campane di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive rigide e 2 membrane.

Art. 8020/G



Art. 8020/R


Art. 8020

FONENDO- SCOPIO

Fonendoscopio piatto

Fonendoscopio piatto con testa diametro 46 mm in alluminio, ghiera filettata per il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato, lunghezza 150 mm. Tubo ad Y in gomma in un solo pezzo, diametro 5 mm con lunghezza 60 cm. Confezione in scatola di cartone singola. Disponibile in 3 diversi colori.

Art. 8025/N

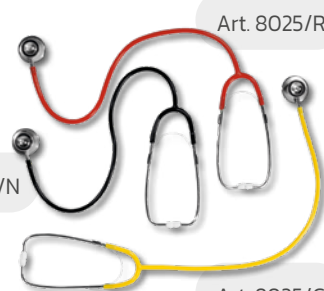

Art. 8025/R

Art. 8025/G

Art. 8025

STETOFONENDO- SCOPIO

Stetofonendoscopio piatto

Stetofonendoscopio con testa diametro 47/31 mm. Testa in alluminio, archetto in metallo cromato, tubo ad Y in gomma in un solo pezzo. Raccordo ruotante per le due funzioni. Disponibile in 3 diversi colori.

Art. 8377

INFRARED

Termometro ad infrarossi

Termometro a infrarossi per la misurazione veloce, precisa e affidabile della temperatura corporea senza il contatto con la superficie di misurazione. Dispositivo semplice, intuitivo e igienico, garantisce misurazioni stabili e libere da interferenze della temperatura. Dispositivo conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE – DM Classe IIa.



Range di misurazione	Modalità corporea: 32÷43 °C / 89,6÷109,4 °F
	Modalità superfici: 0÷60 °C / 32÷140 °F
	Modalità stanza: 0÷40 °C / 32÷104 °F
Condizioni di utilizzo	Temperatura ambiente 10÷40 °C / 50÷104 °F Umidità relativa ≤ 85%
Distanza di misurazione	3 ÷ 5 cm (1,2 ÷ 2 pollici)
Tempo di risposta	1 secondo
Memorie	32 misurazioni
Batteria	2 x 1,5 V tipo AA
Dimensioni	100 x 40 x 155 mm
Peso	105 g (senza batterie)

MONITOR TG

Art. 8540

MONITOR TG

Monitor multiparametrico

Il monitor è uno strumento professionale, corredato di accessori e circuiti con doppia funzione di diagnosi e monitoraggio. Permette la rilevazione di diversi parametri vitali, che possono essere rilevati singolarmente o in contemporanea. Funzioni:

- Monitor multiparametrico, con indicazione numerica e tracciato
- Funzionante con batteria e rete – Alimentazione: 100 ÷ 240 V ca, 50 ÷ 60 Hz. È inoltre dotato di batteria per consentire la continuità di utilizzo senza alimentazione esterna (fino a 4 ore con la batteria standard)
- Completo di stampante integrata
- Attacco a rete per gestione a distanza
- Regolazione e impostazione parametri
- Monitor 10 pollici

5 parametri:

- ✓ Ecg 5 canali 2 tracce
- ✓ Pressione sistolica/diastolica/media
- ✓ Battito cardiaco
- ✓ Pulsiossimetro
- ✓ Controllo respiro
- ✓ Temperatura a doppia sonda



DI SERIE

Art. 8540-001

Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti



Art. 8540-002

Bracciale per adulti 27-35 cm



ACCESSORI



Art. 8540-003

Bracciale NIBP pediatrico 16-21,5 cm



Pediatric



Art. 8540-004

Bracciale NIBP neonatale 10 - 15 cm



Pediatric



Art. 8540-005

Batteria ricaricabile al litio per monitor TG



Art. 8540-006

Carta termica millimetrata

TECNOHEART PLUS AED

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Dimensioni	240 x 294 x 95 mm
Peso	2,65 kg
Lunghezza elettrodi	180 cm
Livelli di energia	Adulto 185-200 J ($\pm 5\%$) Pediatrico 45-50 J ($\pm 5\%$)
Durata batteria	200 scariche / 10 h funzionamento
Batteria	LiMnO2(15V-4200mAh)



Art. 8440

TECNOHEART PLUS AED

Defibrillatore semiautomatico

I defibrillatori AED oggi in commercio sono prevalentemente semiautomatici, pertanto vengono pilotati da comandi vocali e l'attivazione di scariche avviene con comando manuale azionato dall'operatore. Un'azione semplice e guidata.

Istruzioni vocali guidate

Seguendo i messaggi di testo e le istruzioni vocali, chiunque è in grado di utilizzare questo dispositivo salvavita.

Technoheart Plus caratteristiche principali

- ✓ Batteria LiMnO2 lunga durata: 5 anni, 200 scariche.
- ✓ Autotest componenti critiche: consentono il mantenimento efficiente della funzionalità dell'apparecchiatura
- ✓ Calcolo impedenza: verifica dell'integrità del contatto del AED con il paziente
- ✓ Software heart on: si usa per archiviare in modo organico i dati di utilizzo del AED oltre che consentire l'aggiornamento del firmware
- ✓ Elettrodi preconnessi: riducono le tempistiche di intervento

DI SERIE

Art. 8448

Custodia



Art. 8444

Batteria



Art. 8446

Coppia elettrodi adulti/bambini



- ✓ Porta comunicazione IRDA: consente la comunicazione pc – defibrillatore
- ✓ Energia variabile: adulto (>25 kg) da 185 a 200 J – bambino (<25 kg) da 45 a 50 J.
- ✓ Tecnologia bifasica: sistema più evoluto di attivazione e di alimentazione delle scariche
- ✓ Efficacia primo shock: certificato al 100%
- ✓ Media shock per paziente: 2.3
- ✓ Tempo di defibrillazione efficace: 55 sec

TECNOHEART TRAINER

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO



Art. 8442

TECNOHEART PLUS TRAINER

Defibrillatore semiautomatico

Il sistema di addestramento DAE è un simulatore per l'insegnamento delle tecniche di soccorso di base e delle corrette procedure di defibrillazione ad addetti al primo soccorso che usino DAE TecnoHeart Plus.

Il sistema di addestramento DAE Trainer:

- ✓ simula l'erogazione di scariche elettriche a basso voltaggio, permettendo di operare in sicurezza
- ✓ contiene 10 scenari di addestramento preconfigurati che simulano episodi realistici di arresto cardiaco improvviso
- ✓ può essere utilizzato con il telecomando a infrarossi per modificare gli scenari durante la fase di addestramento, in modo da verificare la reazione dello studente, e anche per simulare immediatamente il ritmo defibrillabile o il ritmo non defibrillabile.

Il software per PC permette di configurare degli scenari personalizzati. Per collegare il dispositivo alla porta seriale del PC, è necessario un normale cavo seriale D-sub 1:1 a 9 poli.

Dimensioni	314 x 259 x 109 mm
Peso	1,9 kg
Alimentazione	DC 10,8V / 2200mAh DV 15V / adattatore
Corrente statica	< 5µA
Corrente massima	< 500mA
Batteria	Batteria al litio ricaricabile a 3 celle

Condizioni operative

- ✓ Funzionamento: da 0 a 43°C (da 32 a 109,4°F)
- ✓ Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa)
- ✓ Altitudine: Da 0 a 4,475 m

Condizioni di stoccaggio

- ✓ Conservazione: da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)
- ✓ Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa)
- ✓ Altitudine: Da 0 a 12,192m


Telecomando

- ✓ Telecomando: DC 3V / Batterie a bottone
- ✓ Corrente statica: < 5µA
- ✓ Corrente massima: < 10mA

Lista dei componenti

- ✓ N° 1 Telecomando
- ✓ N° 1 Elettrodi da addestramento per adulti (utilizzabili 100 volte)
- ✓ N° 1 Manuale dell'operatore
- ✓ N° 1 Custodia (in Nylon)
- ✓ N° 1 Adattatore DC
- ✓ N° 1 CD Software DAE Trainer (Opzionale)

TECHE PER DEFIBRILLATORI

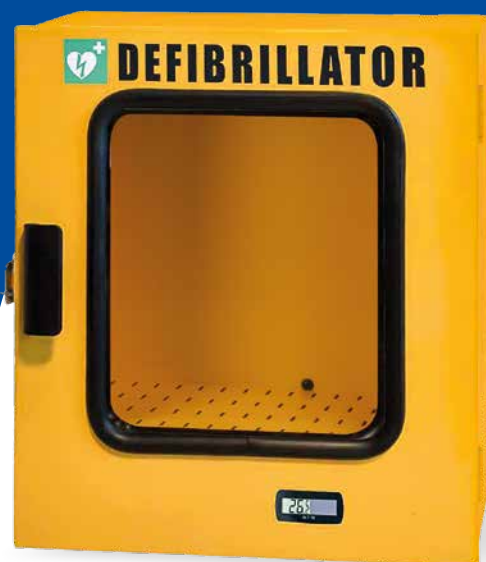

Art. 8398

TECA TERMOREGOLATA

Teca per defibrillatore termoregolata

Realizzata in acciaio al carbonio P02 con spessore 15/10, saldature a tenuta stagna, guarnizioni in battuta, porta a tenuta d'acqua e polvere con grado di protezione IP44 e chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi e con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti). Cerniere in resistente lega metallica anti strappo anti corrosione. Ripiano interno regolabile in altezza con grigliato per ricircolo dell'aria calda. Comoda maniglia in tecnopolimero per una facile apertura. Sensore a cristalli liquidi della temperatura interna, posizionato frontalmente.

Sistema di termoregolazione a resistenza elettrica con protettore termico 80°C, potenza 200W-230W, termostato ambiente +5°C/+20°C, isolato con cavo.

ATTENZIONE: TECHE NON ADATTE PER LOCALITÀ MARITTIME

Dimensioni esterne	425 x 480 x 215 mm (L x H x P)
Spazio interno	420 mm (L) - 390 mm (H)
Luce porta	365 mm (L) - 365 mm (H)
Peso	14,50 kg



Particolare display termostato

Art. 8396


TECA ALLARMATA E TERMOREGOLATA

Teca per defibrillatore da esterno allarmata termoregolata completa di unità di alimentazione

Caratteristiche principali come da Art.8398

Antifurto con sensore magnetico che attiva l'unità emettendo un suono di allarme forte quando avvengono prelievi non autorizzati. Sirena con alimentazione di 3 batterie tipo "LR44". Volume del segnale d'allarme 100 dB.

ATTENZIONE: TECHE NON ADATTE PER LOCALITÀ MARITTIME

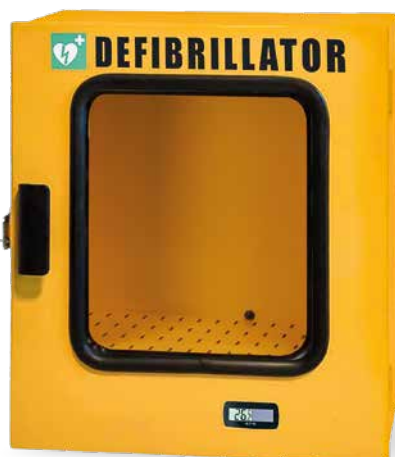



Art. 8432

TECA STANDARD

Teca di colore bianco mod. standard per defibrillatori AED

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossipoliesteri RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana (art. 8432-001).

Dimensioni esterne	452 x 425 x 160 mm (L x H x P)
Peso	6 kg

Art. 8432-001

PIEDISTALLO PER ART. 8432

Piedistallo per teca di colore bianco mod. standard art. 8432

Piantana per teca di colore bianco mod. standard (art. 8432), dotata di fori per fissaggio a pavimento e sistema a incastro e pre-foratura per agevolare eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. Verniciata a polvere di epossipoliesteri RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica a 180°C.

Dimensioni	250 x 1000 x 150 mm
Dimensioni base	300 x 150 mm
Peso	5 kg



Art. 8396-001

PIEDISTALLO PER ART. 8396 E 8398

Piedistallo per teca di colore giallo art. 8396 e 8398

Piantana per teca porta defibrillatore (art. 8396 ed art. 8398) di colore giallo, in acciaio al carbonio P02 spessore 7/10 verniciato a polvere in epossipoliesteri con fori di fissaggio a pavimento.

Dimensioni	270 x 800 x 120 mm
Dimensioni base	300 x 150 mm
Peso	4,5 kg



VITALTEST

PULSOSSIMETRO PALMARE

Art. 11200

VITAL TEST

Pulsossimetro palmare completo di sensore adulti

Vital Test è semplice e professionale, utilizzabile in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza, permette un monitoraggio immediato, preciso, non invasivo. Vital Test ha una forma piacevole ed ergonomica, facile da impugnare e trasportare. Permette di rilevare il valore di SpO₂, la frequenza cardiaca, la visualizzazione della forma d'onda e il valore trend degli ultimi 10 minuti di questi 2 parametri. L'alimentazione è con batteria ricaricabile.



DI SERIE



Art. 11206

Sensore adulti per Vital Test



Art. 11210

Custodia Vital Test

Dimensioni (LxAxP)	70x158x37 mm
Peso	250 g

ACCESSORI



Art. 11212

Sensore neonatale per Vital Test



Pediatric



Art. 11208

Sensore pediatrico per Vital Test



Pediatric



Art. 11204

Supporto per pulsossimetro studiato per essere fissato a parete o stativo.

OXYTEST E SATFINGER II

PULSOSSIMETRI PORTATILI

Dimensioni (LxAxP) 83x145x33 mm

Peso 240 g

Art. 11220

OXYTEST

Pulsossimetro portatile completo di sensore adulti, cavo USB e batterie a stilo AA

Oxytest è un pulsossimetro portatile facile da usare e leggero per il trasporto.

Grazie ai sensori art. 11224 ed art. 11222 (non inclusi nella confezione), è possibile utilizzare Oxytest anche per bambini e neonati.

- ✓ display Oled, quattro direzioni per visualizzare la saturazione arteriosa dell'ossigeno, la frequenza del polso e la forza della pulsazione
- ✓ indicatore di tensione della batteria
- ✓ standby o sospensione automatica

ACCESSORI



Art. 11224

Sensore pediatrico per OXYTEST



Pediatric



Art. 11222

Sensore neonatale per OXYTEST



Pediatric

DI SERIE



Art. 11226

Sensore adulti per OXYTEST

Art. 8336

SATFINGER II

Pulsiossimetro a dito

- ✓ Facile e comodo nell'uso
- ✓ Pratico nel trasporto
- ✓ Certificato CE
- ✓ Ad uso professionale e domiciliare

Dimensioni (LxAxP)

29x35x69 mm

Peso

60 g



PC-300

MONITOR
MULTIPARAMETRICO

Art. 8548

NEW ★

PC-300

Monitor multiparametrico

Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, NIBP e temperatura.

Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- ✓ fino a 6.000 registrazioni di pressione fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- ✓ sonda auricolare che misura la temperatura in 5 secondi
- ✓ trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- ✓ bracciale NIBP pediatrico e sonda pediatrica SpO2 opzionali
- ✓ ECG e glucometro opzionali
- ✓ batteria al litio ricaricabile inclusa
- ✓ protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

Dimensioni: 165 x 96 x 68 mm.

Memoria di 6.000 misurazioni NIBP

Dispositivo medico: Classe II A



Fornito con

- ✓ Sonda adulti SpO2 riutilizzabile
- ✓ Bracciale adulti NIBP
- ✓ Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi)
- ✓ Batteria al litio con caricatore
- ✓ Borsa per trasporto



ACCESSORI

Art. 8548-005

bracciale bariatrico

Art. 8548-003

bracciale pediatrico



Art. 8548-001

sensore pediatrico

Pediatric

SpO2

Intervallo di misurazione: 0-100%
Accuratezza: $\pm 3\%$ (70-100%)

Frequenza polso

Intervallo di misurazione: 30-240 bpm
Accuratezza*: $\pm 2\%$ o ± 2 bpm (il valore più elevato)
*Valore di deviazione della media quadratica in accordo con ISO 80601-2-61, ISO 9919

NIBP

Intervallo pressione: 0-300 mmHg (0-39.9kpa)
Accuratezza: ± 3 mmHg
Intervallo di misurazione:
Pressione sistolica: 30-270 mmHg
Pressione diastolica: 20-235 mmHg
MAP 10-220 mmHg

TEMP

Intervallo di misurazione: 32-43.0°C
Accuratezza: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ (36-39°C) - $\pm 0.3^\circ\text{C}$ (altro)
Tempo di misurazione: < 5 s

ECG (Opzionale)

Intervallo misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
Accuratezza misurazione FC: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il valore più elevato)
Scala di visualizzazione: 5.0 mm/mV $\pm 10\%$
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≥ 60 dB

Glicemia (Opzionale)

Intervallo di misurazione: 20 to 600 mg/DL

Alimentazione

Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V
Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VCC
Corrente di esercizio: ≈ 800 mA
Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

OXY-110

PULSOSSIMETRO



Art. 8506

NEW ★

OXY-110

Pulsossimetro

- ✓ Grande display TFT 3,5" autorotante per SpO2, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura.
- ✓ Tecnologia SpO2 brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento.
- ✓ Varia scelta di sonde SpO2 per adulti, bambini e neonati.
- ✓ Batteria al litio integrata, fino a 18 ore di monitoraggio continuo.
- ✓ Limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili.
- ✓ Fino a 580 ore di dati SpO2 archiviati.
- ✓ Opzionale termometro auricolare a infrarossi.

Fornito con:

- ✓ copri-pulsossimetro
- ✓ sonda a clip per adulti
- ✓ base per ricarica
- ✓ cavo USB



Tecnica	LED a due lunghezze d'onda
Intervallo SpO2	70 to 100% $\pm 2\%$
Intervallo pulsazioni	30 to 250 bpm $\pm 2\%$
Intervallo indice perfusione (PI)	0.2 to 20%
Schermo	TFT 3,5"
Memoria dati	fino a 580 ore
Modalità misurazione	continua o saltuaria
Alimentazione	batteria al litio
Ricarica	base di ricarica o cavo USB
Dimensioni	158x73x25 mm
Peso	230 g (inclusa batteria)
Caricamento dati	cavo USB o wireless




ACCESSORI



Art. 8506-001

Sensore SpO2 adulto riutilizzabile per pulsossimetro OXY-110

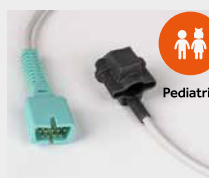

Art. 8506-002

Sensore SpO2 pediatrico riutilizzabile per pulsossimetro Oxy-110



Art. 8506-003

Sensore SpO2 neonatale riutilizzabile per pulsossimetro Oxy-110

RIANIMAZIONE



Laringoscopi



Kit
rianimazione



Maschere
rianimazione



Palloni
rianimatori



Reservoir
e circuiti



Maschere
aerosolterapia

La gamma di prodotti per rianimazione è composta di tutti i dispositivi necessari al ripristino o al supporto della funzionalità respiratoria di pazienti in cui è compromessa. Tra i vari articoli troviamo laringoscopi con fibra ottica che completano una già ricca offerta che comprende maschere, palloni, cannule e tutto ciò che è connesso alla somministrazione dell'ossigeno.



Scopri la gamma di prodotti per la rianimazione sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/rianimazione.aspx>



LARINGOSCOPI A FIBRA OTTICA

MILLER

Laringoscopio Miller a fibra ottica realizzato in acciaio inox, disponibile in set a tre o quattro lame compreso manico.

Art. 1693

Lama a fibra ottica n. 3

Art. 1692

Lama a fibra ottica n. 2

Art. 1691

Lama a fibra ottica n. 1

Art. 1690

Lama a fibra ottica n. 0

Art. 1689

Lama a fibra ottica n. 00



Pediatric

Art. 1696

Set laringoscopio 3 lame fibra ottica con custodia (Art.1692 - 1691 - 1690) e manico

Art. 1697

Set laringoscopio 4 lame fibra ottica con custodia (Art.1693 - 1692 - 1691 - 1690) e manico

MACINTOSH

Laringoscopio Macintosh a fibra ottica realizzato in acciaio inox, disponibile in set a tre o quattro lame compreso manico.

Art. 1675

Lama a fibra ottica n. 5

Art. 1674

Lama a fibra ottica n. 4

Art. 1673

Lama a fibra ottica n. 3

Art. 1672

Lama a fibra ottica n. 2

Art. 1671

Lama a fibra ottica n. 1

Art. 1670

Lama a fibra ottica n. 0



Pediatric

Art. 1678

Set laringoscopio 3 lame fibra ottica con custodia (Art.1674 - 1673 - 1672) e manico

Art. 1677

Set laringoscopio pediatrico 3 lame fibra ottica con custodia (Art.1672 - 1671 - 1670) e manico

Art. 1679

Set laringoscopio 4 lame fibra ottica con custodia (Art.1674 - 1673 - 1672 - 1671) e manico



ACCESSORI



Art. 1620-001

Custodia per laringoscopio

Custodia per laringoscopi.
Adatto per i kit da 3 e 4 lame e manico.



Art. 1681

Lampadina alogena 2,5V
per manico laringoscopio
a fibra ottica



Art. 1682

Manico pediatrico per
laringoscopio fibra ottica



Pediatric



Art. 1683

Manico adulti per
laringoscopio fibra ottica

LARINGOSCOPI A LUCE CONVENZIONALE

MILLER

Laringoscopio Miller a luce convenzionale realizzato in acciaio inox, disponibile in set a tre o quattro lame compreso manico art. 1650.

Art. 1634

Lama a luce convenzionale n. 4

Art. 1633

Lama a luce convenzionale n. 3

Art. 1632

Lama a luce convenzionale n. 2

Art. 1631

Lama a luce convenzionale n. 1

Art. 1630

Lama a luce convenzionale n. 0



Pediatric

Art. 1638

Set laringoscopio 3 lame luce conv. con custodia
(Art.1633 - 1632 - 1631) **e manico**

Art. 1640

Set laringoscopio 4 lame luce conv. con custodia
(Art.1633 - 1632 - 1631 - 1630) **e manico**

MACINTOSH

Laringoscopio Macintosh a luce convenzionale realizzato in acciaio inox, disponibile in set a tre o quattro lame compreso manico art. 1650.

Art. 1615

Lama a luce convenzionale n. 5

Art. 1614

Lama a luce convenzionale n. 4

Art. 1613

Lama a luce convenzionale n. 3

Art. 1612

Lama a luce convenzionale n. 2

Art. 1611

Lama a luce convenzionale n. 1

Art. 1610

Lama a luce convenzionale n. 0



Pediatric

Art. 1618

Set laringoscopio 3 lame luce conv. con custodia
(Art.1614 - 1613 - 1612) **e manico**

Art. 1619

Set laringoscopio pediatrico 3 lame luce conv. con custodia
(Art.1612 - 1611 - 1610) **e manico**

Art. 1620

Set laringoscopio 4 lame luce conv. con custodia
(Art.1614 - 1613 - 1612 - 1611) **e manico**



ACCESSORI



Art. 1620-001

Custodia per laringoscopio

Custodia per laringoscopi.
Adatto per i kit da 3 e 4 lame e manico.



Art. 1655

Lampadina di ricambio




Art. 1645

Manico pediatrico per lama
a luce convenzionale



Pediatric

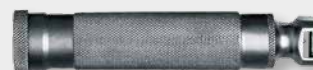

Art. 1650

Manico adulti per lama
a luce convenzionale

MASCHERE RIANIMAZIONE



Art. 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405

MASCHERA IN SILICONE

Maschere per rianimazione e anestesia

Maschera per rianimazione e anestesia. Il bordo anatomico, realizzato in silicone, garantisce la massima aderenza al viso, mentre la conchiglia, realizzata in polisulfone trasparente, permette di monitorare il paziente durante l'applicazione. Connettore standard. Sterilizzabile in autoclave, è disponibile in 6 diverse misure.

Codice articolo	2400	2401	2402	2403	2404	2405
Taglia	0	1	2	3	4	5



Art. 2411 - 2413 - 2414 - 2415

MASCHERA MONOUSO

Maschere per rianimazione monouso

Maschera rianimazione monouso. Nelle misure 3 / 4 / 5 con ragno e valvola.

Codice articolo	2411	2413	2414	2415
Taglia	1	3	4	5

PALLONI RIANIMATORI



Art. 1274 - 1276 - 1278

PALLONI RIANIMATORI

**Palloni rianimatori in silicone autoclavabili
completi di mascherina**

Palloni rianimatori in silicone trasparenti autoclavabili completi di valvola di sovrappressione con taratura a 60 mbar per adulti e 40 mbar per bambini e neonati, dotati di connessione alla bombola, raccordo per innesto reservoir e connessioni alle maschere.

Codice articolo	1274	1276	1278	1230	1235
Volume (ml)	1600	550	280	1600	500
Autoclavabile	✓	✓	✓		
Valvola di Sicurezza	✓	✓	✓	✓	✓

Art. 1230 - 1235

PALLONI MONOUSO

Palloni rianimatori monouso con maschera

Palloni rianimatori monouso completi di maschera oronasale monouso. Completo di valvola a membrana di non ritorno.

ACCESSORI



Art. 12028
**Custodia blu per pallone
rianimatore e maschere**

Misure: cm 22 x 30 x 12 (LxAxP). Peso: kg 0,8.



Art. 1056
Tubo prolunga per ossigeno
f/f da m 2



Art. 1057
Occhiale per ossigenoterapia con
chiusura a scorrere posteriore

RESERVOIR E CIRCUITI MANUALI



Art. 1258

CIRCUITO PER ADULTI MONOUSO

Circuito per rianimazione manuale per adulti > 30 kg

Circuito per rianimazione manuale BVM adulto, composto da:

- ✓ pallone 1510 ml
- ✓ valvola limitatrice di pressione
- ✓ maschera mis. 4
- ✓ reservoir
- ✓ tubo prolunga ossigeno



Art. 1257

CIRCUITO PER BAMBINI MONOUSO

Circuito per rianimazione manuale per bambini 10 - 30 kg

Circuito per rianimazione manuale BVM pediatrico, composto da:

- ✓ pallone 670 ml
- ✓ valvola limitatrice di pressione (40 cm H₂O)
- ✓ maschera mis. 3
- ✓ reservoir
- ✓ tubo prolunga ossigeno



Pediatric



Art. 1256

CIRCUITO PER NEONATI MONOUSO

Circuito per rianimazione manuale per neonati < 10 kg

Circuito per rianimazione manuale BVM neonatale, composto da:

- ✓ pallone 220 ml
- ✓ valvola limitatrice di pressione (40 cm H₂O)
- ✓ maschera mis. 1
- ✓ reservoir
- ✓ tubo prolunga ossigeno



Pediatric



Art. 1233

Reservoir ossigeno con valvola per pallone adulti



Art. 1234

Reservoir ossigeno con valvola per pallone pediatrico



Pediatric

MASCHERE AEROSOLTERAPIA



Art. 1053

Maschera adulti per aerosolterapia

Maschera morbida per aerosolterapia completa di ampolla e tubo di collegamento anti-schiacciamento.



Art. 1052

Maschera per ossigenoterapia adulti a concentrazione variabile sistema Venturi

Maschera morbida completa di kit raccordi colorati per variazione della concentrazione di ossigeno erogato e tubo di collegamento antischiacciamento.

Art. 1040



Pediatric

Maschera bambini per aerosolterapia



Ad alta concentrazione realizzata con materiale atossico, completa di elastico regolabile, clip stringinaso e tubo di collegamento antischiacciamento da cm 210.

Art. 1045



Pediatric

Maschera bambini per ossigenoterapia con pallone di raccolta



Ad alta concentrazione realizzata con materiale atossico, elastico regolabile, clip stringinaso e tubo di collegamento anti-schiacciamento da cm 210.

Art. 1050

Maschera adulti per ossigenoterapia



Ad alta concentrazione realizzata con materiale atossico, completa di elastico regolabile, clip stringinaso e tubo di collegamento antischiacciamento da cm 210.

Art. 1055

Maschera adulti per ossigenoterapia con pallone di raccolta



Ad alta concentrazione realizzata con materiale atossico, elastico regolabile, clip stringinaso e tubo di collegamento anti-schiacciamento da cm 210.

KIT RIANIMAZIONE



Art. 2050

SPEEDY 2

Rianimatore in valigia senza bombola

Rianimatore in set ABS con supporto, pallone rianimatore, maschera rianimazione (mis. 4), 3 cannule di Guedel (mis. 1-2-3), pinza tiralingua, apribocca, tubo atossico
Dimensioni: cm 40 x 26 x 13

Art. 1414	Art. 1413	Art. 1412	Art. 1411	Art. 1410	Art. 1409		
							
Codice articolo	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415
Taglia	00	0	1	2	3	4	Set

Art. 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414

CANNULA DI GUEDEL

Cannule di Guedel orofaringee

Cannule di Guedel orofaringee fabbricate con materiale atossico, sterili e confezionate singolarmente.
Sono disponibili 6 diverse misure identificabili con codici colore.

Art. 1090



APRIBOCCA

Apribocca elicoidale

Apribocca elicoidale realizzato in polietilene con manopola antiscivolo zigrinata per una presa sicura.

Art. 1080



RESCUE MASK

Maschera per rianimazione

Articolo indispensabile per tutti gli operatori del soccorso, evita il contatto bocca a bocca durante una rianimazione di emergenza. Realizzata con materiale trasparente, è composta da un morbido cuscinetto e da una valvola con membrana di non ritorno, il tutto contenuto in una comoda custodia in materiale plastico antiurto. La colorazione della custodia può subire variazioni.

Art. 1787



PORTACHIAVI

Portachiavi con maschera bocca a bocca

Maschera di sicurezza per la ventilazione bocca a bocca che permette di ventilare in assoluta sicurezza in quanto composto di un foglio trasparente e di una valvola di NON ritorno che evita che le esalazioni dei pazienti possano venire a contatto con il soccorritore. È fornita in una comoda custodia con portachiavi. Il colore è soggetto a modifiche in base alla disponibilità.

AUSILI PRIMO SOCCORSO

Grazie alla propria attrezzatura un soccorritore può fare la differenza sul campo. Oltre ai dispositivi principali ci sono molti prodotti che rivestono un ruolo critico nelle operazioni di soccorso. Abbiamo selezionato decine di prodotti per consentire a ogni struttura, a ogni squadra e a ogni operatore di lavorare al meglio in ogni teatro. Nel caso degli zaini da soccorso, per esempio, abbiamo individuato numerose soluzioni adatte alle diverse specializzazioni che esistono nel nostro territorio.




Scopri la gamma degli Ausili al primo soccorso sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/ausili-primo-soccorso.aspx>

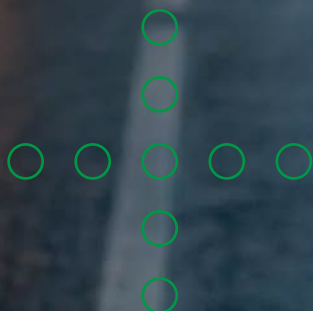

ZAINI SOCCORSO



Vista zaino
aperto

Art. 1306/RG

NEW ★

ALFA

Zaino di emergenza formato extra large in PVC

Zaino professionale per emergenza e soccorso in formato Extra Large, realizzato in AEROTex®-PLAN ad alta resistenza e sviluppato per l'impiego nei servizi di emergenza sanitaria e di protezione civile. L'ampio vano interno è suddiviso in due sezioni e comprende 7 borse modulari interne trasparenti di diverse dimensioni, che consentono una gestione ordinata e immediata dei presidi e del materiale sanitario. È inoltre dotato di supporto integrato per bombole di ossigeno da 0,8 – 1 – 2 litri. Esternamente sono presenti due ampie tasche frontali di cui una ha al suo interno 4 borse con finestra trasparente. Internamente è provvisto di numerose tasche trasparenti ed elastiche per il fissaggio che garantiscono un'organizzazione efficiente dell'attrezzatura. Lo zaino dispone di due piccole tasche laterali da un lato e di un'unica grande tasca laterale

dall'altro lato. Le due maniglie ergonomiche, posizionate una sulla parte superiore e una sul lato, agevolano il trasporto in qualsiasi situazione operativa. Gli spallacci imbottiti e removibili, dotati di cinghie a sgancio rapido, assicurano comfort e stabilità durante gli spostamenti. La robustezza della struttura è ulteriormente garantita dal fondo rinforzato, dalle cerniere bidirezionali ad alta resistenza e dagli occhielli metallici extra robusti con doppia rivettatura per l'ancoraggio degli spallacci. I tirazip ergonomici sono facilmente impugnabili e sanificabili. Completano la dotazione una fascia in velcro per l'applicazione di patch identificative e una finestra trasparente porta-etichetta per l'immediata identificazione dello zaino e del suo contenuto.

Dimensioni: cm 50 x 52 x 25 (L x H x P). **Peso:** kg 4,1





**Vista zaino
aperto**



Art. 1307/RG

NEW ★

BRAVO

Zaino di emergenza in PVC

Zaino professionale per emergenza progettato per garantire resistenza, funzionalità e un'organizzazione ottimale dell'attrezzatura. Il vano principale, dotato di struttura portante rigida presenta un divisorio removibile che consente di configurare gli spazi in base alle esigenze operative. L'interno comprende 5 borse modulari trasparenti, 2 di queste fissate tramite sistema a strappo e tre alloggiare nel vano principale. L'organizzazione è completata da alcuni elastici per il fissaggio

di materiale sanitario, due tasche laterali, due tasche frontali e un pratico vano trasparente per documenti o materiale di immediata identificazione. Lo zaino è dotato di maniglia ergonomica, spallacci imbottiti con cinghie a sgancio rapido per una maggiore stabilità durante il trasporto, cerniere bidirezionali, fondo rinforzato e banda in velcro per l'applicazione di patch identificative.

Dimensioni: cm 36 x 47 x 26 (L x H x P). Peso: kg 2



BORSA SOCCORSO



Vista borsa
aperta

Art. 1304/RG

NEW ★

SIERRA

Borsa di emergenza in PVC

Borsa professionale per emergenza e soccorso, progettata per garantire la massima organizzazione dell'attrezzatura e un rapido accesso ai dispositivi durante gli interventi. L'ampio vano principale è suddiviso in tre comparti con separazione interna fissa, consentendo una facile gestione dei presidi sanitari e del materiale di emergenza. Esternamente presenta 4 tasche, 2 laterali, 1 anteriore e 1 posteriore. La struttura robusta assicura una protezione ottimale dell'attrezzatura e la divisione interna imbottita contribuisce a proteggere i

dispositivi da urti e sollecitazioni durante il trasporto. Presente una tracolla regolabile per il trasporto a spalla, che garantisce maggiore libertà di movimento all'operatore durante le fasi di intervento. La tasca trasparente con chiusura a cerniera, collocata nella parte superiore della borsa, offre uno spazio dedicato per documenti e protocolli operativi, consentendo l'immediata identificazione del contenuto e un accesso rapido alle informazioni.

Dimensioni: cm 43 x 25 x 27 (L x H x P). **Peso:** kg 1



Chiusura con doppia cerniera



CARTELLA PORTADOCUMENTI



Art. 1305/B

NEW ★

LIMA

Cartella portadocumenti formato A4 in PVC

Organizer professionale in formato A4 per l'organizzazione chiara e lo stoccaggio di moduli, documenti vari, strumenti di scrittura, ecc. Presente una maniglia per una presa agevole e doppie cerniere, 4 anelli interni e un righello integrato.

La struttura modulare permette la configurazione più adatta alle proprie esigenze. Dotato di una clipboard in alluminio con rivestimento antigraffio, removibile e inseribile nell'apposito scomparto posteriore, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la scrittura e la gestione dei documenti. Il pratico clip magnetico portachiavi all'interno consente il fissaggio sicuro delle chiavi, mentre gli scomparti con codifica cromatica facilitano l'organizzazione rapida e intuitiva del contenuto.

Dimensioni: cm 29 x 37,5 x 6,5 (L x H x P). **Peso:** kg 1

Clip magnetico



ZAINI E BORSE SOCCORSO



Art. 1362

AMBUMED

Zaino di soccorso

Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a volontari e professionisti del soccorso. Esternamente è realizzato in nylon antistrappo blu con doppie cuciture, robuste cerniere da 10 mm, bande rifrangenti ad alta visibilità su tutti i lati, fondo in PVC a celle chiuse e supporti di appoggio in plastica. Internamente presenta una struttura protettiva rigida a guscio composta da materiale termoplastico e si compone di un ampio vano centrale con apertura frontale a doppia zip e 4 tasche laterali esterne. Il vano centrale è dotato di attacchi in Velcro® per il fissaggio delle 4 custodie colorate in dotazione, ciascuna con ampia finestra trasparente rinforzata da doppia cucitura, e delle 2 borse professionali (diagnostica e medicazione), anch'esse in dotazione, nelle quali alloggiare e organizzare gli strumenti necessari all'intervento. Completano lo zaino una tasca frontale con fasce interne porta oggetti, tre maniglie (una superiore e due laterali) rivestite in gomma antiscivolo per il trasporto a mano e due spallacci rinforzati con bande rifrangenti.

Dimensioni: cm 53 x 53 x 25 (L x H x P). **Peso:** kg 4,1





Art. 1318

ROMEO

Zaino di soccorso

Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a volontari e professionisti del soccorso. Completamente realizzato in PVC a celle chiuse di colore rosso. Antistrappo, lavabile e resistente, con tasca frontale trasparente per personalizzazioni e fasce interne porta oggetti, con doppie cuciture, robuste cerniere da 10 mm, bande rifrangenti ad alta visibilità su tutti i lati esterni, fondo in PVC e con supporti di appoggio in plastica. Internamente presenta una struttura protettiva rigida a guscio composta da materiale termoplastico



e con un ampio vano centrale con apertura frontale a doppia zip e 2 tasche frontali esterne. Il vano centrale è dotato di attacchi in Velcro® per il fissaggio di 4 custodie colorate di serie (Art. 1362-002), e di 2 borse professionali (Art. 1362-001), sempre di serie. Completano lo zaino due maniglie rivestite in gomma antiscivolo per il trasporto a mano e due spallacci rinforzati con bande rifrangenti.

Dimensioni: cm 33 x 54 x 36 (L x H x P). **Peso:** kg 3,8



Art. 1319

GIULIETTA

Borsa per emergenza

Borsa per emergenza realizzata esternamente in PVC a celle chiuse di colore rosso, con fondo in PVC con supporti di appoggio in plastica e con tasca superiore trasparente per personalizzazioni. Compatta ma capiente, grazie alle modularità interna permette l'organizzazione dello spazio in modo personalizzato al fine di ospitare in maniera ottimale quanto necessario per l'emergenza. È composta da 4 tasche,



2 laterali, una anteriore ed una posteriore, predisposte con supporti ed elastici. È inoltre completa di un'ulteriore borsetta amovibile con frontale trasparente. Grazie alla sua costruzione, totalmente sfoderabile, permette la pulizia e la disinfezione interna. Trasportabile a mano, tracolla o a zaino.

Dimensioni: cm 45 x 30 x 34 (L x H x P). **Peso:** kg 2,2

ZAINI SOCCORSO



Art. 1354

115

Zaino rosso con tasche laterali e scomparti

Zaino composto da tre corpi separabili collegati da cerniere, corredato da apposita maniglia di sollevamento verticale sul corpo centrale e di maniglie di trasporto sui corpi esterni, all'interno degli stessi sono comprese quattro buste per il contenimento di materiali specifici. Spallacci regolabili da trasporto e cintura addominale, il tutto in cordura 1000 con idonea imbottitura e tasca di contenimento.

Dimensioni: cm 42,5 x 51,5 x 27 (L x H x P). **Peso:** kg 4



ACCESSORI



Art. 1354-001

Custodia per Zaino rosso "115"

La custodia per art. 1354, realizzata in PVC ignifugo, permette lo stivaggio e il trasporto dello zaino, preservandone l'integrità nel tempo.

Peso: kg 1,2



ACCESSORI PER ZAINI SOCCORSO

Art. 1362-001

SACCHE QUADRATE

Sacca quadrata interna verde, gialla, rossa e blu per zaini
Dimensioni: cm 23 x 23 x 10 (L x H x P)

Art. 1362-001/V

Art. 1362-001/G



Art. 1362-002

SACCHE RETTANGOLARI

Sacca rettangolare interna rossa, gialla, blu, arancio, per zaini.
Dimensioni: cm 30 x 15 x 10 (L x H x P)



Art. 1362-002/R

Art. 1362-002/Y

Art. 1362-002/B

Art. 1362-002/A

Art. 1362-003

SACCHE RETTANGOLARI

Sacca rettangolare interna professionale per zaini da soccorso. Disponibile nei colori giallo (Art. 1362-003/G), arancio (Art. 1362-003/A), blu (Art. 1362-003/B), o verde (Art. 1362-003/V), anche in versione pediatrica (Art. 1362-003/PED).

Dimensioni: cm 35 x 19 x 14 (L x H x P)
Peso: kg 0,5

Art. 1362-003/G

Art. 1362-003/A

Art. 1362-003/PED



Art. 1362-003/B

Art. 1362-003/V



BORSE PER EMERGENZA



Art. 1342



Pediatric

BABY BAG

Borsa per emergenza vuota

Borsa per emergenza pediatrica realizzata in nylon con copertura impermeabile in PVC. È composta da tre comparti interni separati tra loro, una borsa removibile con frontale trasparente che permette la visualizzazione del contenuto. Ha inoltre 4 tasche esterne, due laterali e due frontali. È trasportabile a mano o tracolla.

Dimensioni: cm 45 x 30 x 30 (L x H x P). **Peso:** kg 1,4



Art. 1345

BORSA PER EMERGENZA

Borsa per emergenza vuota

Borsa per emergenza realizzata in Nylon 840. Compatta ma capiente, grazie alle modularità interna permette l'organizzazione dello spazio in modo personalizzato al fine di ospitare in maniera ottimale quanto necessario per l'emergenza. È composta da 4 tasche, 2 laterali, una anteriore e una posteriore totalmente identiche, predisposte ed organizzate con supporti ed elastici atte ad ospitare vario materiale sanitario. È inoltre completa di un'ulteriore borsetta amovibile con frontale trasparente, che permette la visualizzazione del contenuto. Grazie alla sua costruzione, totalmente sfoderabile, permette la pulizia e la disinfezione interna. Trasportabile a mano, tracolla o a zaino.

Dimensioni: cm 45 x 30 x 34 (L x H x P). **Peso:** kg 1,8



PORTAFIALE, SET ATTREZZI E ASPIRATORE


Art. 1350

PORTAFIALE

Sacca portafiale con scomparti

Strumento indispensabile per protezione e stivaggio razionale di qualsiasi tipo di fiala. Realizzata in nylon è dotata di 2 scomparti, di cui uno diviso in tre sezioni e uno diviso in due. All'interno sono presenti bande elastiche per contenere fino a 90 fiale e finestrelle trasparenti per inserire i cartellini di riconoscimento.

Dimensioni: cm 17 x 28 x 15 (L x H x P)

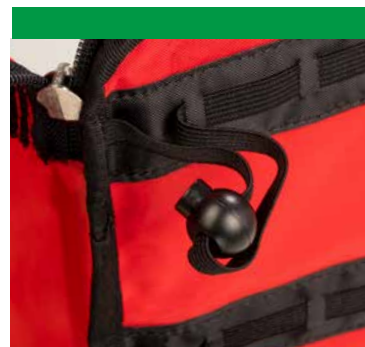

Art. 1360

SET ATTREZZI

Set attrezzi per veicoli di emergenza

Set di pronto intervento per incidenti stradali, ideale per veicoli di soccorso. Nella comoda valigetta in nylon sono contenuti gli attrezzi necessari per il pronto intervento.

Dimensioni: cm 48 x 12 x 28 (L x H x P)



Contenuto:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ✓ 1 ascia | ✓ 1 cesoia tranciabulloni |
| ✓ 1 piede di porco | ✓ 1 cavo di traino |
| ✓ 2 torce antivento | ✓ 1 fumogeno |
| ✓ 2 paia di guanti da lavoro | ✓ 1 coperta antifiama |

Art. 11068

ASPIRATORE MANUALE DI SECRETI

Il dispositivo è stato progettato per fornire un'aspirazione faringea e tracheale nelle procedure d'urgenza. Il volume del vaso di aspirazione è di 300 ml.

Dimensioni: cm 18 x 22 x 8. **Peso:** g 275



CORMOS

ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE



Art. 11010/FA

Con flacone autoclavabile



Art. 11038 + Art. 11040

Sonda Yankauer e tubo di aspirazione



Art. 11010/LN

Con liner monouso

Art. 11010

CORMOS

Aspiratore di secreti portatile

Aspiratore medicale di secreti compatto e potente, indicato per i servizi d'emergenza. Funziona direttamente con i 12 Volt cc. del mezzo o con accumulatore interno con un'autonomia di oltre 45 minuti. Silenzioso e potente grazie al motore da 25 l/min che assicura un'aspirazione regolabile, manometro di controllo posto sul frontale dell'aspiratore, fino ai 850 mbar. Facilmente trasportabile grazie alle compatte dimensioni, alla maniglia anatomica e al peso di soli 4,3 kg. Scatola realizzata in ABS/UL antiurto ad alta resistenza. Dimensioni: cm 32x25x10. Fornito completo di: borsa per il trasporto, staffa di ancoraggio a parete con tenuta a 10g come previsto dalla EN1789 per l'utilizzo in ambulanza, flacone autoclavabile da 1.000 ml con valvola di sicurezza e filtro antibatterico, tubo paziente con Jankauer (sonda).

Prodotto conforme a ISO 10079-1, IEC 60601-1, omologazione ECE R10, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Classificazione secondo MDR 2017/745: IIa.



Art. 11128/FA



Art. 11128/LN

Art. 11128

ASPIRATORE FISSO DA INCASSO

Aspiratore fisso da incasso con flacone autoclavabile

- ✓ Aspiratore medicale di secreti per il montaggio fisso nei mezzi di soccorso.
- ✓ Flusso d'aspirazione massimo 30 l/min.
- ✓ Potenza d'aspirazione massima 800 mbar.
- ✓ Flacone autoclavabile da 1000 ml con cartuccia monouso (modello LN)
- ✓ Flacone autoclavabile da 1000 ml con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito direttamente nel coperchio (modello FA).
- ✓ Dimensione del blocco motore: 18x18x10 cm circa. Dimensione del blocco regolatore standard da incasso: 5,3x11x7 cm circa.
- ✓ In conformità a tutte le normative vigenti.

DI SERIE



Art. 11028

Vaso di raccolta secreti da ml 1000 autoclavabile per sacche monouso



Art. 11023

Supporto da parete certificato 10g con sistema di ricarica integrato per CORMOS e CORMOS PLUS.



Art. 11016

Custodia verde

Art. 11038

Sonda di aspirazione Yankauer rigida curva sterile monouso

Art. 11040

Tubo di aspirazione sterile per sonda Yankauer monouso lung. 200 cm

ACCESSORI



Art. 11024 (6 pz.)
Art. 11025 (12 pz.)
Art. 11026 (36 pz.)

Sacca monouso 1000 ml



Art. 11012

Vaso di raccolta autoclavabile



Art. 11013

Filtro antibatterico



Art. 11162

Vaso raccolta secreti monouso da 1 litro



Art. 11034

Alimentatore 220V a 2 poli. Tensione di uscita 13,7 V.



Art. 11022-003

Cavo alimentazione 2 poli per aspiratore

CORMOS PLUS

ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE



Art. 11022/FA

**Aspiratore di secreti
portatile con flacone
autoclavabile completo**

Art. 11022

CORMOS PLUS

Aspiratore di secreti portatile

Gli aspiratori di secreti della linea CORMOS PLUS sono dispositivi medici semplici e compatti alimentati a batteria. Si differenziano dalla linea CORMOS per la maggior potenza erogata da un silenzioso motore a doppio pistone da 30 litri/minuto.

L'aspirazione è regolabile linearmente per mezzo di un manometro di controllo da 0 a 800 mbar. Viene fornito completo di: borsa per il trasporto, staffa di ancoraggio a parete con tenuta a 10g come previsto dalla EN1789 per l'utilizzo in ambulanza, flacone autoclavabile da 1.000 ml con valvola di sicurezza e filtro antibatterico, tubo paziente con Jankauer (sonda). Peso: 5,4 kg

Prodotto conforme a ISO 10079-1, IEC 60601-1, omologazione ECE R10, UNI EN 1789, IEC 60601-1-11. Classificazione secondo MDR 2017/745: IIa.



Art. 11022/LN

**Aspiratore di secreti
portatile con vaso e
adattore per sacche
monouso**

DI SERIE



Art. 11028

Vaso di raccolta
secreti da ml 1000
autoclavabile per
sacche monouso



Art. 11023

Supporto da parete
certificato 10g con sistema
di ricarica integrato per
CORMOS e CORMOS PLUS.




Art. 11032

Custodia
verde

Art. 11038

Sonda di aspirazione Yankauer
rigida curva sterile monouso

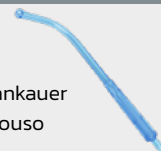

Art. 11040

Tubo di aspirazione
sterile per sonda
Yankauer monouso
lung. 200 cm



ACCESSORI



Art. 11024 (6 pz.)
Art. 11025 (12 pz.)
Art. 11026 (36 pz.)

Sacca monouso 1000 ml



Art. 11012

Vaso di raccolta
autoclavabile



Art. 11013

Filtro
antibatterico



Art. 11162

Vaso raccolta
secreti monouso
da 1 litro



Art. 11034

Alimentatore
220V a 2 poli.
Tensione di
uscita 13,7 V.



Art. 11022-003

Cavo alimentazione
2 poli per
aspiratore



Art. 706 (6 maniglie)

Art. 708 (8 maniglie)

TELO PORTAFERITI

Teli porta feriti con 6/8 maniglie

Teli portaferiti realizzati in nylon ignifugo, antistrappo e impermeabile. Disponibili con 6 o 8 robuste maniglie cucite.

Dimensioni: cm 192 x 75. **Portata:** kg 160



NEW ★

Art. 715

TANDEM

Telo da trasporto omologato a 2 soccorritori

Tandem è il telo da evacuazione con maniglie e tracolle per agevolare i servizi dei soccorritori.

Dimensioni: cm 190 x 85. **Portata:** kg 250



Bariatric

Art. 712

TELO PORTAFERITI

**Telo portaferiti per obesi con 12 maniglie
cm 274 x 150**

In nylon ignifugo antistrappo e impermeabile, dotato di 12 maniglie rinforzate.

Dimensioni: cm 274 x 150. **Portata:** kg 350



Bariatric

Art. 714

TELO PORTAFERITI

**Telo portaferiti per obesi con 12 maniglie
cm 200 x 150**

Stesse caratteristiche dell'art. 712, ma con dimensioni diverse: 200 x 150 cm.

Dimensioni: cm 200 x 150. **Portata:** kg 350



Art. 1980

FORBICI DI ROBIN

Forbici di emergenza

Forbice di soccorso multiuso indispensabile per gli operatori dell'emergenza medica. Realizzata in acciaio inox e rivestita nell'impugnatura con materiale plastico, viene utilizzata per rompere i vetri e per tagliare le cinture di sicurezza e gli abiti nel caso di intervento d'urgenza. È completa di supporto di fissaggio a parete.



Art. 1982

FORBICI RESCUE

Forbici di emergenza

Forbici di soccorso multiuso indispensabili per gli operatori dell'emergenza medica. Realizzate in acciaio inox e rivestite nell'impugnatura con materiale plastico, vengono utilizzate per rompere i vetri e per tagliare le cinture di sicurezza e gli abiti nel caso di intervento d'urgenza.

Art. 1950/N

Art. 1950/R

Art. 1950/G



Art. 1950

FORBICE

Forbice di emergenza

Forbice di emergenza con manico in termoplastico e lama in acciaio per tagliare i vestiti. È disponibile in 3 diversi colori: nera (1950/N), gialla (1950/G) e rossa (1950/R).

Lunghezza: cm 18



Art. 1960

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico regolabile

Laccio emostatico regolabile ad apertura rapida di facile applicazione. Indicato nel pronto soccorso, per borse e zaini.



Art. 12026

PORTAGUANTI

**Portaguanti bianco per ambulanza
a 3 scomparti**

Pratica e sicura struttura in ABS per contenere 3 confezioni di guanti monouso. Dotata di dispositivo di bloccaggio di sicurezza contro aperture accidentali. La superficie liscia e gli angoli arrotondati la rendono estremamente sicura e facile da igienizzare. Può essere installata su qualsiasi tipo di ambulanza. **Altezza 41 cm, Larghezza 26 cm, Profondità 9,5 cm. Peso 1 kg**

GUANTI

Guanti monouso in lattice e nitrile in 4 taglie

Guanti in lattice con polvere

Art. 1930	Art. 1932	Art. 1934	Art. 1935
TAGLIA S	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL

Guanti in lattice senza polvere

Art. 1936	Art. 1937	Art. 1938	Art. 1939
TAGLIA S	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL

Guanti in lattice doppio spessore

Art. 1925	Art. 1926	Art. 1927	Art. 1928
TAGLIA S	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL

Guanti in nitrile

Art. 1940	Art. 1942	Art. 1944	Art. 1945
TAGLIA S	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL



Art. 11360/B



Art. 11362/G



Art. 11360/R

Art. 11360 - 11362

CASCO

**Casco protettivo per emergenza in ABS
bianco, rosso o giallo**

Sottogola anti-soffocamento a sgancio automatico tra i 15 dN e i 25 dN. Interno a ragno con imbottitura lavabile. Conforme alla norma CE EN 397.



ACCESSORI

Art. 11372

**Visiera
trasparente**





Art. 1776/R (rossa)

Art. 1776/AZ (blu)

COPERTA

Coperta in pile

Coperta in poliestere di colore rosso e blu, cucita lungo tutto il perimetro e dotata di due bande catarifrangenti.

Dimensioni: cm 140 x 210



Art. 1770

COPERTA

Coperta isotermica

Articolo indispensabile per il primo soccorso. Da una parte dorata e dall'altra argentata protegge dal caldo e dal freddo. Confezionata in un sacchetto richiudibile.

Dimensioni: cm 160 x 210



Art. 1385 (verde)

Art. 1388 (bianco)

FEDERA

Federa monouso in tnt per cuscini

Federa in T.N.T. monouso per cuscini. Disponibile nei colori verde (25 gr/mq - cm 50 x 70) e bianco (28 gr/mq - cm 50 x 80). Confezioni da 10 pz.



Art. 1380 (verde)

Art. 1382 (bianco)

LENZUOLO

Lenzuolo monouso in T.N.T. per barella

Lenzuolo in T.N.T. monouso per barelle. Disponibile nei colori verde (25 gr/mq - cm 90 x 230) e bianco (28 gr/mq - cm 100 x 220). Confezioni da 10 pz.

SISTEMI DI FISSAGGIO



Scopri la gamma dei sistemi di fissaggio sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/sistemi-di-fissaggio.aspx>



SISTEMI DI FISSAGGIO PER SEDIE PORTANTINE

Art. 975

ERGOLIFT FIXING SYSTEM

Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift

Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio in ambulanza della sedia Extra Ergolift. Realizzato in acciaio inox, è resistente alla corrosione e facilmente sanificabile. L'innovativa configurazione monoblocco consente all'operatore di movimentare la sedia nelle fasi di bloccaggio e sbloccaggio in modo rapido e semplice. Il sistema di bloccaggio per la sedia Ergolift è compatibile con tutte le sedie Extra pieghevoli e Zena: 670/BR - 676 - 678 - 679.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.

Dimensioni: cm 58 x 111 x 26 (L x A x P)



Art. 960

EXTRA FIXING SYSTEM

Sistema di fissaggio per sedia Extra

Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio permanente in ambulanza della sedia Extra. Realizzato con materiali (inossidabili e termoplastici) resistenti alla corrosione e facilmente lavabili. Extra fixing system consente il fissaggio della serie Extra (esclusa Extra Ergolift) in modo semplice, rapido ed efficace. L'operatore può agevolmente movimentare la sedia nelle fasi di bloccaggio e sbloccaggio, grazie all'innovativa ed esclusiva configurazione monoblocco. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.** Dimensioni: cm 23 x 42 x 20 (L x A x P)



Art. 977

KUMA FIXING SYSTEM

Sistema di fissaggio per sedia Kuma

Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio in ambulanza della sedia Kuma. È resistente alla corrosione e facilmente sanificabile. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.** Dimensioni: cm 64 x 120 x 30 (L x A x P)



Art. 618/SUP

Art. 618/INF

Art. 618

Sistema di fissaggio per sedia portantina


Supporto studiato per bloccare le sedie portantine Maya e Quick all'interno dell'ambulanza. È composto da 2 pezzi. Realizzato in acciaio inossidabile. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**

• Disponibili anche separatamente


Art. 988

Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift FX art. 675 e Proxima Pro art. 683

Sistema di fissaggio a pavimento con comando di sblocco integrato alla sedia art. 675 Extra Ergolift FX e art. 683 Proxima Pro. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**

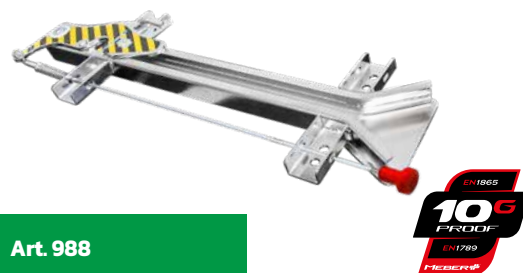

SISTEMI DI FISSAGGIO PER AUTOCARICANTI

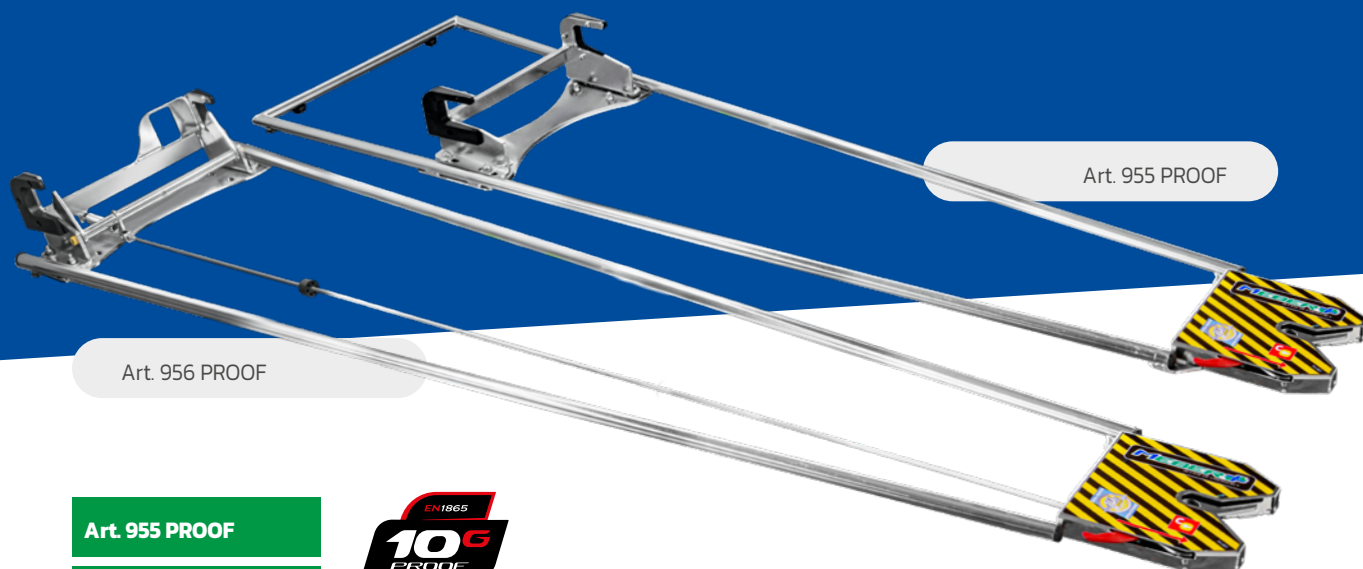

Art. 955 PROOF

Art. 956 PROOF



SISTEMA DI FISSAGGIO

Progettati per garantire la massima stabilità della barella o del carrello a bordo del veicolo di soccorso, sono realizzati interamente in acciaio inox, per offrire maggiore durata e resistere alla corrosione. Grazie alle loro strutture, di semplice installazione, assicurano l'assoluto trattenimento, in tutte le direzioni, della barella o del carrello, e del paziente trasportato. L'art. 955 PROOF è idoneo per il fissaggio di tutte le nostre barelle autocaricanti 10g, mentre l'art. 956 PROOF è idoneo per il fissaggio dei carrelli "Titanus". **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**



ACCESSORI



Art. 955-001

Contropiastra anteriore per sistemi di fissaggio certificati 955 PROOF - 956 PROOF



Art. 955-002

Contropiastra posteriore per sistemi di fissaggio certificati 955 PROOF - 956 PROOF

Art.	Altezza anteriore	Altezza posteriore	Larghezza	Lunghezza	Peso
955 PROOF	13 cm	2,6 cm	48 cm	177 cm	7,7 kg
956 PROOF	13 cm	2,6 cm	42 cm	175 cm	8,5 kg

Art. 980

Kit gancio barella multilivello "MEBER-X" composto da fissaggio anteriore, fissaggio laterale e gancio di sicurezza posteriore.



Fissaggio anteriore
Lunghezza: cm 54
Larghezza: cm 68
Altezza: cm 14



Fissaggio laterale
Lunghezza: cm 75
Larghezza: cm 8
Altezza: cm 24



Gancio di sicurezza posteriore
Lunghezza: cm 10
Larghezza: cm 2
Altezza: cm 5

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BARELLE FISSE E BARELLE A CUCCHIAIO

Art. 959



Sistema di fissaggio a parete per barella a geometria variabile Ergon

Sistema di fissaggio a parete per barella Ergon, realizzato in materiale plastico. Garantisce un bloccaggio rapido e sicuro all'interno dell'ambulanza in posizione verticale. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**



Art. 614



Sistema di fissaggio orizzontale certificato per barella a cucchiaio

Supporti in alluminio dotati di ganci rapidi e sicuri per il bloccaggio a muro o all'interno dell'ambulanza della barella a cucchiaio in posizione orizzontale. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**



Art. 616 - 616/A



Sistemi di fissaggio verticali certificati per barella a cucchiaio

Supporti in alluminio dotati di ganci rapidi e sicuri per il bloccaggio a muro o all'interno dell'ambulanza della barella a cucchiaio in posizione verticale. Con l'art. 616/A è possibile bloccare la barella ripiegata. **Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.**



Art. 963

Sistema di fissaggio anteriore per barelle fisse Art. 1510 PROOF e 1515 PROOF

Larghezza max: cm 18,5
Lunghezza: cm 9,5
Altezza: cm 5



SISTEMI DI FISSAGGIO



Art. 962

Sistema di fissaggio EN 1789 per barella sedia autocaricante EVOX PROOF

Sistema di fissaggio per barella sedia autocaricante EVOX art. 7112 PROOF costruito interamente in acciaio inox, per garantire resistenza alla corrosione ed elevata durata nel tempo. Grazie alla sua robusta struttura è in grado di resistere a sollecitazioni fino a 10G in tutte le direzioni, come previsto dalla norma EN 1789.

Dimensioni: cm 43,5 x 161 x 13 (L x A x P). Peso: 6 kg.



Art. 965

Sistema di fissaggio anteriore per barella autocaricante

Sistema di bloccaggio da fissare sul piano dell'ambulanza che permette di convogliare in centro e bloccare la barella autocaricante nella parte anteriore. Realizzato in acciaio inossidabile.



Art. 964

Gancio anteriore per barella art. 638 - 639 - 640



Art. 950/1
(H 188 mm)



Art. 950/2
(H 160 mm)



Art. 950/3
(H 148 mm)



Art. 950/4
(H 129 mm)

Art. 950

Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante

Costruito in fusione d'acciaio, viene montato sul pianale dell'ambulanza per bloccare con sicurezza la barella autocaricante. È disponibile in 4 diverse altezze.



Art. 1720

Blocchetto mm 30 con leva per bloccaggio

Blocchetto in alluminio, altezza mm 30, con levetta di sicurezza girevole per bloccaggio articoli.



Art. 1722

Blocchetto mm 30 con leva e piastrina per bloccaggio

Blocchetto in alluminio, altezza mm 30, con levetta di sicurezza girevole e piastrina per il fissaggio alla parete.



Art. 1725

Blocchetto mm 73 con leva e piastrina per bloccaggio

Blocchetto in alluminio, altezza mm 73, con levetta di sicurezza girevole e piastrina per il fissaggio alla parete.



Art. 970


Serie completa ganci DIN

Consente di bloccare su un piano le barelle art. 1510 PROOF, 1515 PROOF. Set composto da 4 pezzi realizzati con misure DIN.

TABELLA COMPATIBILITÀ SISTEMI DI FISSAGGIO

	Art.	Adatto per		Art.	Adatto per
	614	Maxima [630, 631] - 633 - 6200		959	Ergon [16150/G, 16150/V] - Ergon Junior [16160/G, 16160/V]
	616	Maxima [630, 631] - 633		975	Extra [670/BR] - Extra Lite [676, 678] - Extra Lite Zena [679]
	616/A	Maxima [630, 631] - 633		960	Extra [670/BR] - Extra Lite [676, 678] - Extra Lite Zena [679]
	618	Maya [650, 653] - Quick [659]		962	Evox Proof [7112 Proof]
	988	Proxima Pro [683]		963	1510 Proof - 1515 Proof
	950/1	Winner [910, 914]		964	638 - 640
	950/2	Winner [910, 914]		965	Frog [7210] - Winner [910, 914] - Gecko [7122/V, 7122/AZ]
	950/3	Frog [7210] - Winner [910, 914] - Gecko [7122/V, 7122/AZ]		970	1510 Proof - 1515 Proof
	950/4	638 - 640		977	Kuma [668]
	955 PROOF	Mercury 4 [7070/4RG Proof, 7072/4RG Proof] - Mercury Lite 4 [7080/4RG, 7082/4RG] - Mercury 5 [7075/4RG, 7077/4RG] - Mercury 5 Lite [7095/4RG, 7097/4RG] - Mercury EL [7092Proof, 7094Proof] - Frog [7210 Proof] - Frog Plus [7240 Proof] - Frog Lite [7260 proof] - Winner [910 Proof, 914 Proof] - 7270Proof		1720	Galaxy [9010, 9012, 9016] - Duck [9022, 9024]
	956 PROOF	Titanus [7060/4RG, 7062/4RG]		1722	Galaxy [9010, 9012, 9016] - Duck [9022, 9024]
				1725	Sistema di fissaggio multifunzionale
				980	Meber-X [7300]

SISTEMI DI TRATTENUTA

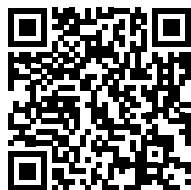

Scopri la gamma dei Sistemi di trattenuta sul sito MeBer
Inquadra con il tuo tablet o smartphone per andare
alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere
un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/sistemi-di-trattenuta.aspx>



CINTURE RAGNO PER SPINALI E ERGON



Art. 9156

X-FIX

Sistema di trattenuta con cinture a moschettoni

Cinghie di trattenimento standard integrate con moschettoni: sistema innovativo pensato per velocizzare e facilitare il lavoro del soccorritore, mantenendo elevato il comfort e la garanzia di stabilità della colonna.



Art. 690

SPIDER

Cinture di immobilizzazione per spinale

Questo sistema di cinture permette di immobilizzare completamente il paziente. Grazie alle cinture trasversali scorrevoli e ai bloccaggi in Velcro® può essere usato facilmente su qualsiasi tavola spinale e per tutti i pazienti.



Art. 692

SPIDER BABY

Cinture di immobilizzazione per spinale pediatrica

Sistema di cinture che permette di immobilizzare completamente il paziente pediatrico sulla tavola "DUCK". Grazie alle cinture trasversali scorrevoli e ai bloccaggi a strappo può essere adattato facilmente a tutti i pazienti.

CINTURE PER SEDIE E AUTOCARICANTI



Art. 612/N-2/MEB



Art. 612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera o arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie.



Art. 610

Cintura toracico-addominale nera con aggancio a 4 punti per sedia imbottita

CINTURE



Art. 605/C

Cintura 1 pz. arancio mm 50, gancio in plastica e nastro MeBer per fissaggio materassi PROOF. (L. 115 cm).



Art. 605/Nmeb

Cintura nera 1 pz. con gancio in plastica mm 50 e nastro MeBer. (L. 192 cm).



Art. 605/MEB

Cintura arancio 1 pz. con gancio in plastica mm 50 e nastro MeBer. (L. MAX 190 cm).



Art. 606-A/MEB

Cintura 1 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 190 cm).



Art. 606-N/MEB

Cintura 1 pz. con gancio in metallo e nastro nero con logo MeBer (L. 190 cm).



Art. 607/A-MEB

Cintura arancio 2 pz. con gancio in plastica e nastro MeBer. Altezza 50 mm (L. intera 135 cm).



Art. F607/B

Cintura blu 2 pz. con gancio in plastica per barella altezza 50 mm. (L. intera 135 cm).



Art. 608-A/MEB

Cintura arancio 2 pz. con gancio in metallo e nastro con logo MeBer (L. 155 cm).



Art. 608/N

Cintura nera 2 pz. con gancio in metallo (L. 155 cm).



Art. 608-N/MEB

Cintura nera 2 pz. con gancio in metallo e nastro con logo MeBer. (L. 155 cm).



Art. 572

Cintura 2 pz. con moschettoni e fibbia a sgancio rapido in metallo e nastro blu MeBer. (L. intera 156 cm).



Art. 568

Cintura arancio 2 pz. con gancio in plastica e nastro MeBer altezza 40 mm. (L. intera 161 cm).

SET CINTURE CON CUSTODIA



Art. 566

Busta nera con 3 cinture Art. 607/ Nmeb a 2 pz. fondo nero e MeBer arancio per sedie Extra.



Art. 574

Busta blu con 3 cinture Art. 572 2 pz. con moschettoni e fibbia a sgancio rapido in metallo e nastro blu MeBer.



Art. 584

Busta nera a 3 cinture art. 568 per barella Ergon.



Art. 604/MEB

Busta arancio con 2 cinture 605/MEB.



Art. F602/B

Busta blu con 3 cinture blu con gancio in plastica a 1 pz.



Art. 602/MEB

Busta arancio con 3 cinture 605/MEB.



Art. 590/N

Busta nera in nylon con 3 cinture nere art. 605/Nmeb, per sedia portantina, a 1 pz. con gancio in plastica.



Art. 603/MEB

Busta in nylon con 3 cinture art. 607/A-MEB.



Art. 603

Busta in nylon con 3 cinture art. 607/A.



Art. 600

Busta con 3 cinture art. 606-A/MEB.



Art. 600/N

Busta con 3 cinture art. 606-N/MEB.



Art. 601

Busta con 3 cinture art. 608-A/MEB.



Art. 601/N

Busta con 3 cinture art. 608-N/MEB.

SUPPORTI BARELLA



Scopri la gamma Supporti sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smart-phone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/supporti.aspx>



MTX



SUPPORTO MONOVANO TRASLABILE PER BARELLA

Art. 19152-130

MTX-AR-130

Supporto barella traslabile ad altezza ridotta (senza vano interno con piano) con ribaltina da 130 mm.



Art. 19130

MTX

Supporto barella traslabile monovano con piano e ribaltina 180 mm. **Certificato EN1789.**

Art. 19130-955

MTX-955

Supporto barella traslabile monovano con piano e ribaltina 180 mm e sistema di fissaggio art. 955 PROOF. **Certificato EN1789.**

Art. 19130-956

MTX-956

Supporto barella traslabile monovano con piano e ribaltina 180 mm e sistema di fissaggio art. 956 PRROF. **Certificato EN1789.**

MTX-2



SUPPORTO DOPPIOVANO TRASLABILE PER BARELLA

Supporto barella traslabile doppiovano con ribaltina da mm 350. L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale. A richiesta è possibile avere i supporti con installati i sistemi di bloccaggio art. 955 o 956.



Art. 19140

MTX-2

Supporto barella traslabile doppiovano con piano e ribaltina 350 mm. **Certificato EN1789.**

Art. 19140-955

MTX-2-955

Supporto barella traslabile doppiovano con piano e ribaltina 350 mm e sistema di fissaggio art. 955 PROOF. **Certificato EN1789.**

Art. 19140-956

MTX-2-956

Supporto barella traslabile doppiovano con piano e ribaltina 350 mm e sistema di fissaggio art. 956 PRROF. **Certificato EN1789.**

Dati tecnici

Art.	Larghezza	Altezza totale	Altezza piano	Lunghezza	Peso	Portata	Traslazione
19130	60,5 cm	20 cm	17 cm	214,5 cm	58 kg	400 kg	30 cm
19130-955	60,5 cm	30 cm	17 cm	214,5 cm	65,7 kg	400 kg	30 cm
19130-956	60,5 cm	30 cm	17 cm	214,5 cm	66,5 kg	400 kg	30 cm
19152-130	60,5 cm	14,3 cm	11,3 cm	208	42 kg	400 kg	30 cm
19140	63 cm	28 cm	25 cm	229 cm	76 kg	400 kg	30 cm
19140-955	63 cm	38 cm	25 cm	229 cm	83,7 kg	400 kg	30 cm
19140-956	63 cm	38 cm	25 cm	229 cm	84,5 kg	400 kg	30 cm

MX | MX-2



SUPPORTO MONOVANO/DOPPIOVANO
FISSO PER BARELLA



Art. 19136

MX

Supporto barella fisso monovano con piano e ribaltina 180 mm.

Certificato EN1789.

Art. 19136-955

MX-955

Supporto barella fisso monovano con piano e ribaltina 180 mm e sistema di fissaggio certificato art. 955 PROOF.

Certificato EN1789.

Art. 19136-956

MX-956

Supporto barella fisso monovano con piano e ribaltina 180 mm e sistema di fissaggio art. 956 PROOF.

Certificato EN1789.

Art. 19146

MX-2

Supporto barella fisso doppiovano con piano e ribaltina 350 mm.

Certificato EN1789.

Art. 19146-955

MX-2-955

Supporto barella fisso doppiovano con piano e ribaltina 350 mm e sistema di fissaggio art. 955 PROOF.

Certificato EN1789.

Art. 19146-956

MX-2-956

Supporto barella fisso doppiovano con piano e ribaltina 350 mm e sistema di fissaggio art. 956 PROOF.

Certificato EN1789.

Dati tecnici

Art.	Larghezza	Altezza totale	Altezza piano	Lunghezza	Peso	Portata
19136	60,5 cm	15,5 cm	12,5 cm	208,5 cm	41,5 kg	400 kg
19136-955	60,5 cm	25,5 cm	12,5 cm	208,5 cm	49,2 kg	400 kg
19136-956	60,5 cm	25,5 cm	12,5 cm	208,5 cm	50 kg	400 kg
19146	63 cm	23,5 cm	20,5 cm	223 cm	59,7 kg	400 kg
19146-955	63 cm	33,5 cm	20,5 cm	223 cm	67,4 kg	400 kg
19146-956	63 cm	33,5 cm	20,5 cm	223 cm	68,2 kg	400 kg
19156-130	62 cm	24 cm	21 cm	205 cm	67 kg	400 kg
19156-130-AL	62 cm	24 cm	21 cm	205 cm	47 kg	400 kg
19162	77,5 cm	27 cm	25 cm	201 cm	75 kg	400 kg

MTX-2R

SUPPORTO DOPPIOVANO
TRASLABILE AD ALTEZZA RIDOTTA



Art. 19156-130



Art. 19156-130-AL



Art. 19156-130

MTX-2R

Supporto traslabile doppiovano ad altezza ridotta, con piano e ribaltina da 130 mm

Supporto barella traslabile doppiovano ad altezza ridotta con piano e ribaltina da mm 130. L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale, nonostante l'altezza ribassata di 40 mm rispetto al supporto MTX-2. **Certificato EN 1789.** Traslazione max 30 cm

Art. 19156-130-AL

MTX-2R AL

Supporto traslabile doppiovano in alluminio ad altezza ridotta, con piano e ribaltina da 130 mm

Ripropone le stesse caratteristiche del supporto MTX-2R, ma presenta una struttura in alluminio che riduce il peso del supporto di 20 kg.

Certificato EN 1789. Traslazione max 30 cm

MTX-2-X

SUPPORTO DOPPIOVANO TRASLABILE
PER BARELLA MEBER-X



Art. 19162

MTX-2-X

Supporto barella traslabile doppiovano con piano speciale per MEBER-X con fori e senza ribaltina



HERCULES

SUPPORTO MOTORIZZATO
DOPPIOVANO TRASLABILE

Bariatric



Art. 19170

MTX-2RIH-AL

Supporto traslabile doppiovano in alluminio ad altezza ridotta con sistema Hercules, piano inox, 955 PROOF e ribaltina da 180 mm con rullo

Hercules è il nuovo supporto barella a caricamento e scaricamento assistito elettricamente.

I sensori di posizionamento integrati e la pulsantiera ridotta rendono Hercules sicuro e di semplice utilizzo. Il caricamento avviene tramite cinghia con terminali ad aggancio rapido, azionata da motore coassiale integrato nel pianale. Nessun ingombro esterno al pianale. Dotato di doppio sistema di

protezione utente per garantire la massima sicurezza durante le fasi di carico e scarico. Dotato di sistema certificato di fissaggio 955 PROOF e ribaltina da 180 mm. L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale, nonostante l'altezza ribassata di 40 mm rispetto al supporto MTX-2.

Certificato EN 1789. Traslazione: mm 300.

Dati tecnici

Art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza piano	Altezza totale	Peso	Portata	Traslazione
19170	216,5 cm	57,8 cm	21 cm	34 cm	65 kg	400 kg	30 cm (15 + 15)



Motore ad elevata efficienza

Per una ottimale assistenza al caricamento di pazienti bariatrici e non solo.



Art. 19170 + 955 PROOF +
7270 + 12084 + 12170 + 12172 + 7013/N

Doppio alloggiamento
Ergon/Spinale/Cucchiaio



Plancia comandi

ACCESSORI

SUPPORTI BARELLA SERIE MTX E MX



Art. 19110

Piano inox mm 1940 x 572 con attacchi per traslatori MTX, MTX-2 e MX.



Art. 19112

Ribaltina mm 100 con attacchi per supporti.



Art. 19114

Ribaltina mm 130 con attacchi per supporti.



Art. 19116

Ribaltina mm 180 con attacchi per supporti.



Art. 19118

Ribaltina mm 350 con attacchi e molla a gas.



Art. 787L

Molla a gas per spondina piano di carico.



SUPPORTI BARELLA CON RULLO PER PIANO TRASLATORE




Art. 19115

Ribaltina mm 180 con fianchetti e rullo per piano traslatore



Art. 19123

Ribaltina mm 130 con fianchetti e rullo per piano traslatore

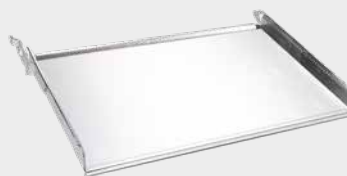

Art. 19188

Ribaltina mm 350 con fianchetti, molla a gas e rullo per piano traslatore

Dati tecnici

Art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
19110	194 cm	57,2 cm	3 cm	16,3 kg
19112	10 cm	62 cm	4,7 cm	1,4 kg
19114	13 cm	61 cm	4,7 cm	1,7 kg
19115	18 cm	62,5 cm	4,7 cm	2,8 kg
19116	18 cm	63 cm	4,7 cm	2,3 kg
19118	35 cm	62 cm	5,4 cm	4,3 kg
19123	13 cm	60,5 cm	4,7 cm	2,3 kg
19188	35 cm	62 cm	6,2 cm	6 kg

GRADINI AUTOMATICI





Scopri la gamma Gradini automatici sul sito MeBer. Inquadra con il tuo tablet o smart-phone per andare alla pagina dedicata sul sito. Potrebbe richiedere un'applicazione gratuita non installata di default.



Oppure digita:

<https://www.meber.it/it/prodotti/gradini-dynastep.aspx>

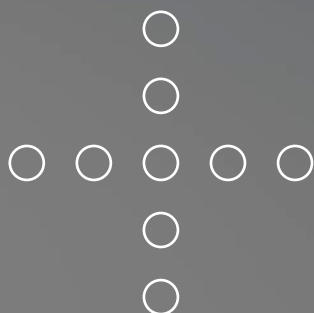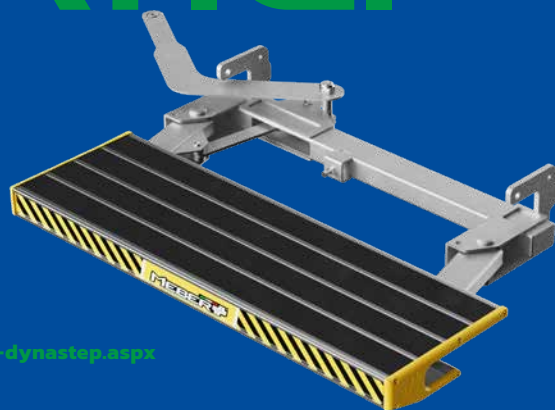

DYNASTEP

GRADINO AUTOMATICO
AD AZIONAMENTO MECCANICO



Art. 19302

DYNASTEP 800

Gradini automatici ad azionamento meccanico - 800 mm

Art. 19300

DYNASTEP 1120


Gradini automatici ad azionamento meccanico - 1120 mm

DynaStep è la gamma di gradini automatici ad azionamento meccanico di Me.Ber.. Sono due modelli, con larghezza da 800 o 1120 mm, entrambi realizzati con soluzioni e materiali di alta qualità come leghe di alluminio, acciaio (per le parti in movimento e ad alto carico) e polimeri plastici ad alta resistenza. Tutto ciò permette una portata massima di 300 kg, il che rende questi dispositivi ideali anche per pazienti bariatrici. I gradini DynaStep possono essere installati su ogni tipo di veicolo commerciale dotato di portellone laterale, grazie ai kit specifici di installazione disponibili come optional. Quattro strisce di materiale antisdrucciolo garantiscono un appoggio sicuro anche in presenza di acqua e fango.

Dati tecnici

Art.	Materiale pedana	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso*	Portata
19302	alluminio	82 cm	26 cm	6,5 cm	17,3 kg	300 kg
19300	alluminio	114 cm	26 cm	6,5 cm	19,3 kg	300 kg



*escluso il meccanismo di apertura e chiusura

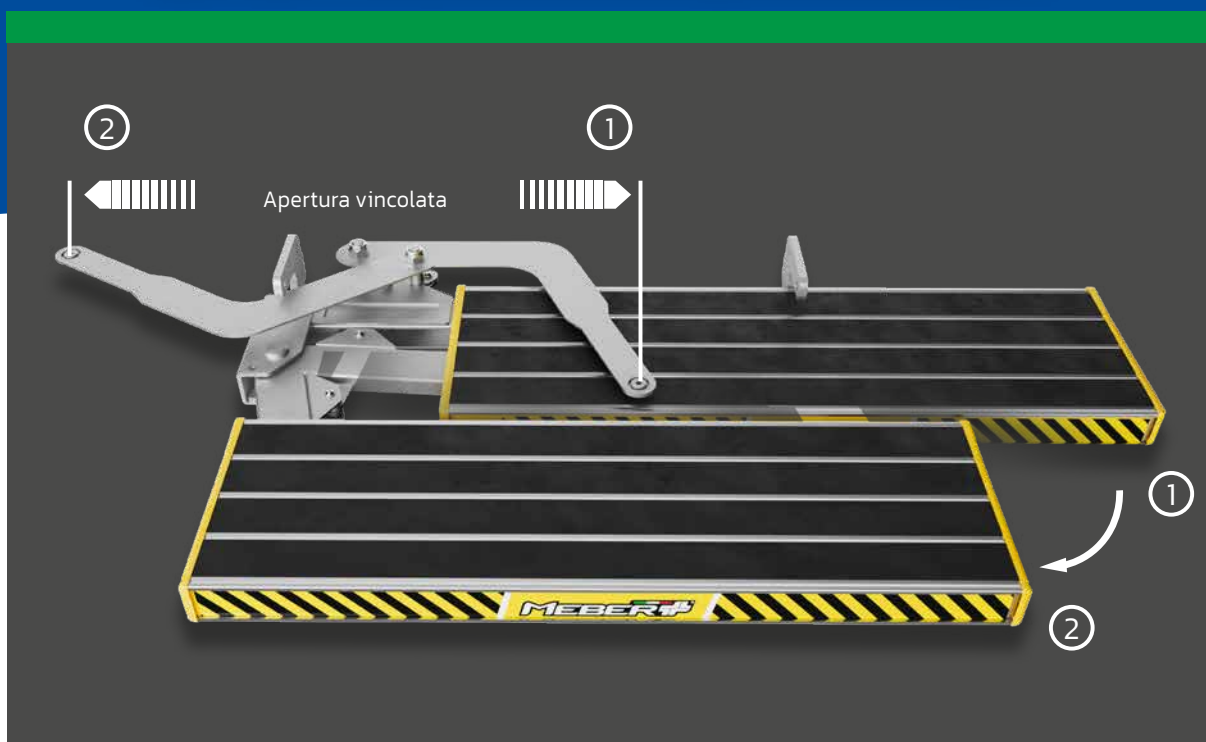

L'apertura del gradino avviene in modo meccanico ed è vincolata all'apertura del portellone laterale del veicolo.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa in quanto non consente errori di apertura o chiusura accidentale.

Lo spessore è di 65 mm ed è tra i più ridotti sul mercato; questa caratteristica garantisce di operare in sicurezza anche in presenza di dossi, cordoli, asperità e/o cambi di pendenza repentini del piano stradale. Grazie al materiale catarifrangente degli adesivi, i gradini sono altamente visibili anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

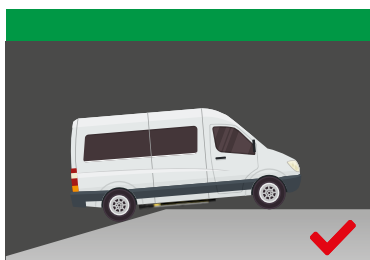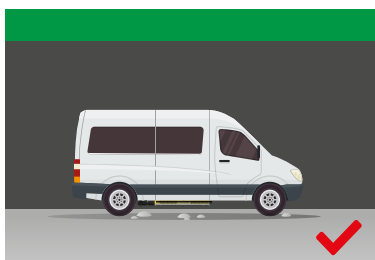

→ ACCESSORI




Art. 19310

Kit staffe di montaggio gradino meccanico per Fiat Ducato e Citroën Jumper



Art. 19312

Kit staffe di montaggio gradino meccanico per Iveco Daily

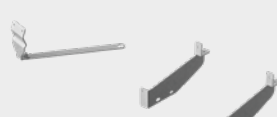

Art. 19314

Kit staffe di montaggio gradino meccanico per Mercedes Sprinter e Volkswagen Crafter



Art. 19316

Kit montaggio gradino meccanico "Dynastep" per Mercedes Sprinter e VW Crafter 4x4

E-DYNASTEP

GRADINO AUTOMATICO
AD AZIONAMENTO ELETTRICO



Art. 19330

E-DYNASTEP 800

Gradini automatici ad azionamento elettrico - 800 mm

Art. 19332


E-DYNASTEP 1120

Gradini automatici ad azionamento elettrico - 1120 mm

E-DynaStep è la nuova gamma di gradini automatici ad azionamento elettrico di Me.Ber.. Sono due modelli, con larghezza da 800 o 1120 mm, entrambi realizzati con soluzioni e materiali di alta qualità come leghe di alluminio, acciaio e polimeri plastici ad alta resistenza. Tutto ciò permette una portata massima di 300 kg, il che rende questi dispositivi ideali anche per pazienti bariatrici. I gradini E-Dynastep possono essere installati su ogni tipo di veicolo commerciale dotato di portellone laterale, grazie ai kit specifici di installazione disponibili come optional. Quattro strisce di materiale antisdrucciolo garantiscono un appoggio sicuro anche in presenza di acqua e fango.

Dati tecnici



Art.	Materiale pedana	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso	Portata
19330	alluminio	82 cm	26 cm	6,5 cm	18,8 kg	300 kg
19332	alluminio	114 cm	26 cm	6,5 cm	20,3 kg	300 kg

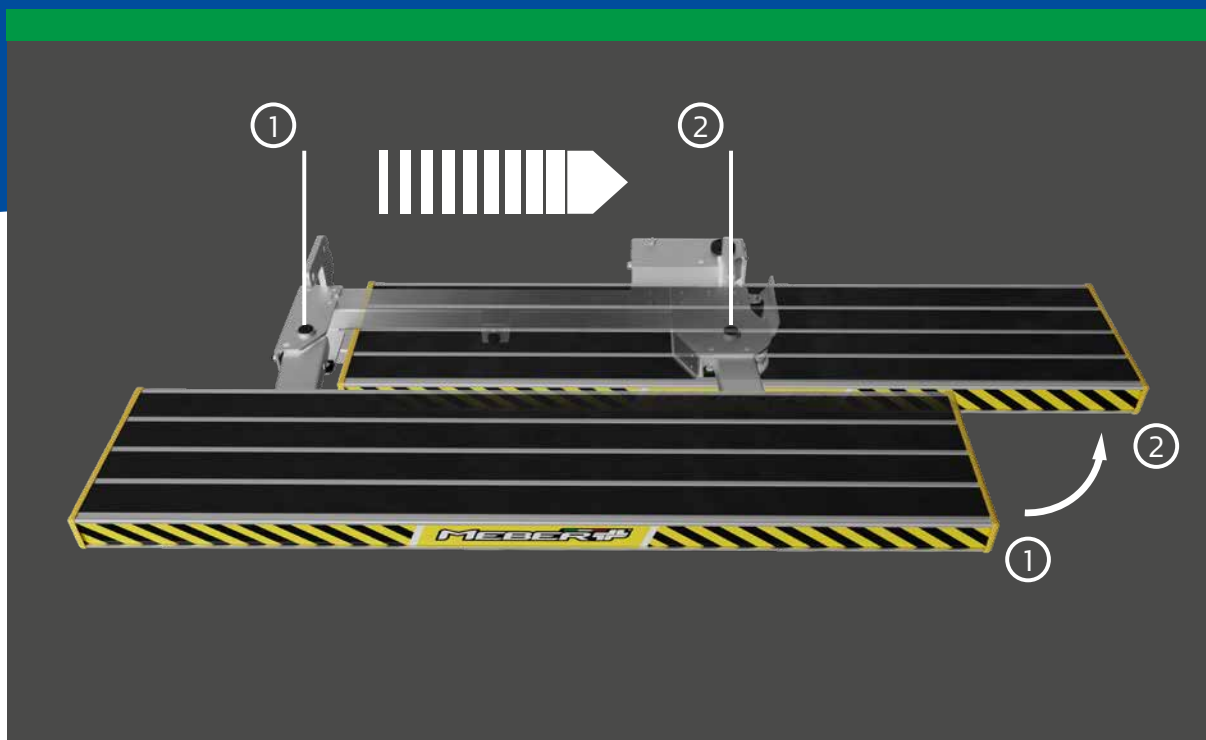

L'apertura del gradino avviene in modo elettrico ed è vincolata all'apertura del portellone laterale del veicolo.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa in quanto non consente errori di apertura o chiusura accidentale.

Lo spessore, è di 65 mm ed è tra i più ridotti sul mercato; questa caratteristica garantisce di operare in sicurezza anche in presenza di dossi, cordoli, asperità e/o cambi di pendenza repentini del piano stradale. Grazie al materiale catarifrangente degli adesivi, i gradini sono altamente visibili anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

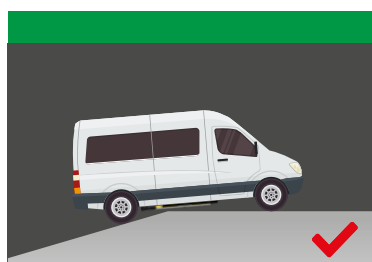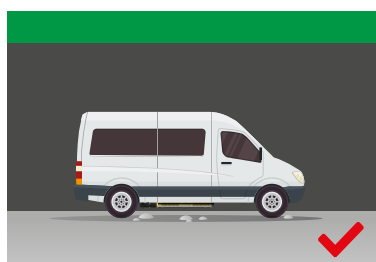


→ ACCESSORI




Art. 19320

Kit staffe di montaggio gradino elettrico "E-Dynastep" per Renault Master

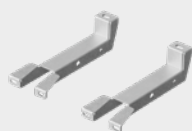

Art. 19322

Kit staffe di montaggio gradino elettrico "E-Dynastep" per Fiat Ducato

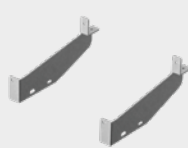

Art. 19324


Kit staffe di montaggio gradino elettrico "E-Dynastep" per Mercedes Sprinter



Art. 19328

Kit staffe di montaggio gradino elettrico "E-Dynastep" per Ford Transit 4x4


VETERINARIA

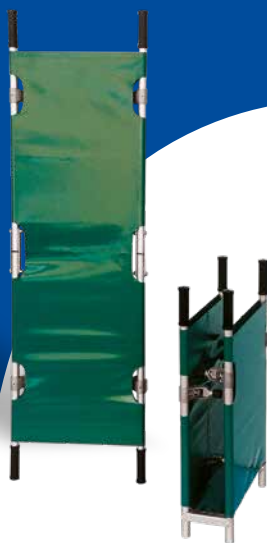

Art. 6100

Barella pieghevole lunga per uso veterinario

Barella pieghevole in due con piedini e maniglie costruita in alluminio, con telo in PVC impermeabile e antistrappo. Ideale per il trasporto in ambulatorio. È di facile collocazione. Disponibile in due diverse dimensioni.

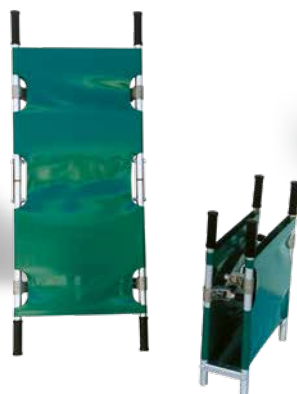

Art. 6150

Barella pieghevole corta per uso veterinario

Barella pieghevole in due con piedini e maniglie costruita in alluminio, con telo in PVC impermeabile e antistrappo. Ideale per il trasporto in ambulatorio. È di facile collocazione.



Art. 6200/V

Barella a cucchiaio per uso veterinario

Costruita interamente in alluminio permette, grazie alla possibilità di dividersi in due, di posizionare il paziente senza doverlo rimuovere. Viene fornita con due cinture a sgancio rapido.



Art. 6300/B

Materasso a depressione per uso veterinario


Questo articolo consente di immobilizzare e trasportare il paziente avvolgendolo nel materasso. Prodotto in PVC non assorbe ed è facile da pulire. Dotato di 4 maniglie per il trasporto.



Art. 896/DF

Pompa per depressione

Pompa in ABS per la depressione del materasso. Può essere usata anche per gonfiare.

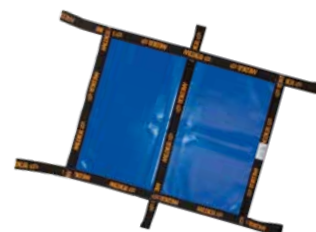

Art. 6315

Telo da trasporto a 6 maniglie

Telo da trasporto animali realizzato in nylon ignifugo, antistrappo ed impermeabile.

Dimensioni: cm 75 x 100.

Dati tecnici

Art.	Lunghezza	Lunghezza telo	Larghezza	Altezza	Altezza ripiegata	Spessore	Peso
6100	167 cm	140 cm	50 cm	13 cm	83 cm	13 cm	5,5 kg
6150	127 cm	100 cm	50 cm	13 cm	63 cm	13 cm	5,5 kg
6200/V	130 cm	-	42 cm	7 cm	-	-	7,8 kg
6300/B	100 cm	-	65 cm	-	-	-	3,5 kg

NOTE

NOTE

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

→ ORDINI

Per un servizio più celere e preciso si prega di inoltrare gli ordini a mezzo fax, lettera o e-mail. Gli stessi dovranno essere completi di dati anagrafici, PIVA e Codice Fiscale e dovranno specificare chiaramente codice e descrizione dell'articolo.

→ PREZZI

I prezzi di listino possono subire variazioni in qualsiasi momento (senza obbligo di preavviso). I prezzi di listino si intendono al netto di I.V.A. e sono quotati franco ns. magazzino di Fontanini (PR).

→ CONSEGNE

Il materiale viaggia a rischio del cliente.

→ IMBALLAGGI

L'imballo standard è fornito gratuitamente.

→ GARANZIA

Gli articoli sono garantiti per 12 mesi. La garanzia copre i danni e/o le rotture causate da difetti nei materiali impiegati, difetti di lavorazione o imperfetto montaggio, inoltre decade se i prodotti non sono utilizzati correttamente, se sono alterati e/o riparati da personale non autorizzato da Me.Ber.

→ PAGAMENTI

I pagamenti si intendono sempre anticipati o in contrassegno. Altre condizioni di pagamento dovranno essere concordate con il nostro ufficio commerciale o con i nostri collaboratori di zona. Gli eventuali insoluti verranno riaddebitati con gli interessi in vigore oltre a spese fisse di 26,00 €.

→ RECLAMI

Si accettano reclami solo entro 8 gg. dal ricevimento del materiale.

→ RESI

I resi verranno accettati solo previa autorizzazione da parte del nostro ufficio commerciale ed in porto franco.

→ CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il solo Foro competente è quello di Parma.

CATALOGO PRODOTTI 2027

Barelle
Barelle e carrelli autocaricanti
Sedie portantine
Accessori
Immobilizzazione
Diagnostica
Rianimazione
Ausili primo soccorso
Sistemi di fissaggio
Sistemi di trattenuta
Supporti
Gradini automatici
Veterinaria
Pediatria
Prodotti certificati 10G

GraphoServiceParma

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale



SEDE

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770
Fax +39 0521 648780
e-mail: contact@meber.it



MAGAZZINI

Via Widar Cesarini Sforza 16-20/A
43124 Corcagnano (PR)

Via delle Corbellicce n. 5
Loc. Valenzatico - 51039 Quarrata (PT)