

MEBERIT

**LO STANDARD
DELL'ECCELLENZA**

**THE STANDARD OF
EXCELLENCE**

MERCURY

SELF-LOADING STRETCHER

Barella autocaricante multilivello
Multilevel self-loading stretcher



www.meber.it

Art. 12018N
Asta portaflebo telescopica

Art. 12018N
Telescopic foldable phlebotomy stand for self loading stretchers

MERCURY, LA BARELLA UNIVERSALE

Mercury è la barella Me.Ber. pensata per fornire il miglior supporto operativo in ogni scenario di soccorso. Qui presentata con tutti i suoi dispositivi opzionali installati, si può capire come sia facilmente adattabile alle singole esigenze.

MERCURY, MULTIPURPOSE STRETCHER

Mercury is designed to provide the best operational support in every scenario rescue. Easily adaptable to individual needs, thanks to all optional devices as shown here.

Art. 12025
Tasca portaggetti multiuso

Art. 12025
Black multi usage object holder for automatic loading stretcher

Art. 939 Piano portastrumenti

Art. 939 Instrument support for stretchers

Art. 7080/4RG Proof

Portabombola professionale
4 modelli disponibili

"COVER OX 2-3 or 5 lt"
professional cylinder holder for oxygen bottles
4 models available

MERCURY

SELF LOADING STRETCHER

LA GAMMA MERCURY THE MERCURY RANGE

ESPERIENZA

Conosciamo il mondo del soccorso perchè è da 30 anni che ne facciamo parte al fianco di operatori e strutture sanitarie. I nostri prodotti sono il frutto di un processo unico di ideazione e continuo perfezionamento.

EXPERIENCE

We know the world of medical rescue because we are part of it since 30 years, side by side with operators and health facilities. Our products are the result of a unique workflow of design and continuous improvement.

LA BARELLA. COME LA VOLETE VOI.

Sicura e super-affidabile

Mercury è pensata per essere una barella universale, adatta ad ogni tipo di intervento e capace di adattarsi al modo di lavorare degli operatori. Per questo è uno dei prodotti più apprezzati di Me.Ber. tanto che viene utilizzata ogni giorno da migliaia di operatori in tutto il mondo.

THE STRETCHER . AS YOU WANT IT.

Safe and reliable

Mercury is designed to be a multipurpose stretcher, suitable for every kind of operation and capable of adapting the way of working of the operators. For this reason it is one of the most appreciated Me.Ber products, so much that it is used every day by thousands of operators all over the world.



Asta portaflebo optional
Optional phlebotomy stand

250KG
PORTATA MASSIMA

250KG
MAXIMUM LOAD

MERCURY

SELF LOADING STRETCHER

IDEALE IN OGNI SITUAZIONE IDEAL IN EVERY SITUATION

TRAUMA

Le grandi ruote da 200mm permettono di affrontare le asperità del terreno riducendo i sobbalzi che sono particolarmente dannosi per un paziente traumatico. L'altezza minima permette un agevole caricamento da terra di pazienti spinalizzati.

Art. 12080
MBP pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti

Art. 12080
MBP wide bariatric platform for self-loading stretchers



TRAUMA

The large 200mm wheels allow to face the roughness of the ground by reducing jolts that are particularly harmful for a traumatic patient. The minimum height allows easy loading from the ground of spinalized patients.

BIOCONTENIMENTO

Mercury è stata largamente utilizzata come vettore per sistemi di biocontenimento nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Le sue doti di affidabilità, capacità di carico e facilità di sanificazione hanno permesso di operare in sicurezza anche in questo contesto.

ANTISHOCK

Grazie alla posizione Trendelenburg è possibile gestire in sicurezza un paziente a rischio di shock consentendo il sollevamento delle gambe per una migliore circolazione del sangue.

BARIATRICA

Con una portata di 250kg Mercury è l'ideale anche in presenza di pazienti bariatrici. Nonostante l'elevata portata Mercury è leggera e resistente.

BIO-HAZARD CONTAINMENT

Mercury has been widely used as carrier for bio-containment systems during the COVID-19 emergency. Its qualities of reliability, load capacity and ease of sanitization made it the best choice to operate in safety also in this context.

ANTISHOCK

Thanks to Trendelenburg position, you can safely manage a patient at risk of shock by allowing the leg to lift for a better blood circulation.

BARIATRIC

Mercury is perfect also for bariatric patients, thanks to its maximum load capacity of up to 250 kg. Although this big load capacity, Mercury is light and sturdy.

LA GAMMA MERCURY THE MERCURY RANGE



MERCURY

Art. 7070 PROOF
Art. 7072 PROOF

- 10G
- SS
- T
- 3L
- 2W



MERCURY⁴

Art. 7070/4RG PROOF
Art. 7072/4RG PROOF

- 10G
- SS
- T
- 3L
- 4W



MERCURY LITE⁴

Art. 7080/4RG PROOF
Art. 7082/4RG PROOF

- 10G
- AL
- T
- 3L
- 4W

- ▲ Certificata 10G
10G certified
- ▲ Materiale telaio
Frame Material
- ▲ Trendelenburg
- ▲ Numero livelli
Levels number
- ▲ Ruote girevoli
Swiveling wheels

TELAIO IN ACCIAIO

Una solida sicurezza

Il telaio in acciaio conferisce robustezza e solidità alla barella garantendo altissimi livelli di sicurezza per operatori e pazienti.

STAINLESS STEEL FRAME

A strong safety

The stainless steel frame gives sturdiness and solidity to the stretcher, guaranteeing high safety levels for operators and patients.

TELAIO IN ACCIAIO E QUATTRO RUOTE GIREVOLI

Versatile in ogni situazione

Dotata di sistema di sblocco delle ruote anteriori per ottenere il massimo grado di libertà di movimento. Il comando per attivare la funzionalità delle quattro ruote girevoli è facilmente accessibile sui lati delle gambe anteriori. Il meccanismo, una volta riportato in posizione di blocco viene azionato automaticamente non appena le ruote tornano ad essere in posizione longitudinale rispetto alla barella.

STAINLESS STEEL WITH 4 ROTATING WHEELS

VERSATILE IN EVERY SITUATION

Equipped with front wheel release system to obtain the maximum degree of freedom of movement. The command to activate the functionality of the four rotating wheels is easily accessible on the side of the front legs. This mechanism is engaged again once brought back into its initial lock position, as soon as the wheels are longitudinally aligned.

TELAIO IN LEGA LEGGERA E QUATTRO RUOTE GIREVOLI

Leggera e affidabile

Una perfetta combinazione di leggerezza, affidabilità e versatilità operativa. Costruita con leghe leggere di alluminio, Mercury Lite 4 è la sintesi perfetta di un grande prodotto nella sua configurazione più evoluta. Naturalmente anche Mercury Lite ha il telaio "Safe Frame" per garantire la massima rigidità strutturale.

LIGHT ALUMINIUM ALLOY WITH 4 ROTATING WHEELS

LIGHT AND RELIABLE

A perfect combination of lightness, reliability and operational versatility. Built with light Aluminum alloys, Mercury Lite 4 is the perfect synthesis of a great product in its most advanced configuration. Of course, Mercury Lite also has the "Safe Frame" concept in order to ensure maximum structural rigidity.

★ **RAPPORTO PESO/PORTATA**
ECCELLENTE SU TUTTA LA GAMMA MERCURY

★ **EXCELLENT WEIGHT/LOAD RATIO**
ACROSS ALL MERCURY RANGE

TUTTO CIÒ CHE SERVE A PORTATA DI MANO EVERYTHING YOU NEED AT YOUR FINGERTIPS



Sblocco della rotazione delle ruote girevoli anteriori

Unlock the rotation of the rotating front wheels



Posizione intermedia per il caricamento del paziente direttamente dal letto o per consentirgli una agevole seduta se camminante

Intermediate position for loading the patient directly from the bed or to allow him a comfort sitting

POSIZIONE BASE

Recupero a terra

Per facilitare il caricamento dal livello del piano stradale o per tutti i casi in cui il paziente si trovi a terra. Particolarmente utile per limitare gli sforzi nella movimentazione di pazienti spinalizzati.



BASE LEVEL

Ground level rescue

To facilitate loading from the floor level or for all cases where the patient is on the ground. Particularly useful for limiting efforts in movement of spinalized patients.



3 POSIZIONI
3 POSITIONS



Comandi semplici ed intuitivi con meccanismi di sicura

Simple and intuitive controls with safety mechanism



Schienale e Trendelenburg regolabili

Adjustable backrest and Trendelenburg

PERCHÉ GLI OPERATORI AMANO MERCURY? WHY OPERATORS DO LOVE MERCURY?





Schienale con pistone pneumatico regolabile su infinite posizioni

Backrest supported with hydraulic ram, adjustable on infinite positions

Carrello anteriore abbattibile con alloggiamento porta documenti/oggetti

Foldable loading trolley with space for object holder

-300mm

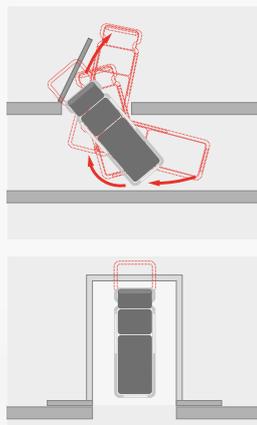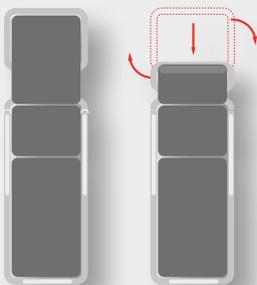

Nei corridoi, nei vani ascensore e nei montacarichi

In the corridors, in the elevators and in freight elevators.

MERCURY: PAROLA CHIAVE PER L'ECCELLENZA MERCURY: KEYWORD FOR EXCELLENCE

Asta portaflebo optional
Optional phlebotomy stand



TELAIO SAFE-FRAME

Un pezzo unico

Il telaio della barella sopporta sollecitazioni meccaniche di elevata portata, per questo Mercury adotta la filosofia costruttiva MeBer Safe Frame che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento la struttura è estremamente rigida e sicura e non è soggetta ad indebolimenti.

SAFE-FRAME TECHNOLOGY

A single piece

The stretcher frame bears high flow mechanical stress. This is why Mercury adopts MeBer Safe Frame construction philosophy, that is a single frame. Thanks to this important expedient, the structure is extremely sturdy and safe, not subject to impairments/weakening.



Sistema di
fissaggio 10g

10g Fixing system



PENSATA PER GLI OPERATORI **SICURA PER I PAZIENTI** **IDEALE PER LE ASSOCIAZIONI**



PISTONE CENTRALE

Sicurezza attiva

Il potente pistone idraulico assicura che le gambe anteriori si aprano in ogni situazione, con e senza il paziente caricato. Ciò rende di fatto impossibile che per qualche ragione l'apertura fallisca con evidenti gravissimi effetti sul paziente, i soccorritori e l'attrezzatura.

CENTRAL HYDRAULIC RAM

Active safety

The powerful hydraulic piston ensures that the front legs open in any situation, with or without the patient loaded onto the stretcher. This makes it almost impossible that for some reason the opening fails with unlikely effects on the patient, rescuers and equipment.



CARICAMENTO SEMPLIFICATO

Mercury è dotata di accorgimenti che semplificano il caricamento allo scopo di rendere l'operazione più leggera dal punto di vista fisico e più sicura per pazienti ed operatori.

SIMPLIFIED LOADING

Mercury is equipped with devices that simplify loading in order to make the various operations physically lighter and safer, both for operators and patients.

DESIGNED FOR OPERATORS
SAFE FOR PATIENTS
IDEAL FOR ASSOCIATIONS

Mercury è stata prodotta in migliaia di esemplari ed è costantemente oggetto di implementazioni per essere sempre in linea con le aspettative dei più esigenti soccorritori di tutto il mondo. Mercury è un prodotto che pone la sicurezza al centro. Per questa ragione è la scelta migliore per le associazioni e le strutture che sono chiamate a rispondere della salute e della sicurezza dei propri operatori, dei pazienti e anche degli occupanti dell'ambulanza in caso di incidente.

Mercury has been produced in thousands of units and it is constantly object of implementations to always be in line with the expectations of the most demanding rescuers from all over the world. Mercury is a product that puts safety at the center. For this reason it is the best choice for the structures that must guarantee the health and safety of its operators, patients and also of the ambulance passengers in the event of an accident.



PRIORITÀ: SICUREZZA PRIORITY: SAFETY

1



SICUREZZA GENERALE Antiribaltamento

L'interasse tra le ruote anteriori e posteriori è tale da garantire l'antiribaltamento in ogni posizione.

GENERAL SAFETY Anti-rollover

The wheelbase between the front and rear wheels is such as to guarantee anti-rollover in any position.

2



SICUREZZA PER TUTTI CON LA CERTIFICAZIONE 10G

Massima sicurezza in caso di incidente stradale

MeBer è stata la prima azienda a certificare i prodotti per renderli conformi alle normative 10G. Molti test vengono eseguiti autonomamente con speciali attrezzature costruite allo scopo, questo per garantire la massima serietà nelle dichiarazioni che vengono rese agli operatori e al mercato.

SAFETY FOR EVERYONE WITH 10G CERTIFICATION

Maximum safety in the event of a road accident

MeBer was the first company to certify products to be compliant to the 10g regulations. Many tests are performed with special equipment especially built for the purpose, this to ensure maximum seriousness in the statements that are given to operators and to the market.

SICUREZZA OPERATORI

Protezione della schiena e antischiacciamento

I comandi e gli azionamenti di Mercury sono pensati per chi li deve usare. La sicurezza viene prima di tutto e quindi maniglie, leveraggi, ecc. sono realizzati in modo da evitare infortuni durante l'utilizzo. Il pistone centrale e la geometria costruttiva di Mercury sono inoltre pensati per bilanciare correttamente i carichi per evitare l'eccessivo affaticamento della schiena.

OPERATORS SAFETY

BACK PROTECTION AND ANTI-CRUSHING

Mercury controls and drives are designed for the final users. The safety comes first and then handles, levers, etc are designed to avoid accidents during the usage. The central piston and MeBer construction geometry are designed to correctly balance the loads, in order to avoid an excessive fatigue of the back.

3



4

RUOTE DA 200mm

Autocentranti

Ruote grandi da 200mm per affrontare superfici di ogni tipo e autocentranti per facilitare il caricamento sull'ambulanza.

200mm WHEELS

Self-centering

Large 200mm wheels to deal with all types of surfaces and self-centering to facilitate loading onto the ambulance.



MERCURY

Barella autocaricante certificata
Certified self-loading stretcher

Model	Colore Colour	Materiale Material	Altezza regolabile Adjustable height	Trendelenburg	Altezza intermedia Intermediate height	Altezza massima Max height	Altezza massima di carico Max loading height	Altezza minima di carico Min loading height	Altezza ripiegata Folded height	Larghezza Width	Lunghezza Length	Lunghezza minima Min length	Peso Weight	Portata Loading capacity
			cm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg

MERCURY

Barella autocaricante inox certificata ad altezza variabile
Certified Stainless steel self-loading stretcher with variable height

7070 PROOF	■	Acciaio INOX Stainless steel	✓	✓	72	95	66	64	31	57	197	165	42	250
7072 PROOF	■	Acciaio INOX Stainless steel	✓	✓	75	99	71	69	31	57	197	165	43	250

MERCURY 4

Barella autocaricante inox certificata ad altezza variabile con 4 ruote girevoli
Certified Stainless steel self-loading stretcher with variable height with 4 rotating wheels

7070/4RG PROOF	■	Acciaio INOX Stainless steel	✓	✓	72	95	66	64	31	57	197	165	44	250
7072/4RG PROOF	■	Acciaio INOX Stainless steel	✓	✓	75	99	71	69	31	57	197	165	45	250

MERCURY LITE 4

Barella autocaricante in alluminio certificata ad altezza variabile con 4 ruote girevoli
Certified Stainless light aluminium self-loading stretcher with variable height with 4 rotating wheels

7080/4RG PROOF	□	Alluminio verniciato Painted aluminium	✓	✓	72	95	66	64	31	57	197	165	40	250
7082/4RG PROOF	□	Alluminio verniciato Painted aluminium	✓	✓	75	99	71	69	31	57	197	165	40,5	250

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780

| e-mail: info@meber.it