

**MEBER** 



## **MERCURY CINQUE** **LITE**

Barella autocaricante a 5 altezze  
5 levels self-loading stretcher

[www.meber.it](http://www.meber.it)

# CINQUE

Codice - Article Code

**7095/4RG PROOF**

SOLO | ONLY\*

**41**Kg

STESSA PORTATA | SAME MAX LOAD

**250**Kg

\* dato riferito a modello,  
data referred to model:  
7095/4RG Proof

**PIÙ LEGGERA**

**CISONO COSE CHE NON POTETE FARE.  
CON LE ALTRE BARELLE.**

Mercury Cinque è derivata da uno dei progetti di maggiore successo nell'ambito del soccorso, sicuramente il prodotto Me.Ber. più apprezzato, la Mercury 4RG. Mercury Cinque ha lo scopo di estendere ulteriormente le capacità operative del modello originale grazie all'introduzione della logica a 5 livelli, cinque altezze, come vengono comunemente chiamate. Mercury Cinque però è molto di più di un'evoluzione! È l'unica barella a cinque altezze con carrello anteriore abbattibile (d'altra parte a cosa vi serve una barella che vi aiuta a caricare un paziente dal suo letto, se non riuscite a passare tra gli ambienti stretti di un'abitazione?) ed anche l'unica che vi garantisce la portata massima di 250 kg su tutti e cinque i livelli.



LIGHTER

**THERE ARE THINGS YOU CANNOT DO.  
WITH THE OTHER STRETCHERS.**

Mercury Cinque is derived from one of the most successful projects in the field of rescue, certainly the Me.Ber product. Most appreciated, the Mercury 4RG. Mercury Cinque is intended to further extend the operational capabilities of the original model by introducing 5-level logic, five heights, as they are commonly called. Mercury Cinque is much more than an evolution though! It is the only five-height with a folding front trolley (on the other hand, what do you need a stretcher to help you load a patient from his bed, if you can't get through the narrow spaces of a house?) also the only one that guarantees you the maximum capacity of 250 kg on all five levels.

# PERCHÉ CINQUE ALTEZZE? WHY FIVE LEVELS?



1

## LIVELLO DI CARICO Massima altezza

Caricamento sul mezzo, movimentazione a terra, trasferimento finale in Pronto Soccorso o sala operatoria, trattamento o triage sul campo.

## LOAD LEVEL Loading height

Loading on the vehicle, handling on the ground, final transfer to the emergency room or operating room, treatment or triage on the site.

## POSIZIONE ALTA Recupero alto

Adatta come posizione di riposo. Altezza ideale per la collocazione del paziente spinalizzato.

## HIGH LEVEL High rescue

Suitable as a resting position. Ideal height for the placement of a spinalized patient.



2



3

## INTERMEDIA Letto alto

Altezza tipica di un letto di uso ospedaliero o altezza idonea a far sedere il paziente deambulante. Altezza ideale per la traslazione da barella a sedia e viceversa.

## INTERMEDIATE High Bed

Typical height of a hospital bed or height suitable for seating ambulatory patients. Ideal height to transfer the patient from stretcher to chair and vice versa.

## POSIZIONE BASSA Letto o divano di casa

Altezza tipica di un divano o di un letto di un'abitazione. Questa altezza permette una facile traslazione del paziente collaborante e semplifica il passaggio via barella.

## LOW LEVEL Bed or Sofa

Typical height of a sofa or a bed. This height allows easy transfer of a collaborating patient and simplifies the transfer on the stretcher.



4

5



## POSIZIONE BASE Recupero a terra

A soli 30cm dal terreno permette tutte le operazioni di carico convenzionali garantendo portata di 250 kg.

## BASE LEVEL Ground level rescue

At only 30cm from the ground, it allows all conventional operations with a maximum load of 250 kg.

## PERCHÉ UNA CINQUE ALTEZZE ME.BER.?

## WHY A ME.BER. WITH FIVE HEIGHTS?

### ESPERIENZA

Conosciamo il mondo del soccorso perché è da oltre 30 anni che ne facciamo parte al fianco di operatori e strutture sanitarie. I nostri prodotti sono il frutto di un processo unico di ideazione e continuo perfezionamento.

### EXPERIENCE

We know the world of medical rescue because we are part of it since 30 years, side by side with operators and health facilities. Our products are the result of a unique workflow of design and continuous improvement.



Certificazione 10G a norma  
UNI EN 1865/UNI EN 1789

UNI EN 1865/UNI EN 1789  
10G certified



**Caricamento  
semplificato**

Easy  
loading



Codice - Article Code

**7095/4RG PROOF**

Codice - Article Code

**7095/4RG PROOF**

**ACCEDERE E MANOVRARE IN  
SPAZI STRETTI. UNA SFIDA PER  
OGNI BARELLA.**

**ACCESS AND TIGHT  
MANOEUVRING.  
A CHALLENGE FOR EVERY  
STRETCHER.**



**PER OTTENERE IL  
MASSIMO DELLA  
FLESSIBILITÀ DELLE  
5 ALTEZZE**

Mercury Cinque è stata progettata per i soccorritori, pensando alle loro esigenze e facendo tesoro dei loro suggerimenti. Come ogni altra Mercury, anche Mercury Cinque dispone del carrello anteriore abbattibile, fondamentale per muoversi agevolmente in ogni ambiente e circostanza. Questo non è un piccolo dettaglio, soprattutto se si pensa che finora nessun'altra barella a cinque altezze possiede questa caratteristica.

**TO GET THE  
MAXIMUM  
FLEXIBILITY  
OF THE 5 HEIGHTS**




Mercury Cinque was designed for first rescuers, with their needs in mind and their suggestions. Like any other Mercury, the Mercury Cinque also has a folding front trolley essential for moving easily in any environment and circumstance. This is no small detail, especially considering that so far no other five-height stretcher has this feature.



**Ruote da 200 mm  
ideali anche su terreni  
sconnessi**

200 mm wheels ideal  
even on difficult grounds

# MERCURY CINQUE LITE

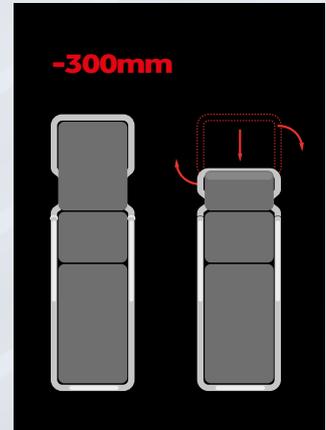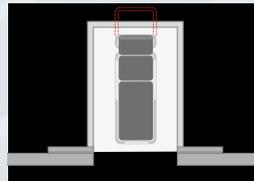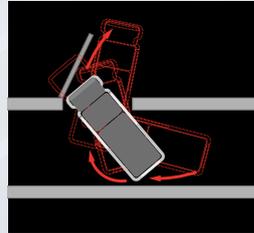

Sblocco carrello

Unlocking the front  
trolley (of the stretcher)



**CARRELLO ANTERIORE  
ABBATTIBILE. QUESTO  
FA LA DIFFERENZA.**

**FOLDING FRONT TROLLEY.  
OUR QUALITY MAKES  
THE DIFFERENCE.**

**INCREDIBILMENTE LEGGERA**  
**ADATTA A TUTTI GLI**  
**EQUIPAGGI.**

**INCREDIBLY LIGHT.**  
**SUITABLE TO ALL OPERATORS.**

### SAFE-FRAME

Mercury Cinque adotta la filosofia costruttiva Me.Ber. Safe Frame che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento la struttura è estremamente rigida e sicura e non è soggetta ad indebolimenti.

### SEMPLICE

Tutti i comandi sono stati ripensati per essere facili da individuare e permettere un apprendimento estremamente rapido.

### INTELLIGENTE

Soluzioni come le rotelle per lo scarico del peso di caricamento, i comandi, le sicure e molti altri accorgimenti rappresentano una risposta intelligente alle esigenze di praticità del soccorso.

### SAFE-FRAME TECHNOLOGY

Mercury Cinque adopts MeBer Safe Frame construction philosophy, that is a single frame. Thanks to this important expedient, the structure is extremely sturdy and safe, not subject to impairments/ weakening.

### SIMPLE

All controls have been redesigned to be easy to locate and allow an extremely fast learning.

### SMART

Solutions such as wheels to facilitate the loading phase, controls, safety devices and many other improvements are intelligent answers to practical rescue needs



# MERCURY CINQUE LITE

**250KG**  
MASSIMA PORTATA SU  
TUTTE LE 5 ALTEZZE

**250KG**  
MAXIMUM LOAD  
CAPACITY  
ON ALL HEIGHTS



## STURDY

### SOLIDA & AFFIDABILE

La massima portata di 250 kg su tutti e 5 i livelli è resa possibile da materiali di alto livello e soluzioni ingegneristiche d'avanguardia.

### STURDY & RELIABLE

The maximum load capacity of 250 kg on all 5 positions is made possible by high quality materials and cutting-edge engineering solutions.

Codice - Article Code

**7095/4RG PROOF**

## STEP LOAD

### SOLLEVAMENTO A STEP

Grazie alle 5 altezze è possibile praticare un sollevamento a più riprese intervallando posizioni di riposo.

### LIFTING BY STEP

Thanks to the 5 heights it is possible to perform a multi-step lift by alternating resting positions.

**PENSATA PER GLI OPERATORI**  
**SICURA PER I PAZIENTI**  
**IDEALE PER LE ASSOCIAZIONI**



Codice - Article Code

**7095/4RG PROOF****PISTONE CENTRALE**

Sicurezza attiva

La molla a gas assicura che le gambe anteriori si aprano in ogni situazione, con e senza il paziente caricato.

**GAS SPRING**

Active safety

The powerful gas spring ensures that the front legs open in any situation, with or without the patient loaded onto the stretcher.

**CARICAMENTO SEMPLIFICATO**

Mercury è dotata di accorgimenti che semplificano il caricamento allo scopo di rendere l'operazione più leggera dal punto di vista fisico e più sicura per pazienti ed operatori.

**SIMPLIFIED LOADING**

Mercury is equipped with devices that simplify loading in order to make the various operations physically lighter and safer, both for operators and patients.

**DESIGNED FOR OPERATORS**  
**SAFE FOR PATIENTS**  
**IDEAL FOR RESCUERS**

**Facile da sanificare**  
Easy to sanitize



**Sistema di biocontenimento [Opzionale]**  
Biocontainment system [Optional]



Materiali e forme pensate per  
essere facilmente sanificate con  
Sanimeb o altri sistemi dopo  
l'utilizzo

Materials and shapes designed to  
be easily sanitized with Sanimeb or  
other systems after use

Emergenza Emergenza

**Spondine  
abbattibili**

**Foldable  
side rails**

Collaudato  
sistema di sblocco  
in sicurezza

Safety release  
system tested



Comodo sblocco  
ruote girevoli

Easy unlocking  
swivel wheels



# SICUREZZA PER PAZIENTI E OPERATORI

## SAFETY FOR PATIENTS AND OPERATORS

Immagine al centro  
GBox Unità di test 10G

Center image  
GBox 10G test unit



**STRESS TEST 10G  
INTERNI SU TUTTI  
I PRODOTTI**  
**INTERNAL 10G  
STRESS TEST ON  
ALL PRODUCTS**



**Art. 955 PROOF**



Sistema di  
fissaggio 10G

10G Fixing system

**Me.Ber. è stato il primo produttore a  
certificare i propri prodotti alle rigide  
normative 10G**

Mercury Cinque è il frutto dell'esperienza maturata in quasi 20 anni di sviluppo sulle tecnologie 10G Proof. Grazie a prodotti certificati 10G gli operatori sono protetti sia fisicamente che dal punto di vista della responsabilità in caso di incidenti.

**Me.ber. It was the first manufacturer  
to certify its products to the strict  
10G regulations**

Mercury Cinque is the result of the experience gained in almost 20 years of development on 10g Proof technologies. Thanks to 10g certified products, operators are protected both physically and in the event of accidents in terms of liability.

# MERCURY CINQUE LITE

## Ergonomia contro il mal di schiena.

I comandi della barella e l'ergonomia generale sono studiati per non sovraccaricare il soccorritore, soprattutto per alleviare il carico sulla schiena.



## Ergonomics for back pain.


The stretcher controls and general ergonomics are designed not to overload the rescuer, especially to relieve the load on the back.

## Ruote da 200mm per superare ogni asperità.

Maggior comfort per il paziente e grande sicurezza per i soccorritori che possono muoversi con facilità anche in presenza di terreni e superfici con asperità.

## 200mm wheels to overcome any roughness.

Greater comfort for the patient and great safety for rescuers who can move easily even in the presence of uneven ground and surfaces.

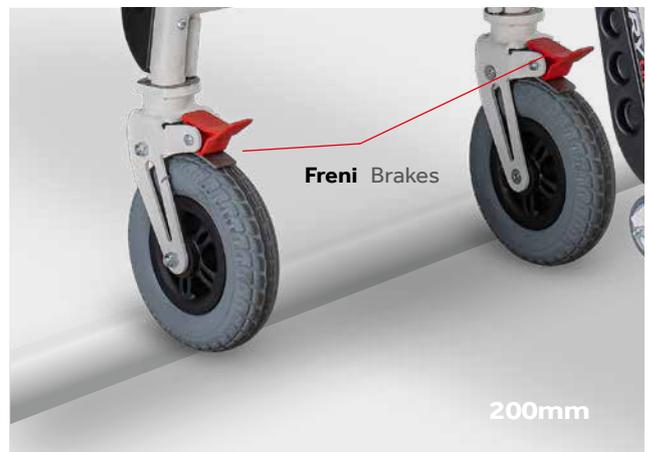

4RG



## 4 ruote girevoli per manovrare sempre in sicurezza.

Mercury Cinque ha tutte e quattro le ruote girevoli. Un semplice comando permette lo sblocco della rotazione delle ruote anteriori per la massima manovrabilità.

## 4 swivel wheels for safe manoeuvring at all times.

Mercury Cinque has all four swivel wheels. A simple command allows the unlocking of the rotation of the front wheels for maximum manoeuvrability.



## Decorazioni catarifrangenti.

Per migliorare la visibilità della barella nel contesto del soccorso stradale notturno sono stati impiegati adesivi catarifrangenti in vari punti.

## Reflective decorations.

To improve the visibility of the stretcher in the roadside assistance context at night, reflective stickers were used in various points.

# ACCESSORI ACCESSORIES

Fornita di serie con | Supplied with



Article Code  
**7013/A - 7013/N**

Materasso a tre pezzi in sky ignifugo elettrosaldato. Disponibile nei colori arancione e nero.

Mattress made with Sky and fireproof padding. Available in orange or black colour.



Article Code  
**12025**

Tasca portaoggetti multiuso  
Black multi usage object holder



Article Code  
**612/N-2/MEB**

Cintura toracica regolabile nera o arancio/nera  
Adjustable thoracic abdominal belt black or orange/black.



Article Code  
**608-N/MEB**

Cintura nera 2 pezzi con gancio in metallo (L. 155 cm).  
Black 2 pieces belt with metallic buckle a (L. 155 cm).

## Accessori | Accessories



Article Code  
**955 PROOF**

Sistema di fissaggio per barella autocaricante  
Fixing system for self-loading stretchers



Article Code  
**12128+12100/N**

Sistema allungabile per cuscino poggiatesta Art. 12100/N  
Adjustable system for headrest Art. 12100/N



Article Code  
**12018N**

Asta portaflebo telescopica  
Telescopic foldable phleboclysis stand



Article Code  
**939**

Piano portastrumenti per barelle  
Foldable instrument holder



Article Code  
**12106+12108**

"AIR-COM" Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni  
"AIR-COM" Anti-bedsores mattress with alternate segments for stretchers



**BARIATRIC**

## BARIATRICA

Con una portata di 250 kg Mercury è l'ideale anche in presenza di pazienti bariatrici. Nonostante l'elevata portata Mercury è leggera e resistente.

## BARIATRIC

Mercury is perfect also for bariatric patients, thanks to its maximum load capacity of up to 250 kg. Although this big load capacity, Mercury is light and sturdy.



Article Code  
**12080-001**

Kit per l'installazione e fissaggio del piano bariatrico MBP (Art. 12080)

Monting kit for MBP bariatric platform (Art. 12080)



Article Code  
**12154**

"Bear Pods" sistema di contenimento per obesi per barelle autocaricanti

"Bear Pods" Bariatric containment system for self-loading stretchers

## Accessori | Accessories



Article Code  
**12080**

MBP pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti

MBP wide bariatric platform for self-loading stretchers



Article Code  
**7015**

Materasso per pianale bariatrico MBP  
Mattress for bariatric MBP platform

# MERCURY CINQUE LITE



Article Code  
**12200**

Set ali bariatriche DX e SX per barelle autocaricanti Mercury completo di cinture con arrotolatore, kit fissaggio alla barella e materassi

Bariatric wings set for Mercury self-loading stretchers complete with belts with reel, assembly kit and mattresses.



Article Code  
**12202**

Ala bariatrica DX per barelle autocaricanti Mercury completa di cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella.

Right bariatric wing for self-loading stretcher, complete with belts with reel and assembly kit.



Article Code  
**12204**

Ala bariatrica SX per barelle autocaricanti Mercury completa di cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella.

Left bariatric wing for self-loading stretcher, complete with belts with reel and assembly kit.

Article Code  
**12170**

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti (art. 12202).

Black mattress for the right wing extension on a self-loading stretcher (art. 12202).



Article Code  
**12172**

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti (art. 12204).

Black mattress for the left wing extension on a self-loading stretcher (art. 12204).



# MERCURY CINQUE LITE



## Caratteristiche tecniche | Technical data

### Mercury Cinque Lite

Barella autocaricante a 5 altezze con doppia altezza di carico  
5 levels self-loading stretcher with double load heights

Model	Colore Colour	Materiale Material	Trendelenburg	Altezza regolabile Adjustable height	Altezza Height	Altezza massima di carico Max. loading height	Altezza minima di carico Min. loading height	Altezza ripiegata Folded height	Lunghezza Length	Lunghezza con carrello abbassato Length with folded trolley	Larghezza Width	Peso Weight	Portata Loading capacity
					cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
<b>7095/4RG PROOF</b> Altezza di carico 66 cm Max loading height 66 cm	■	Alluminio Aluminium	✓	✓	<b>95 - 87 - 79 - 68 - 37</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>31</b>	<b>197</b>	<b>162</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>250</b>
<b>7097/4RG PROOF</b> Altezza di carico 71 cm Max loading height 71 cm	■	Alluminio Aluminium	✓	✓	<b>101 - 91 - 82 - 70 - 39</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>197</b>	<b>167</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>250</b>

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 |

e-mail: info@meber.it