

MEBER⁺

MERCURY CINQUE 5

SELF LOADING FIVE LEVELS STRETCHER



Brancard autochargeant à 5 hauteurs
5 levels self-loading stretcher

www.meber.it

CINQUE 5

Code - Article Code

7075/4RG PROOF



**IL Y A DES CHOSES IMPOSSIBLES À FAIRE.
AVEC LES AUTRES BRANCARDS.**

Mercury Cinque est issu d'un des projets qui a eu le plus de succès dans le domaine des secours, certainement le produit Me.Ber. le plus apprécié, Mercury 4RG. Mercury Cinque a pour but d'étendre ultérieurement les capacités opérationnelles du modèle original grâce à l'introduction de la logique à 5 niveaux, cinq hauteurs, comme on les appelle généralement. Mais Mercury Cinque est bien plus qu'une évolution ! C'est le seul brancard à cinq hauteurs avec chariot avant repliable (d'ailleurs, à quoi sert un brancard qui vous aide à charger un patient de son lit, si vous ne pouvez pas passer dans les endroits serrés d'une habitation ?), et c'est aussi le seul qui vous garantit la capacité de charge maximale de 250 kg sur les cinq niveaux.



MERCURY CINQUE 5
SELF-LOADING FIVE LEVELS STRETCHER

**THERE ARE THINGS YOU CANNOT DO.
WITH THE OTHER STRETCHERS.**

Mercury Cinque is derived from one of the most successful projects in the field of rescue, certainly the Me.Ber product. Most appreciated, the Mercury 4RG. Mercury Cinque is intended to further extend the operational capabilities of the original model by introducing 5-level logic, five heights, as they are commonly called. Mercury Cinque is much more than an evolution though! It is the only five-height with a folding front trolley (on the other hand, what do you need a stretcher to help you load a patient from his bed, if you can't get through the narrow spaces of a house?) also the only one that guarantees you the maximum capacity of 250kg on all five levels.

POURQUOI CINQ HAUTEURS? WHY FIVE LEVELS?



NIVEAU DE CHARGE Hauteur maximale

Chargement sur le véhicule, manipulation au sol, transfert final aux urgences ou au bloc opératoire, traitement ou triage sur place.

LOAD LEVEL Loading height

Loading on the vehicle, handling on the ground, final transfer to the emergency room or operating room, treatment or triage on the site.

POSITION ÉLEVÉE Récupération élevée

Adaptée comme position de repos. Hauteur idéale pour placer le patient immobilisé sur plan dur.

HIGH LEVEL High rescue

Suitable as a resting position. Ideal height for the placement of a spinalized patient.



INTERMÉDIAIRE Lit élevé

Hauteur typique d'un lit hospitalier ou hauteur adaptée pour faire descendre le patient qui a des capacités motrices. Hauteur idéale pour passer du brancard à la chaise et vice versa.

INTERMEDIATE High Bed

Typical height of a hospital bed or height suitable for seating ambulatory patients. Ideal height to transfer the patient from stretcher to chair and vice versa.

POSITION BASSE Lit ou canapé de domicile

Hauteur typique d'un canapé ou d'un lit à domicile. Cette hauteur permet un passage aisé du patient qui collabore et simplifie le passage par brancard.

LOW LEVEL Bed or Sofa

Typical height of a sofa or a bed. This height allows easy transfer of a collaborating patient and simplifies the transfer on the stretcher.



POSITION BASE Récupération du sol

À seulement 30 cm du sol, elle permet toutes les opérations de charge conventionnelles, garantissant une capacité de charge de 250 kg.

BASE LEVEL Ground level rescue

At only 30cm from the ground, it allows all conventional operations with a maximum load of 250kg.

POURQUOI UN BRANCARD CINQ HAUTEURS ME.BER.?

WHY A ME.BER. WITH FIVE HEIGHTS?

MERCURY CINQUE 5
SELF-LOADING FIVE LEVELS STRETCHER

EXPÉRIENCE

Nous connaissons le monde des secours parce que nous en faisons partie depuis plus de 30 ans, aux côtés des professionnels et des établissements de soin. Nos produits sont issus d'un processus unique de conception et d'un constant perfectionnement.

EXPERIENCE

We know the world of medical rescue because we are part of it since 30 years, side by side with operators and health facilities. Our products are the result of a unique workflow of design and continuous improvement.



Certification 10G à la norme
UNI EN 1865/UNI EN 1789

UNI EN 1865/ UNI EN 1789
10G certified



**Chargement
simplifié**

Easy
loading



Code - Article Code

7075/4RG PROOF

Code - Article Code

7075/4RG PROOF

**ACCÉDER ET MANŒUVRER
DANS DES ESPACES RÉDUITS.
UN DÉFI POUR TOUS LES
BRANCARDS.**

**ACCESS AND TIGHT
MANOEUVRING.
A CHALLENGE FOR EVERY
STRETCHER.**



POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE LA FLEXIBILITÉ DES 5 HAUTEURS

Mercury Cinq a été conçu pour les secouristes, en pensant à leurs exigences et en exploitant leurs suggestions. Comme tous les autres Mercury, Mercury Cinq dispose d'un chariot avant repliable, essentiel pour se déplacer facilement dans tous les milieux et circonstances. Ceci n'est pas un petit détail, surtout si l'on pense que jusqu'à présent, aucun autre brancard à cinq hauteurs ne possédait cette caractéristique. Pourquoi? La réponse est simple: parce qu'il est conçu et fabriqué par Me.Ber., pensé et conçu pour les secouristes.

TO GET THE MAXIMUM FLEXIBILITY OF THE 5 HEIGHTS


Mercury Cinq was designed for first rescuers, with their needs in mind and their suggestions. Like any other Mercury, the Mercury Cinq also has a folding front trolley essential for moving easily in any environment and circumstance. This is no small detail, especially considering that so far no other five-height stretcher has this feature. Why? The answer is simple: because it is designed and built by Me.Ber., designed and built for rescuers.




**Roues de 200 mm
idéales aussi sur sols
irréguliers**

200 mm wheels ideal
even on difficult grounds

MERCURY CINQUE 5
SELF LOADING FIVE LEVELS STRETCHER

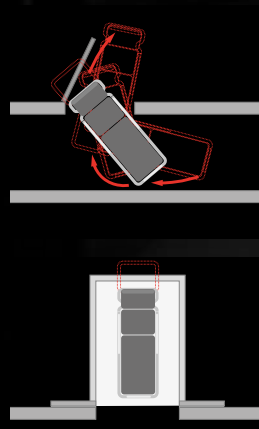

-300mm

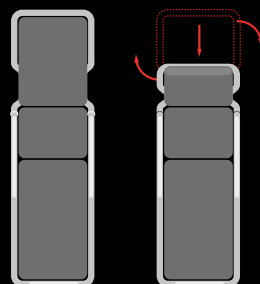

Débloccage chariot

Unlocking the front
trolley (of the stretcher)



**CHARIOT AVANT
REPLIABLE. CECI
FAIT LA DIFFÉRENCE.**

**FOLDING FRONT TROLLEY.
OUR QUALITY MAKES
THE DIFFERENCE.**

SAFETY

SAFE-FRAME

Mercury Cinque adopte la philosophie de fabrication Me.Ber. Safe Frame qui consiste en un châssis unique. Grâce à ce dispositif important, la structure est extrêmement rigide et sûre, et ne faiblit pas.

SAFE-FRAME TECHNOLOGY

Mercury Cinque adopts MeBer Safe Frame construction philosophy, that is a single frame. Thanks to this important expedient, the structure is extremely sturdy and safe, not subject to impairments/weakening.



250KG
CAPACITÉ D CHARGE
MAXIMALE SUR LES 5
HAUTEURS

250KG
MAXIMUM LOAD
CAPACITY
ON ALL HEIGHTS



SIMPLE

SIMPLE

Toutes les commandes ont été revues pour être faciles à trouver et permettre un apprentissage extrêmement rapide.

SIMPLE

All controls have been redesigned to be easy to locate and allow an extremely fast learning.

INTELLIGENT

Des solutions comme les roulettes pour le déchargement du poids de chargement, les commandes, les ceintures et d'autres détails représentent une réponse intelligente aux exigences de praticité des secours.

SMART

5 MOTS CLÉS POUR L'EXCELLENCE 5 KEYWORDS FOR EXCELLENCE



STURDY

SOLIDE & FIABLE

La capacité de charge maximale de 250 kg sur les 5 niveaux est rendue possible par des matériaux de haut niveau et des solutions d'ingénierie à l'avant-garde.

STURDY & RELIABLE

The maximum load capacity of 250kg on all 5 positions is made possible by high quality materials and cutting-edge engineering solutions.



SMART

Solutions such as wheels to facilitate the loading phase, controls, safety devices and many other improvements are intelligent answers to practical rescue needs

STEP LOAD

LEVAGE PAR ÉTAPES

Grâce aux 5 hauteurs, il est possible de pratiquer un levage à plusieurs reprises, en insérant des positions de repos.

LIFTING BY STEP

Thanks to the 5 heights it is possible to perform a multi-step lift by alternating resting positions.

CONÇU POUR LES PROFESSIONNELLS **SÛR POUR LES PATIENTS** **IDÉAL POUR LES ASSOCIATIONS**



PISTON CENTRAL

Sécurité active

Le ressort à gaz garantit que les pieds avant s'ouvrent en toute situation, avec et sans le patient dessus.

GAS SPRING

Active safety

The powerful gas spring ensures that the front legs open in any situation, with or without the patient loaded onto the stretcher.

CHARGEMENT SIMPLIFIÉ

Mercury est doté de systèmes qui simplifient le chargement, dans le but de rendre l'opération plus légère du point de vue physique et plus sûre pour les patients et les professionnels.

SIMPLIFIED LOADING

Mercury is equipped with devices that simplify loading in order to make the various operations physically lighter and safer, both for operators and patients.

DESIGNED FOR OPERATORS SAFE FOR PATIENTS IDEAL FOR RESCUERS

Facile à désinfecter
Easy to sanitize



Système de confinement biologique [En option]
Biocontainment system [Optional]




Matériaux et formes conçus pour être faciles à désinfecter avec Sanimeb ou d'autres systèmes après l'utilisation

Materials and shapes designed to be easily sanitized with Sanimeb or other systems after use

Emergency

Urgence

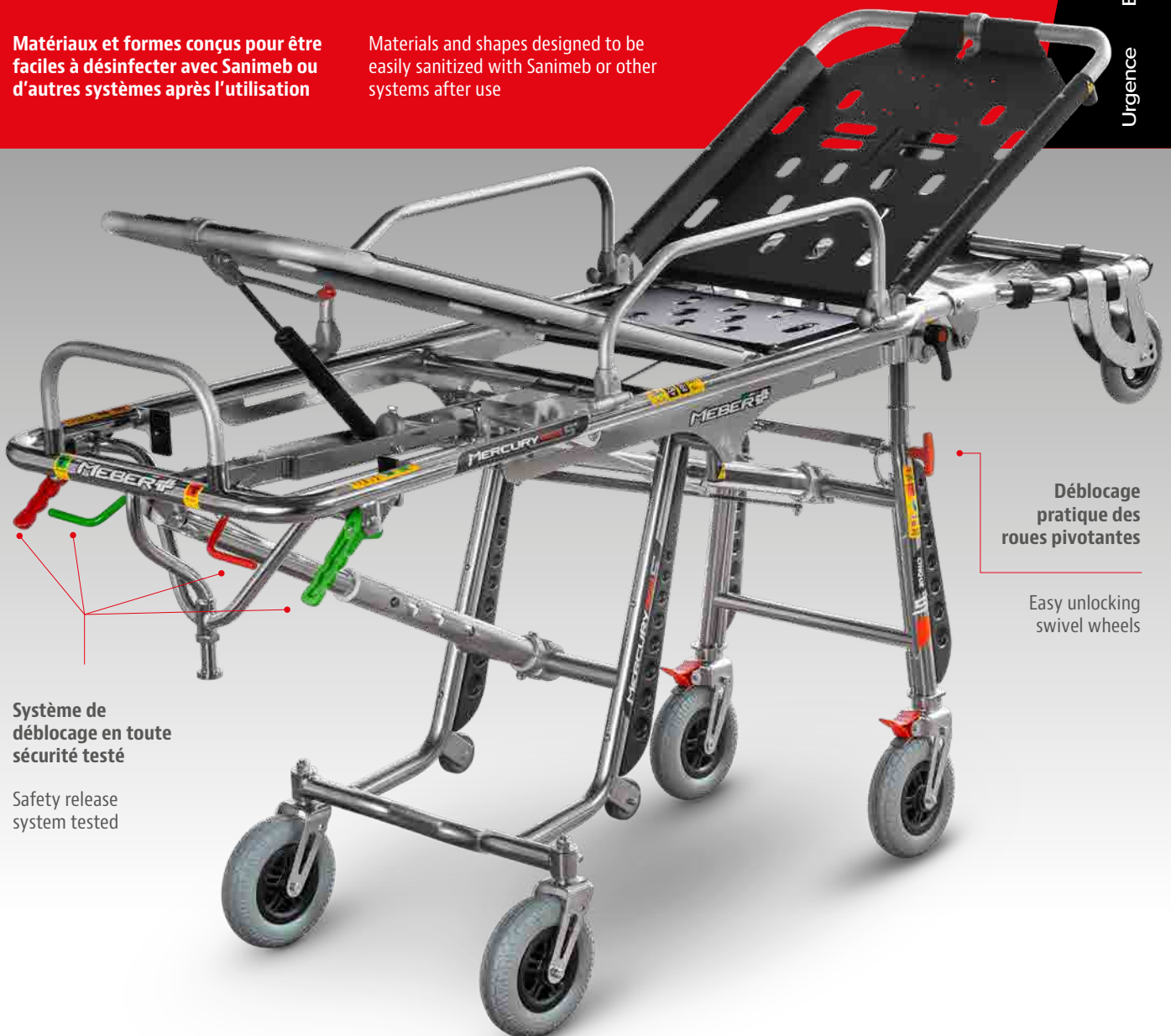

Système de déblocage en toute sécurité testé

Safety release system tested

Déblocage pratique des roues pivotantes

Easy unlocking swivel wheels

SÉCURITÉ POUR PATIENTS ET PROFESSIONNELS


SAFETY FOR PATIENTS AND OPERATORS

Image au centre
GBox Unité de test 10G

Center image
GBox 10G test unit



**STRESS TEST 10G
INTERNES SUR TOUS
LES PRODUITS**
**INTERNAL 10G
STRESS TEST ON
ALL PRODUCTS**

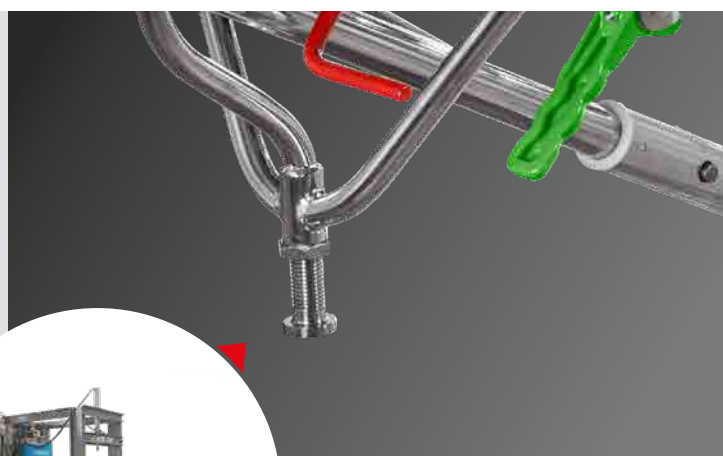

Art. 955 PROOF



Système de
fixation 10G

10G Fixing system

**Me.Ber. a été le premier producteur
à certifier ses produits aux normes
strictes 10G**

Mercury Cinque est issu de l'expérience de presque 20 ans de développement sur les technologies 10G Proof. Grâce aux produits certifiés 10G, les professionnels sont protégés aussi bien physiquement que du point de vue de la responsabilité en cas d'accident.

**Me.Ber. It was the first manufacturer
to certify its products to the strict
10G regulations**

Mercury Cinque is the result of the experience gained in almost 20 years of development on 10g Proof technologies. Thanks to 10g certified products, operators are protected both physically and in the event of accidents in terms of liability.

Ergonomie contre le mal de dos.

Les commandes du brancard et l'ergonomie générale sont conçues pour ne pas surcharger le secouriste, surtout pour atténuer la charge sur le dos.

Ergonomics for back pain.

The stretcher controls and general ergonomics are designed not to overload the rescuer, especially to relieve the load on the back.




Roues de 200 mm pour dépasser toute aspérité.

Plus de confort pour le patient, et grande sécurité pour les secouristes qui peuvent se déplacer facilement même en cas de sols et surfaces avec aspérités.

200mm wheels to overcome any roughness.

Greater comfort for the patient and great safety for rescuers who can move easily even in the presence of uneven ground and surfaces.

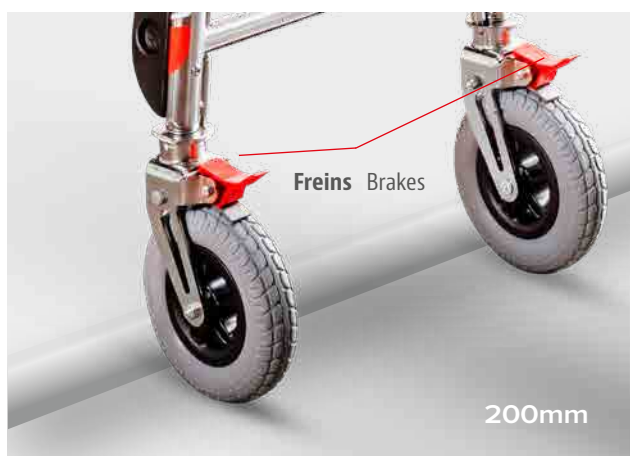

4RG



4 roues pivotantes pour manœuvrer toujours en toute sécurité.

Mercury Cinque a les quatre roues pivotantes. Une simple commande permet de débloquer la rotation des roues avant pour une manœuvrabilité optimale.

4 swivel wheels for safe manoeuvring at all times.

Mercury Cinque has all four swivel wheels. A simple command allows the unlocking of the rotation of the front wheels for maximum manoeuvrability.



Éléments réfléchissants.

Pour améliorer la visibilité du brancard en cas de secours routier nocturne, des autocollants réfléchissants ont été ajoutés à plusieurs endroits.

Reflective decorations.

To improve the visibility of the stretcher in the roadside assistance context at night, reflective stickers were used in various points.

ACCESSOIRES ACCESSORIES

MEBER

**Compatible avec /
Compatible with**

Mercury, Mercury Lite,
Frog, Frog Plus,
Frog Lite et Gecko.



BARIATRIC

BARIATRIQUE

Avec sa capacité de charge de 250 kg, Mercury est idéal également pour les patients bariatriques. Malgré la capacité de charge élevée de Mercury, celui-ci est léger et résistant.

BARIATRIC

Mercury is perfect also for bariatric patients, thanks to its maximum load capacity of up to 250 kg. Although this big load capacity, Mercury is light and sturdy.

Accessoires | Accessories



Article Code
12080

MBP système bariatrique
large pour brancards
autochargeants

MBP wide bariatric
platform for self-
loading stretchers



Article Code
7015

Matelas pour système
bariatrique MBP

Mattress for bariatric
MBP platform



Article Code
12080-001

Kit pour l'installation et
la fixation du système
bariatrique MBP
(Art. 12080)

Monting kit for MBP
bariatric platform
(Art. 12080)



Article Code
12154

"Bear Pods" système de
retenue pour obèses
pour brancards
autochargeants

"Bear Pods" Bariatric
containment system
for self-loading stretchers

Art. 12128

Système à rallonges pour appui-tête article 12100/N

Adjustable system for headrest article 12100/N

Art. 12100/N

Coussin appui-tête couleur noire

Black pillow for extendable headrest

Art. 12018N

Tige porte-perfusion télescopique

Telescopic foldable phlebotomy stand

Art. 12025

Poche porte-objets multi-usage

Black multi usage object holder

"COVER OX 2-3 ou 5 lt"

Porte-bouteille professionnelle pour bouteilles d'oxygène
4 modèles disponibles

"COVER OX 2-3 ou 5 lt"

Professional cylinder holder for oxygen bottles
4 models available

Fournie en standard avec | Supplied with



Article Code

7013/A - 7013/N

Matelas en trois parties en skai ignifuge électrosoudé. Disponible dans les couleurs orange et noir.

Mattress made with Skay and fireproof padding. Available in orange or black colour.



Article Code

12025

Poche porte-objets multi-usage
Black multi usage object holder



Article Code

612/N-2/MEB

Ceinture thoracique réglable
noire ou orange/noir
Adjustable thoracic abdominal belt black or orange/black.



Article Code

608-N/MEB

Ceinture noire 2 parties avec crochet en métal (L. 155 cm).
Black 2 pieces belt with metallic buckle a (L. 155 cm).

Accessoires | Accessories



Article Code

955 PROOF

Système de fixation pour brancard autochargeant
Fixing system for self-loading stretchers



Article Code

12128+12100/N

Système à rallonges pour coussin appui-tête Art. 12100/N
Adjustable system for headrest Art. 12100/N



Article Code

12018N

Tige porte-perfusion télescopique
Telescopic foldable phlebotomy stand



Article Code

939

Élément porte-instruments pour brancards
Foldable instrument holder



Article Code

12106+12108

"AIR-COM" Matelas anti-escarre en segments alternés pour brancards
"AIR-COM" Anti-bedsores mattress with alternate segments for stretchers



Caractéristiques techniques | Technical data

Mercury Cinque

Brancard autochargeant à 5 hauteurs avec double hauteur de chargement
5 levels self-loading stretcher with double load heights

Modèle Model	Couleur Colour	Matériau Material	Trendelenburg	Hauteur réglable Adjustable height	Hauteur Height	Hauteur maximale de chargement Max. loading height	Hauteur minimale de chargement Min. loading height	Hauteur repliée Folded height	Longueur Length	Longueur avec chariot baissé Length with folded trolley	Largeur Width	Poids Weight	Capacité de charge Loading capacity
					cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
7075/4RG PROOF Hauteur de chargement 66 cm Max loading height 66 cm	■	AISI 304, Aluminium Aluminium	✓	✓	95 - 87 - 79 68,5 - 39	66	64	31	197	167	56	48	250
7077/4RG PROOF Hauteur de chargement 71 cm Max loading height 71 cm	■	AISI 304, Aluminium Aluminium	✓	✓	100 - 90 - 81 68,5 - 39	71	69	31	197	167	56	49,5	250

Tous droits réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Nous nous réservons la possibilité de modifier des images ou des contenus sans obligation de préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale décline toute responsabilité pour tout dommage découlant d'une absence ou d'une inexactitude des informations fournies dans le présent document. Les images utilisées dans le présent document sont données seulement à titre d'illustration.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

MEBERT

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italie
Tél. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780
| e-mail: info@meber.it