

MEBER⁺



SANIMEB

**SISTEMA DI SANIFICAZIONE E
DISINFEZIONE PER AMBIENTI E VEICOLI**

Prevenzione quotidiana per la massima sicurezza contro le infezioni negli
ambienti e nei veicoli ad uso sanitario e non solo



www.meber.it

SEMPRE DISPONIBILE CONTRO I RISCHI QUOTIDIANI

SANIMEB ha un utilizzo molto semplice, infatti l'operatore dotato di apposite protezioni (mascherina + occhiali protettivi o visiera) deve vaporizzare il liquido disinfettante nella stanza e sulle superfici.



Riduzione o eliminazione dei patogeni biologici che vengono immessi nello studio da pazienti e operatori

Trattamento di ambienti e superfici anche tra un paziente e l'altro

In grado di raggiungere anche punti nascosti



L'IMPORTANZA DI UN AMBIENTE SICURO

Il COVID 19 ha messo in evidenza l'importanza dei mezzi e delle procedure preventive, ma soprattutto ha sensibilizzato tutti su un aspetto poco considerato, quello della disinfezione e sanificazione degli ambienti, dei veicoli e di tutti i materiali presenti.

Me.Ber. propone già Sterilair PRO, uno straordinario sistema di trattamento continuativo per il trattamento biologico dell'aria, ora completa questo programma di sicurezza ambientale con SANIMEB, un sistema che permette a qualsiasi struttura di poter autonomamente e in modo rapidissimo decontaminare e trattare ogni ambiente. Con questo prodotto Me.Ber. cambia il concetto di trattamento ambientale, sino ad oggi sviluppato con sistemi statici che possono creare zone d'ombra e tempi estremamente lunghi.



IDEALE PER IL TRATTAMENTO DEI VEICOLI

- Il trattamento di ambulanze e altri veicoli impiegati in attività sanitaria e non solo riveste un'importanza centrale nella prevenzione della diffusione di infezioni
- Il trattamento tempestivo e frequente limita il proliferare di agenti patogeni per garantire la massima sicurezza di operatori e pazienti
- Molti materiali e superfici non sono pensate per una facile igienizzazione a causa della loro composizione o del fatto che si trovano in punti non facilmente accessibili

NELLE AREE FREQUENTATE DA MOLTE PERSONE

- Luoghi frequentati da molte persone come sale d'attesa, palestre, punti vendita ecc. pongono il problema della diffusione di una vasta gamma di potenziali fonti di infezione
- Luoghi di lavoro in cui le persone restano per lungo tempo accrescono il rischio di infezione per effetto della prolungata esposizione
- Sistemi di disinfezione fissi offrono buoni risultati, ma presentano "coni d'ombra" rischiando di non trattare zone critiche degli ambienti operativi

IN AMBULATORIO E NELLE DEGENZE

- Una buona norma, soprattutto a seguito dell'emergenza COVID-19, è quella di operare una disinfezione profonda e continuativa
- La stessa attività è consigliabile dopo qualsiasi fermo prolungato della struttura
- L'alternativa più economica, ma di comprovata efficacia, a servizi di disinfezione eseguiti da società specializzate è eseguire autonomamente la disinfezione




Ideale in abbinamento a

Sterilair Pro

Orma

IL NUOVO SISTEMA SANIMEB

Questo nuovo sistema è stato studiato per un facilissimo utilizzo da parte di tutte le persone. Ideale per qualsiasi tipo di ambiente, ha il fine di rendere ogni operatore autonomo, nella fase di disinfezione ambientale, sempre in massima sicurezza. Da oggi potete trattare tutta la vostra struttura, senza avere interventi esterni e ripetere questa attività quando vorrete.

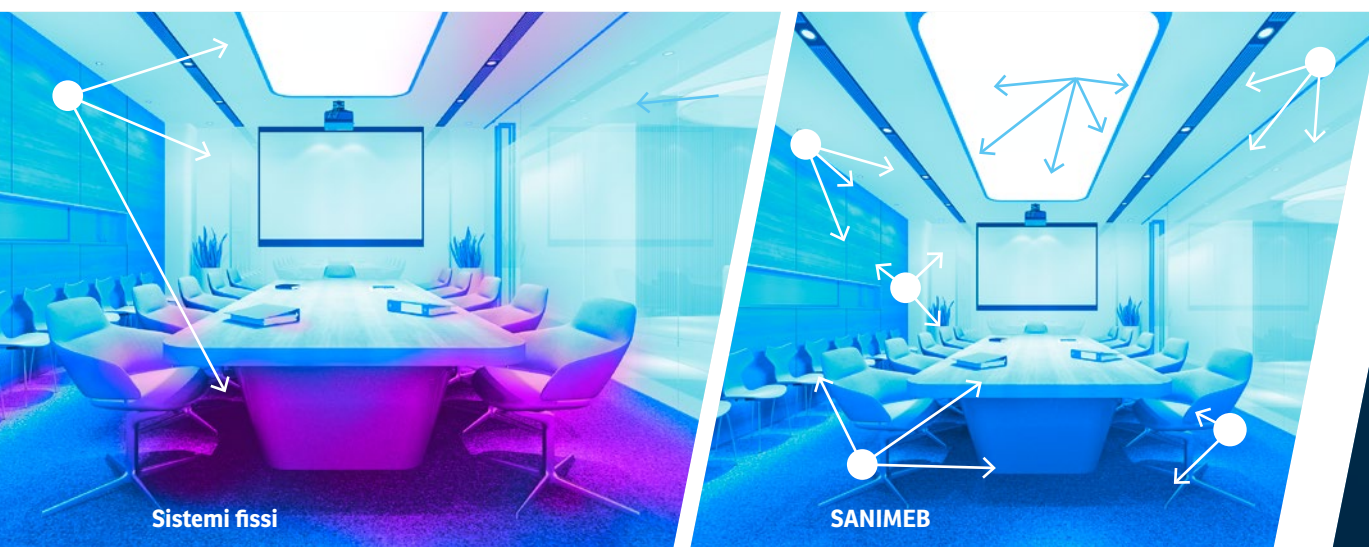


Con i sistemi a nebulizzazione fissa, può accadere che alcune aree "coperte" e le zone sotto squadro non vengano colpite dagli aerosol.


Con SANIMEB, possiamo nebulizzare il liquido disinfettante su tutte le aree e in qualsiasi interstizio

Effetto elettrostatico


Spray
convenzionale

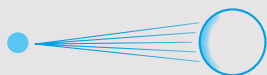

Nebulizzazione
con SANIMEB

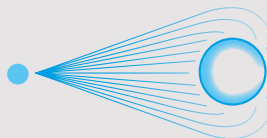

Ideale in qualsiasi tipo di ambiente o veicolo

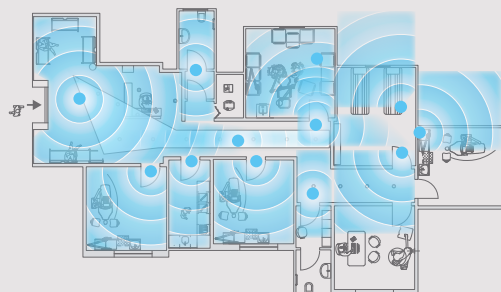

**MASSIMA PORTABILITÀ PER UNA DISINFEZIONE
OTTIMALE DI OGNI AMBIENTE E SUPERFICIE**

I VANTAGGI

SANIMEB



IDEALE TRA UN PAZIENTE E L'ALTRO E AD INIZIO TURNO

SANIMEB è un nebulizzatore aerosol che genera microparticelle molto sottili, in grado di garantire una perfetta espansione in qualsiasi punto della stanza. Il dispositivo è leggero, maneggevole e facilissimo da utilizzare. Grazie ad un sistema composto da un gruppo di elettroventilazione evoluta a grande potenza, è in grado di nebulizzare appositi detergenti concentrati e saturare in tempi rapidissimi anche ampi spazi. Grazie ad una sofisticata valvola dosatrice, SANIMEB è in grado di poter produrre nebulizzazioni di diverse densità, da 10 a 50 micron, secondo esigenza. Il dispositivo è composto da un gruppo tecnologico e da un serbatoio in speciale materiale plastico con capienza sino a 3 litri.

Gruppo di elettroventilazione
calibrato per la nebulizzazione
di appositi detergenti.



Semplice e pratico
L'utilizzo di SANIMEB è semplicissimo e il getto nebulizzato ha una lunghezza di circa 5 - 10 metri. Il circolo forzato d'aria è assicurato da speciali ventole silenziose.

Serbatoio da 3 litri
Per lavorare efficacemente senza interruzioni

Massima efficacia riconosciuta
in combinazione con il suo apposito liquido

PERCHÉ SANIMEB

Disinfezione ambientale, delle superfici e dei veicoli

SANIMEB è un sistema in grado di creare disinfezione ambientale e delle superfici; se abbinato a Sterilair PRO si ottiene una sicurezza che nessun altro sistema integrato è in grado di dare.


Tempo di trattamento

20 MINUTI


Dimensioni a confronto



Capello umano

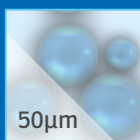

Spray aerosol

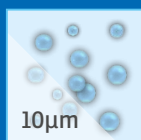

Micro spray
SANIMEB

Volete trattare la sala di attesa e gli altri ambienti di lavoro durante la giornata per assicurarvi di essere in un ambiente sicuro? Lo potete fare rapidamente. Nessun altro sistema può garantirvi tanta sicurezza e tanta rapidità.



SANIMEB NASCE CON L'OBIETTIVO DI RISOLVERE I VERI PROBLEMI CHE VIVE QUOTIDIANAMENTE CHI DEVE CONTRASTARE I RISCHI DI INFEZIONE DA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA.

Con questo sistema utilizzando l'apposito liquido in dotazione è possibile seguire un trattamento approfondito. Nelle strutture mediche è addirittura possibile intervenire tra un paziente e l'altro e in meno di 20 minuti, (trattamento e stazionamento inclusi!!!). L'ambiente o il veicolo trattati con SANIMEB può essere quindi subito riutilizzato in quanto riportato a massima sicurezza.



360°

Protezione avanzata contro il rischio biologico

DETERSANIFICANTE **SANIMEB**

L'importanza di un sistema completo

SANIMEB è un sistema composto dal dispositivo nebulizzante e da un apposito liquido. Si tratta di un detergente disinfettante basato su tecnologia triammina. Non contiene alcol né quaternari d'ammonio.



10LITRI / DA DILUIRE TRA 1% E 2%

Liquido concentrato fornito in taniche da 10 litri. Deve essere diluito con acqua tra 1 e 2%. Il tempo di contatto è di soli 15 minuti.



**PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO**

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. MINISTERO DELLA SALUTE N° 20426



Attività ad ampio spettro

Efficace nel contrasto a numerosi agenti patogeni



Detergente ad alte prestazioni

Eccellenti risultati microbicidi ed efficacia contro il microorganismo che provoca la tubercolosi.



Efficacia testata

Consigliato per vari utilizzi, ideale per studi medici, ospedali, per trattamento di superfici, pavimenti ed attrezzature.




CON STERILAIR PRO IL TOP DELLA SICUREZZA

Tutelatevi con il sistema di Sicurezza ambientale Me.Ber.. Con SANIMEB possiamo attuare un'attività di trattamento biologico ambientale e di tutte le superfici, mentre Sterilair PRO attua una azione biologica continua, durante tutte le attività normalmente svolte in un ambiente medico o non medico.

SANIMEB

SISTEMA DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTALE

Prevenzione quotidiana per la massima sicurezza contro le infezioni negli ambienti e nei veicoli ad uso sanitario e non solo

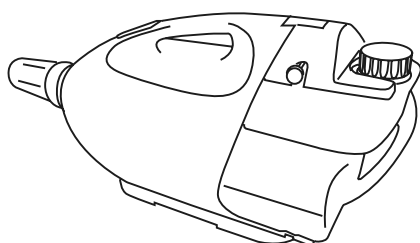

Art. 16506

DISPOSITIVO NEBULIZZATORE SANIMEB

Dimensioni

160 x 550 x 250 mm

Peso

3 Kg

Capacità serbatoio

3 litri

Distanza getto

circa 5 - 10 metri

Art. 16508

LIQUIDO DISINFETTANTE PER NEBULIZZAZIONE

in diluizione 1%-2%,
tanica da 10 litri

Diametro particelle

da 10 a 50 μ m

Potenza

1250 Watt

Lunghezza cavo

6 metri

Alimentazione

100-110 V, 220-240 V

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780

| e-mail: info@meber.it