



MEBER

**QUANDO VI OCCORRE
UN PO' DI FORZA... EXTRA
WHEN YOU NEED
SOME... EXTRA POWER**

EXTRA^{FX}
POWERED STAIR-CHAIR ERGOLIFT


Sedia sali/scendiscale motorizzata con telaio fisso idonea al trasporto
Fixed frame powered Stair Chair suitable for transportation



INSUPERABILE NEL [DURO] LAVORO QUOTIDIANO UNBEATABLE IN [HEAVY DUTY] DAILY WORK




SICUREZZE SAFETIES

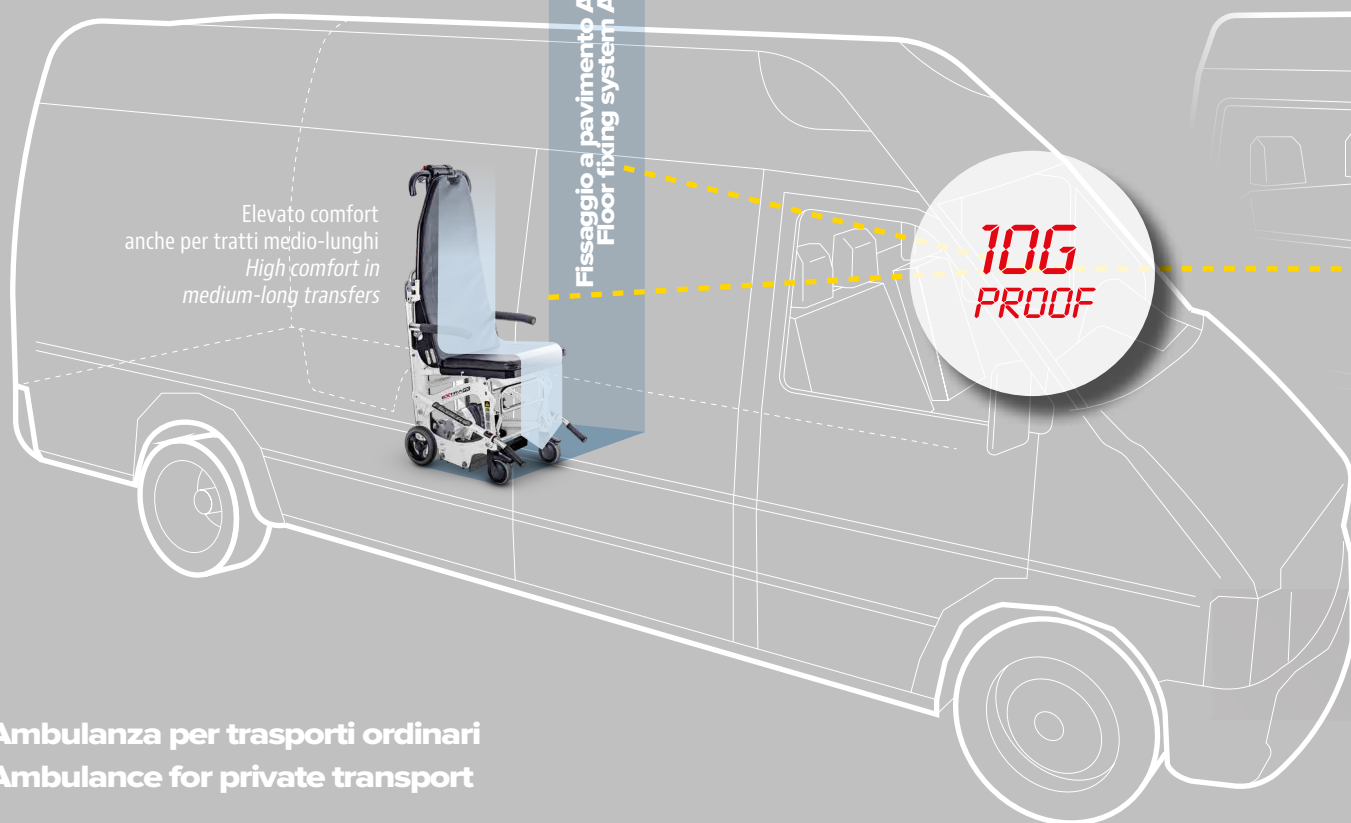

Ambulanza per trasporti ordinari
Ambulance for private transport

SERVIZI A CONFRONTO

SERVICES COMPARISON

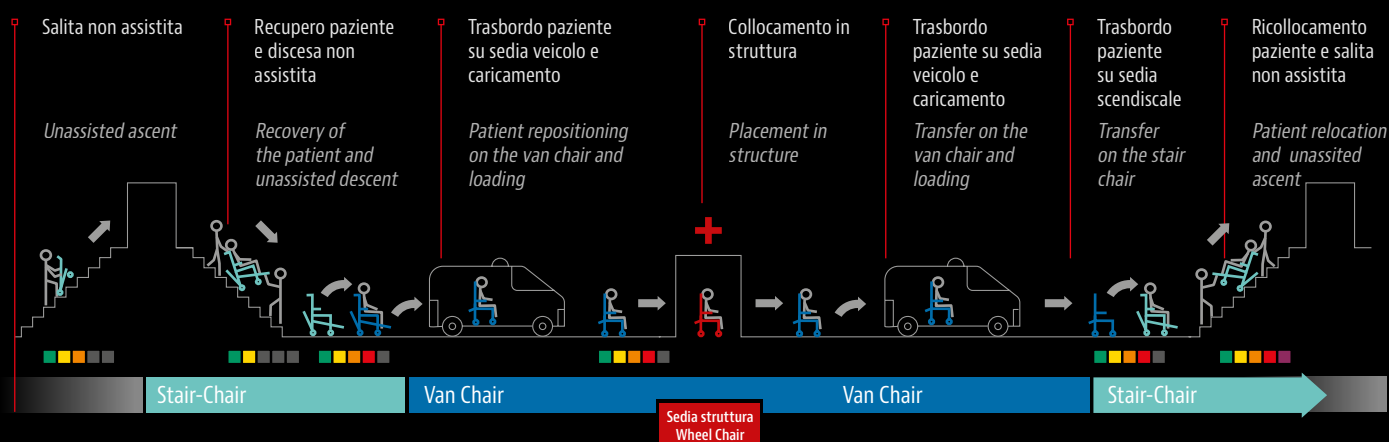

Sedia sali/scendiscale tradizionale
Conventional stair-chair

È nata la sedia motorizzata ideale per coprire le esigenze del moderno servizio ordinario a 360°, è Extra Ergolift FX. Idonea al trasporto su van ed ambulanze è l'ideale per il prelevamento e ricollocamento dei pazienti senza sforzo.

The powered chair is designed for covering the needs of modern all-round service, its name is Extra Ergolift FX. Suitable for transport on vans and ambulances, it is ideal for recovering and relocating patients without effort.

EXTRA FX
POWERED STAIR-CHAIR ERGOLIFT

SEDIA SALISCENDISCALE MOTORIZZATA IDEONEA AL TRASPORTO


POWERED STAIR CHAIR SUITABLE FOR TRANSPORT

Sistemi di ritenuta
Restraint kits

Riducete i rischi di infortuni e salvaguardate il vostro personale
Reduce the risk of injuries and protect your crew



Van trasporto disabili
Van for disabled people transport

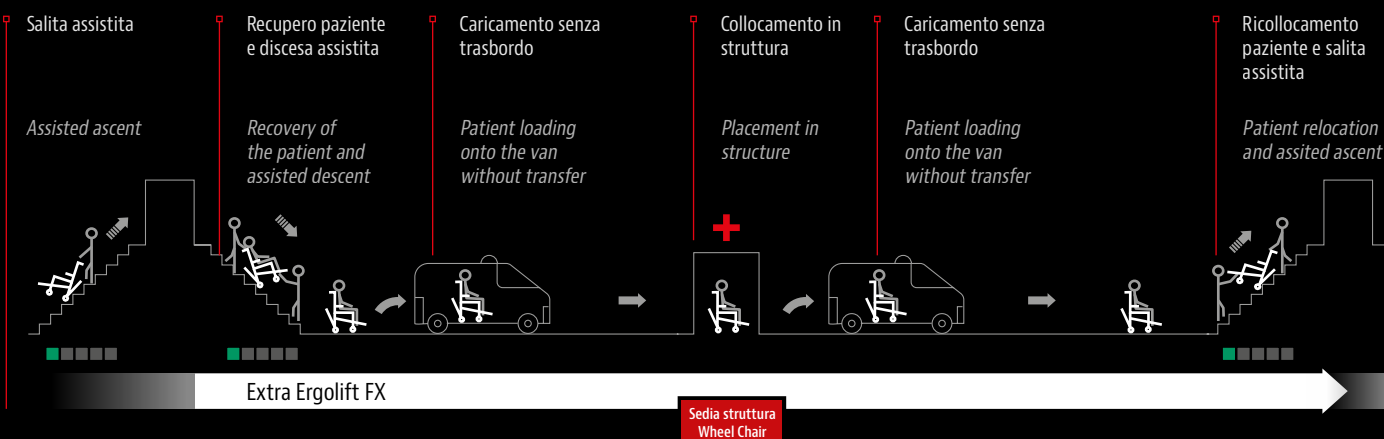

Extra Ergolift FX

Sforzo medio operatori
Medium operators effort

<5Kg 10Kg 15Kg 20Kg >25Kg

Console di controllo wireless
Wireless control panel

Maniglione allungabile
Telescopic handle bar

Preparazione facile e veloce
Easy and simple set-up

Cintura toracico-addominale
Thoracic-abdominal belt



PORTATA
LOAD CAPACITY

230 kg

Extra Ergolift FX è in grado di trasportare in sicurezza pazienti bariatrici fino ad un peso di 230kg garantendo il massimo comfort.

Extra Ergolift FX can safely transport bariatric patients up to 230kg while ensuring the highest comfort.

Cingoli lunghi ad alta aderenza
Long and high gripping tracks

4 punti di attacco dedicati per retrattori
4 dedicated points for restraint systems

Ruote posteriori da 200mm
200mm rear wheels

Un grande aiuto fisico

A great physical help

Rapido ritorno dell'investimento

A quick return on investment

Semplificazione nell'organizzazione turni

Simplified shifts organization

EXTRA FX
POWERED STAIR-CHAIR ERGOLIFT



GRANDE SUPPORTO PER L'EVACUAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE DEI PAZIENTI

La gamma di sedie motorizzate sali/scendiscale di Me.Ber. si amplia con EXTRA Ergolift FX. Dopo il grande successo del modello pieghevole nasce ora FX che garantisce le stesse elevate prestazioni, ma in configurazione fissa, ideata espressamente per l'impiego in servizi ordinari o come dispositivo specialistico in strutture sanitarie e non.

The range of Me.Ber. powered stair-chairs expands with the new Extra Ergolift FX. Thanks to the great success of the folding model Ergolift, FX borrows to grant the same high performances, but with a fixed frame, especially designed to fulfill the needs of daily transportations services or as a dedicated device in both medical and non medical facilities.

GREAT SUPPORT FOR EVACUATION AND RELOCATION OF PATIENTS

LEGA LEGGERA

Extra Ergolift è realizzata con speciali leghe di alluminio di derivazione aeronautica in modo da contenere al minimo il peso e facilitarne il trasporto.

LIGHT ALUMINIUM ALLOY

Extra Ergolift is made with special aluminum alloys aeroderivative to minimize the weight and facilitates the transport.

CINGOLI

lunghi ad alta aderenza

I pattini di Extra Ergolift hanno una lunghezza maggiorata che consente l'appoggio costante su tre gradini per una maggiore stabilità ed un elevato comfort.

Long and high-grip sliding TRACKS

The Extra Ergolift sliding tracks have a longer length allowing to constantly lay on three steps for better stability and comfort.

ELEVATA AUTONOMIA

Extra Ergolift è dotata di potenti batterie al litio che consentono, con un'unica carica, la percorrenza di 18 rampe di scale da 20 gradini l'una con un carico trasportato di 130 kg.

HIGH AUTONOMY

Extra Ergolift is supplied with powerful lithium batteries that, with 130 Kg load allows to cover 18 stairs of 20 steps each using a single charge.

WIRELESS CONSOLE

La console di comando trasmette i segnali alla batteria tramite la tecnologia wireless.

The wireless dashboard sends signals to the battery.

Modula la potenza

La velocità di salita e discesa può essere variata in base alle esigenze, tramite i comandi della console.

Motore semplice e compatto

I cingoli sono azionati tramite un motore elettrico pensato per ridurre gli ingombri e le manutenzioni.

Simple and compact engine

The sliding tracks are driven by an electrical motor designed to reduce encumbrances and maintenance.

FACILE DA USARE EASY TO USE

100%
MAX COMFORT

+108°

Batteria ad elevata capacità

Una batteria intercambiabile agli ioni di litio di 28V, con capacità di 5Ah che assicura una lunga durata.

High capacity battery

An interchangeable 28V lithium battery with 5Ah capacity ensures a long charge life.



Movimento parti mobili
Moving Parts

Adjustable power

The ascending and descending speed can be adjusted by the dashboard commands, as necessary.



SICUREZZE SAFETIES

Per gli operatori

Extra Ergolift FX è pensata per evitare infortuni durante il servizio e garantire la massima operatività anche a personale con poca forza fisica e riduce al minimo la necessità di movimentare il paziente.

For operators

Extra Ergolift FX is designed to prevent injuries during the service and to guarantee maximum efficiency even for weak operators.

Per i pazienti

Extra Ergolift FX assicura il massimo dell'efficienza in tutte le situazioni garantendo al paziente un trasporto sicuro e quanto più possibile confortevole.

For patients

Extra Ergolift FX ensures maximum efficiency in all situations. It guarantees the patient a safe and comfortable transport.

BRAKE OFF

Extra Ergolift FX è dotata di un sistema di emergenza per consentire la discesa in totale sicurezza anche in caso di scaricamento improvviso della batteria durante il servizio.

Extra Ergolift FX is supplied with an emergency system to safely descend stairs even in case of sudden battery discharging.

COMFORT

575 mm

Elevato comfort in viaggio

Extra Ergolift FX offre un elevato livello di comfort in viaggio grazie all'imbottitura e all'inclinazione dello schienale di 108° che permettono di affrontare comodamente anche viaggi medio-lunghi.

Elevato comfort in piano

Due ruote anteriori girevoli da 125 mm e due grandi ruote posteriori da 200 mm consentono di percorrere con maggior facilità anche i terreni più impervi, evitando sobbalzi fastidiosi.

High comfort during transport

Extra Ergolift FX ensures a high level of comfort when travelling thanks to the back rest padding and 108° inclination that allow to comfortably seat during medium-long journeys.

High comfort level

Two front rotating Ø 125 mm diameter wheels and two rear fixed Ø 200 mm allow an easy transport even on impervious grounds, relieving the patient from annoying and painful jolts.

Derivata
dall'esperienza
Meber Extra

Derived from
Me.Ber. Extra unique
experience



EXTRA670



EXTRA ERGOLIFT



EXTRA ERGOLIFT FX



Caratteristiche tecniche | Technical data

EXTRA FX
POWERED STAIR-CHAIR ERGOLIFT

Art.	675
Materiale Material	Leghe di alluminio Aluminium alloy
Lunghezza Length	84-150 cm
Larghezza Width	55 cm
Altezza Height	140 cm
Peso Weight	34 kg
Portata Load capacity	230 kg
Batteria Battery	28 V
Autonomia Autonomy	18 rampe da 20 scalini con un carico di 130 kg 18 ramps by 20 steps with a load of 130 kg
Tempo di ricarica Charging time	max 1ora/hour



Fornita di serie con | Supplied with

Article Code

610

Cintura toracico-addominale con
aggancio a 4 punti per
Extra Ergolift FX

Thoracic-abdominal belt with four
fastening for Extra Ergolift FX



Accessori | Accessories

Article Code

620

Sistema di fissaggio sedie fisse
certificato UNI EN 1789

UNI EN 1789 certified fixing system
for fixed frame chairs



Article Code

12090

Ricaricabatteria MILWAUKEE M28C per batteria
ricaricabile M28 RED sedia Extra Ergolift.

Battery charger MILWAUKEE M28C for rechargeable
battery M28 RED Extra Ergolift chair.



Article Code

12092

Batteria MILWAUKEE M28 RED LITHIUM 5,0 Ampere
per sedia Extra Ergolift.

Battery MILWAUKEE M28 RED 5,0 Ampere for Extra
Ergolift chair (3,0 Ampere for Extra EU countries).



Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780

| e-mail: info@meber.it