



7080/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dagli altri modelli della famiglia Mercury, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. È dotata di sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ogni asse. Mercury Lite è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi "[Sistemi di fissaggio](#)"). Viene fornita completa di materasso e cinture.

Caratteristiche:

Comandi ergonomici per operazioni di caricamento sul mezzo di soccorso e per regolazioni configurazioni

Schienale regolabile in lega di alluminio con molla a gas bloccabile per inclinazioni 0°-75°

Spondine laterali da 600 mm completamente ribaltabili

N. 2 ruote anteriori fisse Ø 200 mm con freni

N. 2 ruote posteriori girevoli a 360° Ø 200 mm autocentranti

N. 2 ruote di carico Ø 150 mm

Leve di sblocco per le ruote girevoli anteriori



Completa di materasso Art. 7013, n. 2 cinture Art. 608-A/MEB o 608-N/MEB e n. 1 cintura Art. 612/AN-2/MEB o Art. 612/N-2/MEB.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

10G Zertifiziert	
Material	Painted aluminium
Höhenverstellbar	
Liegefläche	With Trendelenburg
Mittlere Höhe (cm)	72
Maximale Höhe (cm)	95
Max. Ladehöhe (cm)	66
Min. Ladehöhe (cm)	64
Höhe zusammengeklappt (cm)	31
Breite (cm)	57
Länge (cm)	197
Länge mit zusammengeklapptem Trolley (cm)	165
Gewicht (kg)	40
Tragfähigkeit (kg)	250
Typ	Barella autocaricante
Rädertyp	4 Big Rotating Wheels
Anwendung	Transport
Größe	Adulti

IMAGES



SIEHE AUCH



Mercury 7070/4RG PROOF
Höhenverstellbare roll-in-trage aus
edelstahl mit 4 drehbaren rädern
zertifiziert



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta



Mercury 7072/4RG PROOF
Höhenverstellbare roll-in-trage,
hohe ausführung aus edelstahl mit
4 drehbaren rädern zertifiziert



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli- versione alta



Mercury 7092 PROOF
Roll-in-trage zertifiziert



Mercury 7094 PROOF
Roll-in-trage zertifiziert

ZUBEHÖRE



12080

"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



12128

Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



12154

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



12018N

Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



Feststellsystem en 1789 für roll-in-tragen proof

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



12070/BG

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



Matratze 4 stk. in feuerbeständigem skay, orange, elektro-geschweisst für selbstlader proof

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



Schwarze trenn-matratze für tragstuhl evox

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



12106

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



939

Piano portastrumenti per barelle



938

Flaschenhalterung für trage und stuhl



938/BIG

Oximeb big flaschenhalterung



12084-001

Custodia per ali bariatriche



12170

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



707

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



608

Sicherheitsgurt 2-teilig mit metallhaken



608

Sicherheitsgurt 2-teilig mit metallhaken



12025



612/N
Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz



612/N
Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz


Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5

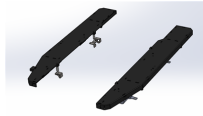

12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle
autocaricanti Mercury completo di
materassi, cinture con arrotolatore
e kit fissaggio alla barella

SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR



7013/N
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



608
Sicherheitsgurt 2-teilig mit
metallhaken



612/N
Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem
für roll-in-tragen und stühle,
schwarz



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti