



15114

Materasso antidecubito ad aria a segmenti intercambiabili



CARATTERISTICHE

Materasso ad aria in PVC composto da 20 elementi che si gonfiano e sgonfiano alternativamente, posti su una base con lembi da rimboccare al normale materasso. Grazie agli automatici che fissano ogni singolo elemento al lenzuolo di sostegno si facilita il ricambio di ogni elemento. La maggiore altezza degli elementi gonfi rispetto al materasso a bolle consente l'uso anche nei casi in cui il rischio di ischemia è maggiore. Di facile utilizzo è lavabile con detergenti.

*Disponibile anche a tre uscite

Caratteristiche tecniche:

Materiale : PVC atossico spessore 0,40 mm

Dimensioni: 190x85 cm.

Peso: 4 kg.

Innesti: 2

Tubi di raccordo: 2 tubi in PVC lunghi 1,40 mt

Compressori: CO 01

Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

VEDI ANCHE



15130

Materasso antidecubito in poliuretano espanso ventilato a due densità differenziate




15110

Kit materasso antidecubito ad aria a elementi intercambiabili con CPR cover e compressore a 2 uscite



15128

Materasso antidecubito in poliuretano espanso

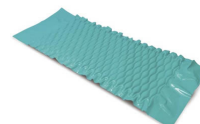

15112

Materasso antidecubito ad aria a pressione alternata