



7097/4RG PROOF Mercury Lite Cinq 7097/4RG Proof

Mercury Lite Cinq ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes version haute – certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures



CARACTERISTIQUE

Version haute du brancard Mercury Lite Cinq. Issu de l'un des projets les plus réussis dans le domaine du sauvetage ; certainement le produit Me.Ber. le plus populaire : le Mercury 4RG. Mercury Cinq est destiné à étendre davantage les capacités opérationnelles du modèle original en introduisant les cinq hauteurs. Cependant, Mercury Cinq est bien plus qu'une évolution ! C'est le seul brancard à cinq hauteurs avec chariot avant rabattable! Le ressort à gaz garantit que les jambes avant s'ouvrent dans toutes les situations, avec et sans le patient chargé.

5. POSITIONS :

1. NIVEAU DE CHARGEMENT-Hauteur maximale

Chargement sur le véhicule, manutention au sol, transfert final aux urgences ou au bloc opératoire, traitement ou triage sur le terrain.

2. POSITION HAUTE -Récupération haute

Convient comme position de repos. Hauteur idéale pour placer le patient spinalysé.

3. INTERMÉDIAIRE- Lit haut

Hauteur typique d'un lit d'hôpital ou hauteur adaptée à l'assise du patient ambulateur. Hauteur idéale pour la translation du brancard à la chaise et vice versa.

4. POSITION BASSE- Lit ou canapé de maison

Hauteur typique d'un canapé ou d'un lit dans une maison. Cette hauteur permet une translation aisée du patient collaborateur et simplifie le passage via le brancard..

5. POSITION DE BASE- Récupération au sol

À seulement 30 cm du sol, il permet toutes les opérations de chargement classiques, garantissant une capacité de 250 kg. Hauteurs : 101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm

Léger grâce aux alliages d'aluminium

Ergonomie contre le mal de dos : les commandes du brancard et l'ergonomie générale sont étudiées pour ne pas surcharger le secouriste, notamment pour soulager la charge sur le dos.

Roues de 200 mm : plus de confort pour le patient et une grande sécurité pour les secouristes qui peuvent se déplacer facilement même en présence de sols et de surfaces inégales.

4 roues pivotantes pour manœuvrer en toute sécurité à tout moment : Mercury Cinq dispose de 4 roues pivotantes. Une simple commande permet le déblocage de la rotation des roues avant pour un maximum de maniabilité.

Décorations réfléchissantes : pour améliorer la visibilité du brancard dans le cadre de l'assistance routière de nuit, des autocollants réfléchissants ont été utilisés en divers points..

Compatible avec le système de fixation art. 955 Proof.



Appareil certifié selon les normes de sécurité européennes harmonisées UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification 10G	
Material	Aluminium peint
Longueur (cm)	197
Longueur avec chariot replié (cm)	167
Largeur (cm)	57
Hauteur max (cm)	101
Min hauteur (cm)	37
Hauteur plié (cm)	31
Hauteur de chargement max (cm)	71
Hauteur de chargement min. (cm)	69
Poids (kg)	42
Capacité de charge (kg)	250

IMAGES



VOIR AUSSI



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes – version haute

ACCESSOIRES



12080

Plateforme bariatrique large « MBP » pour brancards à chargement automatique FROG MERCURY et GECKO avec ceintures avec enrouleur et fixations de brancard



12080-001

Kit de montage sur plan bariatrique pour brancards à chargement automatique



12106

AIR-COM : matelas anti-escarres pour brancards à segments alternés



955 PROOF

Système de fixation EN 1789 pour brancards à chargement automatique Proof



12154

Système de confinement Bear Pods pour obèses pour brancards à chargement automatique



12018N

Tige porte-perfusion télescopique pour brancards à chargement automatique



939

Plateau porte-instruments pour brancards



12128

Système extensible pour appui-tête de brancard MeberX et Mercury



12100/N

Oreiller électro-soudé noir en forme de logo Meber pour matelas électro-soudé



12070/BG

« COVER OX 2-3 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12070/BR

« COVER OX 2-3 BR » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12072/BG

« COVER OX 5 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 5 litres



12072/BR

« COVER OX 5 BR » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 5 litres



12084-001

Étui noire pour ailes bariatriques



12170

Matelas noir pour l'extension bariatrique droite pour les brancards de chargement automatique



12172

Matelas noir pour l'extension bariatrique gauche pour les brancards de chargement automatique



7014/A

Matelas 4 pièces en skai ignifugé électro-soudé



938

Porte-bouteille Oximeb



12054

Porte-bouteille Oximeb Maxi – Porte-bouteille pour bouteille de 3 litres



707

Bâche de transfert pour protéger matelas à 6 poignées



608-A/MEB

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber orange (L. 155 cm)



608-N/MEB

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises




612/N-2/MEB

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



12025

Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique

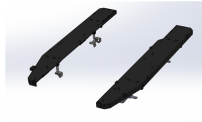

12200

Extensions bariatriques pour Mercury brancard

BUNDLES



12025

Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique



608-N/MEB

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



612/N-2/MEB

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



7013/N

Matelas 3 pièces en skai ignifugé électro-soudé