




## 16150/V Ergon

---

Komforttrage mit variabler Geometrie – grün

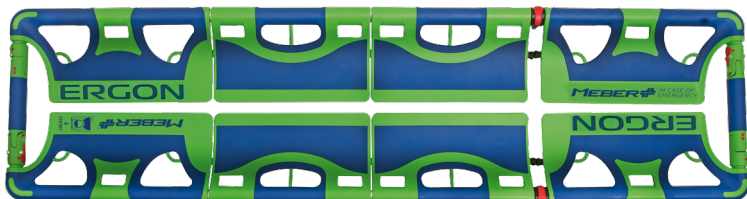

---

### CARATTERISTICHE

---



ERGON wurde von Rettungspersonal und Technikexperten aus dem Bereich der medizinischen Notfallgeräte entwickelt, um bislang undenkbare Leistungen zu bieten. Dank der Verwendung eines speziellen Materials (dem exklusiven Me.Ber. HC3 - High Comfort Composite Cell) garantiert die Trage höchsten Komfort, insbesondere in den Auflagebereichen des Patienten. Diese Material besteht aus einem weichen Material auf das ein hoch widerstandsfähiges Kunststoffpolymer aufgebracht wird. Neben dem Komfort für den Patienten wurde ERGON so konzipiert, dass der Rettungsdienst in seiner Arbeit unterstützt ist, und bietet folglich einzigartige Lösungen. Die Griffe sind mit HC3 überzogen und besitzen eine Neigung von 20°, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Spezielle Halterungen und Ösen wurden so angebracht, dass die Gurte mit den Karabinern leicht befestigt werden können. Der Abstand zwischen den beiden Hälften beträgt nur 25 mm; im Vergleich zu den normalen Schaufeltragen, die einen Abstand von 80 mm aufweisen, ist dadurch eine hervorragende Unterstützung der Wirbelsäule gewährleistet. Die Schaufelform ist somit breiter und wurde so konzipiert, dass sie zwischen dem Patienten und dem Boden mit Leichtigkeit eingeführt werden kann. Das Material HC3 garantiert nicht nur eine absolute Stabilität, sondern auch eine gute Wärmeisolierung. Dies hilft der Hypothermie vorzubeugen und ermöglicht, neben der Beschaffenheit der Trage selbst, eine längere Liegedauer des Patienten auf der Trage.

Eine weitere technische Neuheit ist das neue Gelenkverschlussystem Flexilock (patent pending), das erlaubt die Trage in zwei Teile zu unterteilen und außerdem Bergungen in extremen Situationen und Positionen ermöglicht. Außer den Standardtechniken ermöglicht ERGON folglich einen Patient in einem kritische Zustand auch bei schwierigen Gegebenheiten zu bergen.

---

## HAUPTEIGENSCHAFTEN


---

Größe	Adulti
Anwendung	Rescue Immobilization Transport
Höhe (cm)	7,5
Breite (cm)	43
Länge (cm)	165
Max. Länge (cm)	201
Länge zusammengeklappt (cm)	120
Tiefe zusammengeklappt (cm)	9
Gewicht (kg)	10,5
Tragfähigkeit (kg)	170
Trauma	
Alpine	
Material	HC3 - High Comfort Composite Cell Alluminio Leghe di alluminio

---

## IMAGES

---

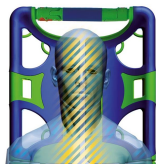

---

## SIEHE AUCH

---



**16150/G**  
Komforttrage mit variabler  
geometrie – gelb


---

## ZUBEHÖRE

---



**X-Lock 9150**  
Ergonomische kopffixierung

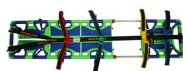

**X-Fix 9156**  
Rückhaltegurtsystem mit  
karabinern



**959**  
Ergon fixing system



**16150-002**  
Borsa per stoccaggio Ergon



**16150-001**  
Borsa verricellabile per il trasporto



**584**  
Busta nera con 3 cinture arancio a 2  
pz e fibbia in plastica a sgancio  
rapido per barella Ergon



**572**  
Cintura blu 2 pz con gancio in  
metallo (l. 155 cm)



**574**  
Busta blu con 3 cinture Art. 572

---

## SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR

---



**584**  
Busta nera con 3 cinture arancio a 2  
pz e fibbia in plastica a sgancio  
rapido per barella Ergon

---