



## 844 Antares


Collare cervicale rigido 2 pz. mis. STOUT



### CARATTERISTICHE

Il collare cervicale ANTARES è uno strumento altamente professionale ed indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz., si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di foro centrale per l'effettuazione di un eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo realizzate in diversi colori per contraddistinguere le varie misure. È realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Disponibile in 6 diverse misure.

### DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Trauma	
Lunghezza max (cm)	36,5
Lunghezza (cm)	36
Altezza max (cm)	19
Altezza min (cm)	14


### VEDI ANCHE



**Antares 856**  
Set collari cervicali 6 pz. con custodia



**Sirius 876**  
Set collari cervicali 6 pz. con custodia

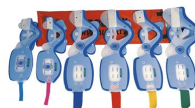

**Sirius 874**  
Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 862 - 864 - 866 - 868



**Antares 854**  
Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 842 - 844 - 846 - 848



**Antares 853**  
Set collari cervicali 3 pz. con custodia Art. 844 - 846 - 848